

LOJER®

*Den mänskliga kroppen kännetecknas av naturlig högteknologi,
som kombinerar extremt komplexa funktioner
med unika personliga egenskaper.
Detta är anledningen till att den reparerar och
underhåller, en uppgift som kräver en utmärkt utrustning.*

manuthera® 242

NY DIMENSION

AV MOBILISERINGS- OCH MANIPULATIONSBEHANDLINGAR



Effektivare för
korrekta diagnoser

Utmärkt patientkomfort
och säkerhet

Ökad effektivitet och
hög ergonomisk standard

Funktioner som ger möjligheter
till nya behandlingsmetoder

Designad av experter, världens mest mångsidiga behandlingsbänk

Med en unik modern teknologi som är utvecklad av experter i Finland, underlättar Manuthera® 242 mobiliserings och manipulationsbänk terapeutens arbete vilket ger de bästa möjligheterna för korrekt diagnos och behandling av patienter.

Manuthera 242 är en allt i ett behandlingsbänk för krävande undersökningar och behandlingar. Den används av olika terapeuter, såsom idrottsmassörer, naprapater, osteopater, OMT fysioterapeuter, fysioterapeuter och kiropraktorer. Manuthera 242 tar terapeutens arbete till en ny nivå vilket underlättar arbetet med att ställa diagnoser och behandla, tack vare det patenterade operativsystemet baserat på två synkroniserade motorer. Bänken har unika multi-traktions egenskaper och många andra funktioner i bänkens uppbyggnad.


Patienten kan flyttas till terapeutiska och anatomiska positioner mjukt och tyst. Behandlingar kan utföras 3-dimensionellt med hjälp av bänkens funktioner; traktion, flexion, lateral flexion och rotation, samt även ta hjälp av gravitationen. Bänkens design, det dubbla motorsystemet och ramen med lager i alla rörliga delar, minskar belastningen och förbättrar ergonomin i terapeutens arbete, vilket även ger bättre behandlingsresultat.

Utmärkt behandlingsupplevelse för patienten

Manuthera 242 erbjuder en utmärkt behandlingsupplevelse för patienten. Tack vare den robusta ramen, anatomiska designen och dynorna, samt de lätt avtorkbara ytorna, känner sig patienten bekväm under all typ av behandling.

Bänkens rörelser liknar rörelsemönstret i patientens ryggrad, vilket gör att patienten inte behöver vända och vrida på sig under behandlingen. Bänkens mjuka naturliga rörelsemönster möjliggör också en smärtfri och avslappnad behandling. En bra behandlingsupplevelse för patienten ger en bättre effekt och en högre återbesöksfrekvens.

Tack vare den elektroniska tippfunktionen kan patienter med svåra funktionshinder enkelt komma upp på bänken. Tekniken är utformad för att ge en flexibel möjlighet till många olika behandlingsmetoder och att patienten inte ska behöva gå av bänken under behandlingen.

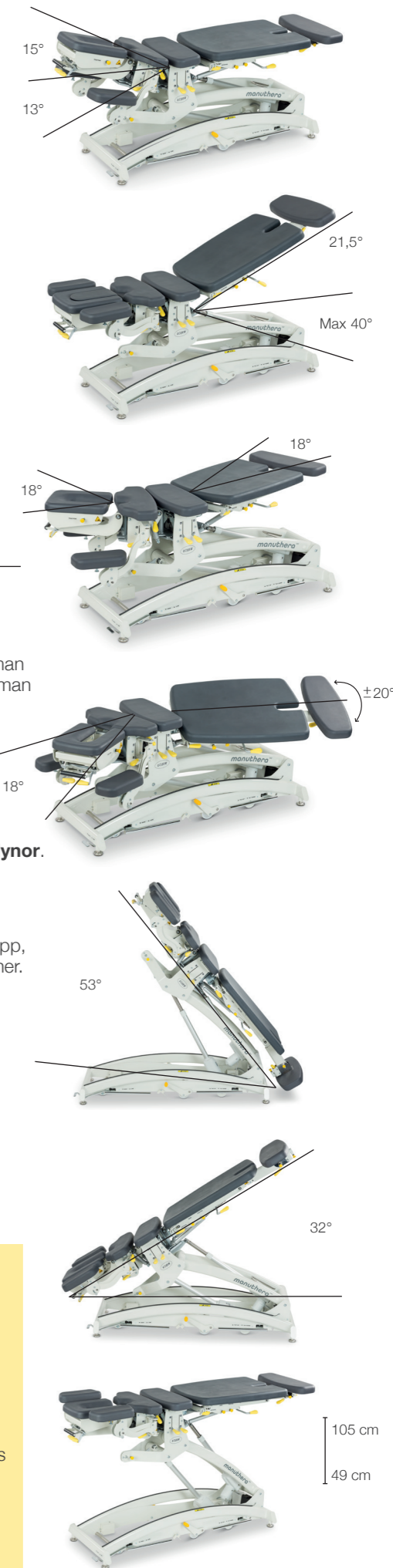

Många funktioner för patientens bästa

Huvuddynan vinklas på två sätt och har avancerade 3D-funktioner för säker mobilisering av halsryggen och nacken genom både vertikal och lateral huvudrörelse.

Armstöd med steglös höjdjustering och lateral rörelse. Armstöden kan vridas till sidan av bänken och användas som sidodynor.

Lätt att använda, robusta och ergonomiska reglage för att låsa rörelser till önskat läge.

Säkerhetslist som stannar bänkens rörelser vid beröring.

Justerbara ben med fötter.

Mycket stort spann mellan högsta och lägsta höjdläge.

Låsbara hjul för enkel förflyttning.

NYHET Elektronisk Tippning uppåt / Tippning nedåt funktion för gravitationsbaserade behandlingar. Tippningsfunktionen gör det enklare att få upp patienten på bänken och man undviker spinal kompression på ett effektivt sätt.

NYHET Tvådelad thorakal sektion för vertikal thorakal böjning och en 3D rotationsrörelse. Ett unikt verktyg för thorakal mobilisering och manipulation!

Nedre bensektion med extension/flexion, lateral och 3D rotationsrörelse. NYHET Bensektionens rotationsrörelse.

Multi-positions fotdyna: uppviklat läge, fotstöd när man ligger ner och som dyna när man går på bänken i tippat läge.

Lättskött, hållbar, bio-kompatibel med mjukt formgjutna dynor.

NYHET Dropp funktion. Ny teknologi: traktionsdropp, vilket gör det enklare att utföra olika höftmanipulationer.

Fram och bak Total låsfunktion vilket ger ytterligare stöd för belastande behandlingstekniker och gör bänken mycket stabil i varje sektion.

Manuthera 242 med synkroniserade lyftmotorer

Manuthera 242 är världens första behandlingsbänk som är utrustad med två synkroniserade lyftmotorer. De dubbla motorerna ger en mjuk, smidig och lättmanövrerad bänk vilket underlättar terapeutens arbete. Det finns även en automatisk säkerhetsfunktion som känner av om något kommer i kläm, vilket stannar motorerna och lyfter bänken för att frigöra hindret.

Manuthera® 242 – för de avancerat professionella

Manuthera 242 är designad för att stödja terapeutens arbete på många olika sätt:

- Tidlös finsk design för förbättrad ergonomi
- Avancerade behandlingsmöjligheter med multitraktion och 3D funktioner
- Optimerade motoriserade funktioner för att minska belastningar
- Många rörelsemöjligheter för varje del
- Funktionaliteter för att stödja behandlingsmetoder med djupare inverkan
- Kullager ger mjuka rörelser och en lång hållbarhet vid frekvent användning
- Lättskött och hållbart ytmaterial
- Lättmanövrerad bänk
- Trevlig behandlingsupplevelse som fått beröm av patienter
- Högt andrahandsvärde
- Tillverkningsgaranti 2 år

NYHET

| | Manuthera 242 | Manuthera 241 |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| Antal thorakal dynor | 2 | 1 |
| Höjdomfång | 49–105 cm | 53–89 cm |
| Vikt | 170 kg | 128 kg |
| Tippfunktion nedåt (ansiktsdynan nedåt) | Elektronisk | Mekanisk |
| Tippfunktion uppåt (ansiktsdynan uppåt) | Elektronisk | Mekanisk |
| Rotation av nedre delen | x | - |
| Total låsfunktion av övre delen | x | - |
| Total låsfunktion av nedre delen | x | - |
| Hjul | 2 | 4 |
| Max belastning | 150 kg | 160 kg |
| Lyftmotorer (endast höjning*) | 2 | 1 |
| Dropp funktioner | Normal dropp och traktionsdropp | Traktionsdropp |
| Automatisk säkerhetsfunktion för klämrisk | x | - |
| Klämskydd (rörelsestopp) | x | - |
| Justerbara ben och fötter | x | - |
| Säkerhetslåsfunktion | Automatisk (2 tim) | Manuell med spak |
| Dynor | Mjukt formgjutna | Skumplast och konstläder |
| U-formad huvuddyna | x | - |
| Kudde till andningshål | x | - |
| Tillverkningsland | Finland | Finland |

* Motorer lyfter enbart, sänkning med egen kraft

Läs mer om produktens egenskaper och möjligheter samt kontakta oss om olika finansieringsalternativ.

MEDEMA® *Carefully chosen*

Medema Physio AB | Torshamnsgatan 39 | 164 40 KISTA

Tel. 08-404 1200 | info@medema.se | www.medema.se

LOJER® *For easy care*

Lojer Oy | Putajantie 42 / PB Box 54 | FI-38201 SASTAMALA


Tel. +358 10 830 6700 | info@lojer.com | www.lojer.com



ISO 9001
ISO 13485

Manuthera 242 mobiliserings och manipulationsbänk tillverkas av Lojer Oy, ett finskt företag som designar, tillverkar och marknadsför högklassiga produkter för hälso- och sjukvård samt wellness, både globalt och i Finland.

Manuthera 242
Max bredd 54 cm

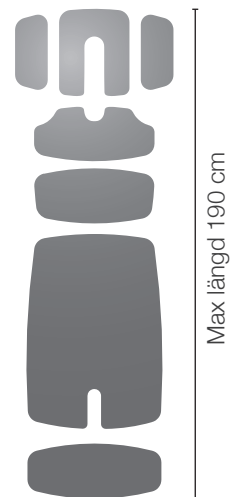

Manuthera 241
Max bredd 57 cm

