

LOJER - YLI 100 VUOTTA HISTORIAA

FOR EASY CARE

TUOTEKUVASTO
FYSIOTERAPIA, HIERONTA JA WELLNESS



LOJER® 100
Since 1919

Lojer on Pohjoismaiden suurin fysioterapialaitteiden ja -tarvikkeiden jälleenmyyjä

Yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Lojer muodostaa Pohjoismaiden suurimman fysioterapialaitteiden ja -tarvikkeiden jälleenmyyntiyhtiön, joka edustaa lukuisia alan huippumerkkejä.

Lisäksi Lojer Group on Suomen johtava sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja ja alan merkittävin kotimainen työllistäjä. Kaikki Lojer-tuotteet on valmistettu alusta loppuun Suomessa. Yli satavuotiaan kotimaisen ja yksityisessä omistuksessa olevan yhtiön tuotantoyksiköt sijaitsevat Sastamalassa, Kempeleessä ja Hollolassa.

Lojer-hoitopöytien ja muiden valmistamiemme laitteiden huollosta, korjauksista ja varaosapalvelusta vastaa Lojer Medical Service. Varaosat toimitamme suoraan logistiikkakeskuksestamme tai kotimaisten tehtaidemme varastoista arkisin noin vuorokauden sisällä tilauksesta.

Kiitos kun valitsit Lojerin.



Seuraa meitä myös Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa

Sisällysluettelo

■ Hoitopöydät	4
■ Harjoituslaitteet	20
■ Liikunta- ja kuntoharjoittelu	32
■ Harjoitusvälineet	41
■ Paineaaltohoitolaitteet	55
■ Akupunktio	62
■ Hieronta, lämpö- ja kylmähoito	68
■ Terapiavälineet	74
■ Vastaanoton varustus ja tarvikkeet	79

Tilaukset kellon ympäri verkkokaupasta:

www.shop.lojer.com

hinnat | tarjoukset | lisätietoa



AIREX

ERGO-FIT



STORZ MEDICAL

LOJER

THERABAND

MONARK
SPORTS & MEDICAL

HEGU



TRUE

ITO PHYSIOTHERAPY
& REHABILITATION

manuthera

easyforce

TOGU

4 Hoitopöydät

Fysioterapia- ja hierontapöydät, kauneudenhoito- ja työtuolit, jakkarat, mattohoitopöydät, kippilaudat.



20 Harjoituslaitteet

Lääkinnällisen harjoitus-terapian vetolaitteet, harjoituspenkit, puolapuut, voimaharjoittelulaiteet.



32 Liikunta- ja kuntoharjoittelu

Kuntopyörät, crosstrainerit, juoksumatot, soutulaitteet, nojapuut.



41 Harjoitusvälineet

Vastuskuminauhat ja tuubit, käsien harjoitus- ja tasapainotuotteet, pallot, painomansetit, käsi- ja levypainot ja painotangot.



55 Paineaaltohoitolaitteet

Radiaaliset ja fokusoidut paineaaltohoitolaitteet, magneettiterapia, sähkö- ja ultraäänilaitteet, tens, tems ja elektrodit



62 Akupunktio

Akupunktioneulat, neula-stimulaattori, ohjetaulut.



68 Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

Hierontaöljyt, suojapaperit, lämpö- ja kylmähoitotuotteet, parafiinaltaat.



74 Terapiavälineet

Traktio- ja blackroll-tuotteet, kiilat, matot, ilmalastat, tyynyt.



79 Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Potilasverhot ja sermit, anatomiset opetusvälineet ja julisteet, mittausvälineet, teipit, voiteluaineet.



Hoitopöydät


Hoitopöytä on terapeutin tärkein työkalu. Tutustu laajaan hoitopöytävalikoimaamme ja löydä oma yksilöllisiä tarpeitasi palveleva hoitopöytä.



Lojer-verhoilujen materiaalit ja värimallit

Future

Paloturvallinen Future on tyylikäs, himmeästi hoitava ja ympäristöystävällinen materiaali. Antibakteeri-, antimikrobi- ja homeenestokäsittelyn ansiosta Future soveltuu erinomaisesti vaativiin olosuhteisiin. Materiaalissa on käytetty edistysellistä pinnoiteteknologiaa, joka säilyy pinnalla eikä kulu puhdistettaessa. Erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali on jopa 3-6 kertaa perinteisiä keinoahkamateriaaleja kestävämpää (Martindale yli 300 000).

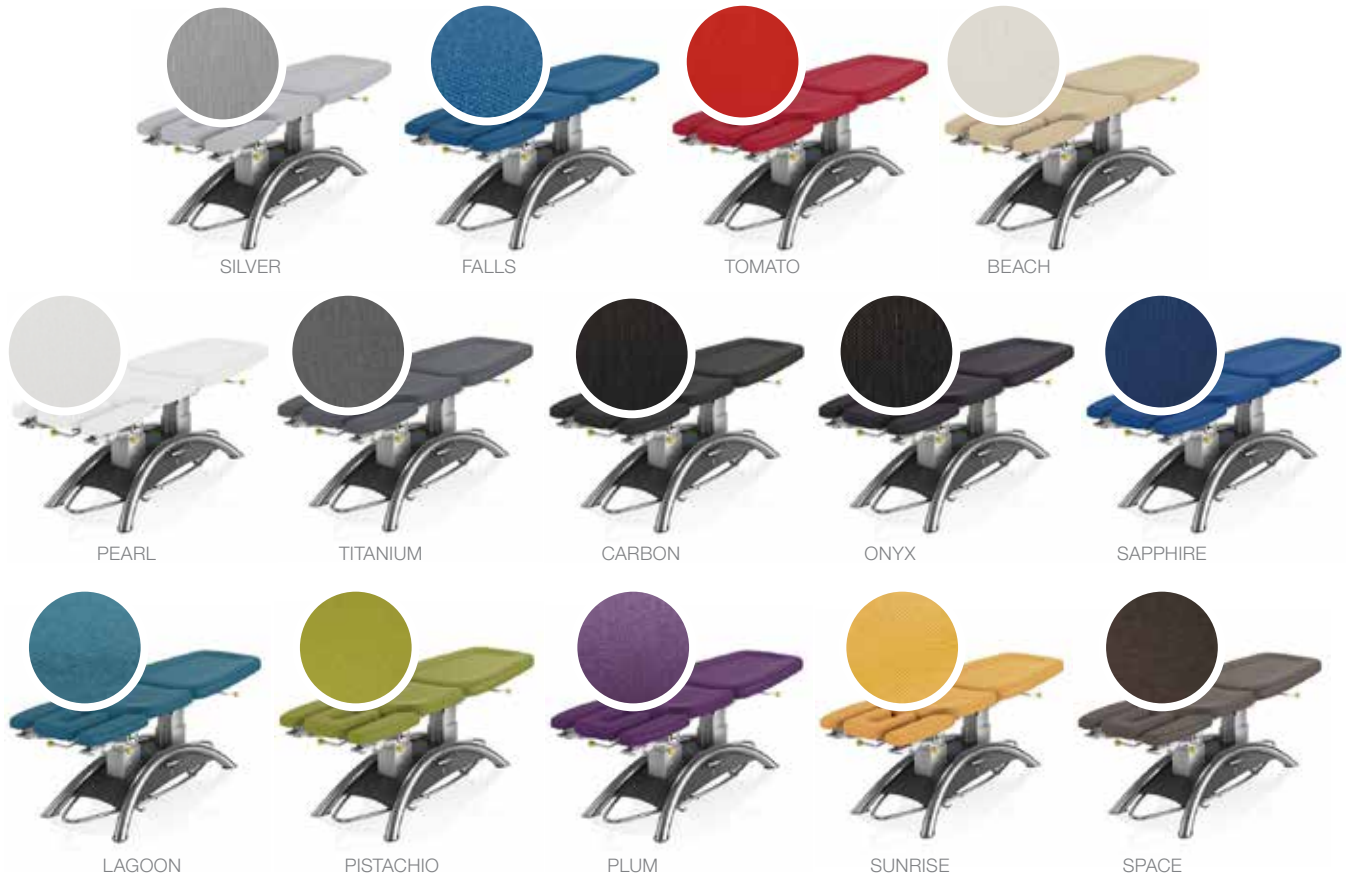

Future-verhoilussa käytetty edistysellinen pinnoiteteknologia on saanut ISO-sertifioinnit, jotka todistavat materiaalien kyvystä tuhota viruksia tai estää niiden kasvua.



Tutustu tarkemmin materiaaleihin, väreihin ja puhdistusohjeisiin www.lojer.com >> Huolto ja palvelut >> Palvelut >> Materiaalivaihtoehdot

Nature

Nature on korkealaatuinen ja kestävä uuden sukupolven ympäristöystävällinen materiaali. Materiaali on Öko-Tex standardin mukainen, eikä näin ollen pidä sisällään mitään raskasmetalleja eikä ftalaatteja.



Manuthera 242 – maailman monipuolisin hoitopöytä

Suomalaisten asiantuntijoiden kehittämää, patentoitua ja ennennäkemätöntä tekniikkaa edustava Lojer Manuthera® 242 mobilisaatio- ja manipulaatiopöytä tukee terapeutin työtä parhaan diagnosoinnin ja hoidon tarjoamisessa potilaille.

Manuthera 242 on all-in-one-hoitopöytä vaativaan tutkimus- ja hoitotyöhön erilaisille manuaaliterapeuteille urheiluhierojasta naprapaateihin, osteopaateihin, OMT-fysioterapeutteihin, fysioterapeutteihin ja kiiropraktikkoihin. Manuthera 242 antaa terapeutin työskentelyyn täysin uuden ulottuvuuden: sen takaavat patentoitu, kahden synkronoidun moottorin ohjausjärjestelmä, ennennäkemättömät multi-traktio-ominaisuudet ja lukemattomat hoito- ja diagnosointimenetelmät mahdollistava rakenne ja toiminnallisuudet.

Manuthera 242 tarjoaa potilaalle laadukkaan hoitokokemuksen. Kaikissa hoitotoimissa tukeva runko, anatominen muotoilu ja pehmustus sekä helposti puhtaana pidettävät pintamateriaalit tekevät potilaan olosta miellyttävän. Pöydän makuutaso liikkuu kuin potilaan selkäranka, eikä terapeutin tarvitse nostaa potilasta. Pöydän pehmeät ja kevyet liikkeet luontaisilla liikeradoilla tekevät hoidosta kivutonta ja rentouttavaa. Miellyttävä hoitokokemus mahdollistaa suuremmat toistomäärät ja näin tehokkaamman hoidon. Sähköisen kallistustoiminnon avulla huonokuntoinenkin potilas pääsee pöydälle helposti. Monimenetelmähoitoihin joustavasti mukautuva tekniikka varmistaa, ettei potilaan tarvitse nousta pöydältä kesken hoidon.

242 Manuthera 242 mobilisaatiopöytä



manuthera ^{242®}



MAHP242



*"Manuthera 242 on kuin osa minua.
Yhdelläkään muulla hoitopöydällä, jonka olen
nähty tai jonka kanssa olen työskennellyt, ei
ole ollut niin helposti käytettäviä ja hoidollisesti
tarkkoja ominaisuuksia kuin Manuthera 242
-hoitopöydällä"*

Thorbjörn Granqvist, Noventuskliniken, Helsingborg, Ruotsi



Tutustu Manuthera 242 -itseopiskeluportaaliin, josta löytyy lähes 100 ilmaista ammattilaisten tekemää videota Manuthera 242 -pöydän hyödyntämisestä. www.manuthera242.com





Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Capre FX



Lojer Capre FX5
(kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Lojer Capre FX

Lojer Capre FX on hoitopöytien eliittiä, joka muotoilunsa ja ominaisuuksiensa ansiosta täyttää vaativimmankin käyttäjän tarpeet. Pöydän kaksivärinen anatomisesti muotoiltu päällyste tukee asiakasta ja tyylikkään designin ansiosta Lojer Capre FX on myös erinomainen sisustuselementti.

Hiljainen Lojer Capre FX mahtuu pieneenkin tilaan, sillä kaksoispilarien ansiosta pöytä nousee suoraan ylöspäin. Alarungon muotoilu mahdollistaa pöydän käytön myös tuoliasennossa ja monipuoliset säätömahdollisuudet, kuten sivuille kääntyvät käsituet helpottavat työskentelyä. Jalkaosan portaaton flexio-liike ja pöytätason laaja korkeudensäätöalue helpottavat pöydälle ja siitä pois nousemista.


Sähköinen korkeudensäätö 48–88 cm, jota voidaan säätää hands free -korkeudensäätökehikolla mistä tahansa puolelta pöytää. Päätuoli ja jalkaosa säätävät portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Vakiovarusteena ympärilajiin, keskuskittavat pyörät, kaksivärinen anatomisesti muotoiltu verhoilu, valkoiseksi maalattu runko ja musta metallinen peitelevy. Valinnainen leveys 55, 65 tai 75 cm. Maksimikuormitus 250 kg.

Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa.

Mallisto

FX3 3-osainen makuutaso yhdellä verhoiluvärillä

FX5 kuten FX3 ja lisänäi portaattomasti pikasäädettävät käsituet. Pöytä yhdellä tai kahdella verhoiluvärillä.

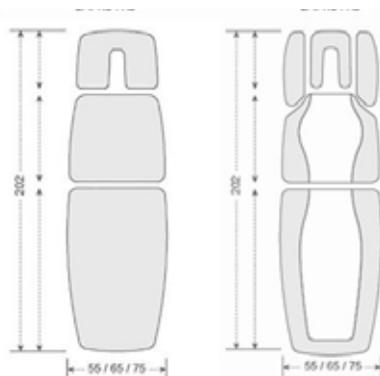

Voit halutessasi vaihtaa pöytään Capre F -pöydän verhoilun



Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Capre F



Lojer Capre F5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Lojer Capre F

Tämä monipuolinen, jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä on ennen kaikkea tarkoitettu kuntoutuksen, manuaalisen terapian ja fysioterapian tarpeisiin. Muunneltavuus, säädettävyys ja hiljainen käyntiääni lisäävät pöydän käyttömukavuutta ja toiminnallisuutta.

Hoitopöytä on tukeva, siinä on laaja korkeudensäätöalue ja säätöjä on helppo käyttää.

Laaja korkeudensäätöalue, helppokäyttöiset kaasujousisäätöiset käsituet ja sivulevikkeet, jalkaosan portaaton ekstensio- ja flexio-liike sekä rungon tukevuus parantavat työergonomiaa ja työn tehokkuutta.


Päätuiki ja jalkaosa säätävät portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Sähköinen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 45–92 cm. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Pöytään valittavissa olevat leveydet 55, 60, 65 tai 75 cm. Maksimikuormitus 210 kg.

Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa. Capre F on saatavissa myös hydraulisena mallina.

Mallisto

F3 (3-osainen makuutaso)

F5 (kuten F3 sekä lisäksi kaasujousella portaattomasti säädettävät käsituet)

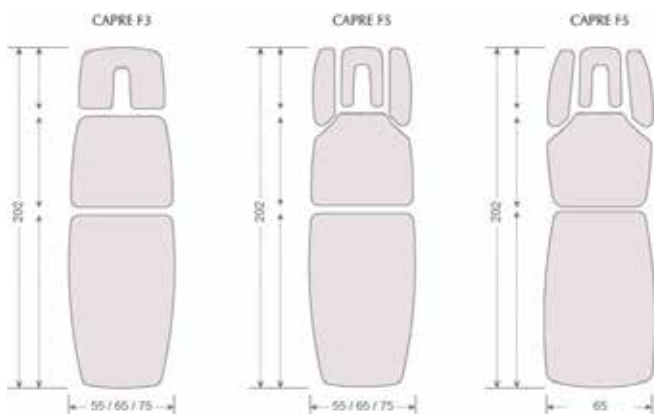

Katso Capre-pöytien ominaisuusvideot
Lojerin Youtube-kanavalta
<http://youtube.com/lojergroup>



Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Capre M




Lojer Capre M4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Lojer Capre M

Tukeva ja helppokäyttöinen Lojer Capre M on muotoilunsa ja väri vaihtoehtojensa ansiosta piristävä uutuus peruspöytätarjontaan. Laadukas, sähkötoiminen Lojer Capre M on suunniteltu erityisesti hieronnan ja perusfysioterapian tarpeisiin ja se edustaa hinta-laatu-suhteeltaan markkinoiden kärkeä. Pöydässä on mukana kaikki perustoiminnot ja yhtenäinen pöytä-taso, joka sopii erinomaisesti varsinkin hierojien tarpeisiin.

Päätuki säätyy portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Mallin korkeudensäätöalue on 45–92 cm. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Pöytään valittavissa olevat leveydet 55, 60, 65 ja 80 cm. Maksimikuormitus 210 kg.

Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa. Capre M on saatavissa myös hydraulisena mallina.

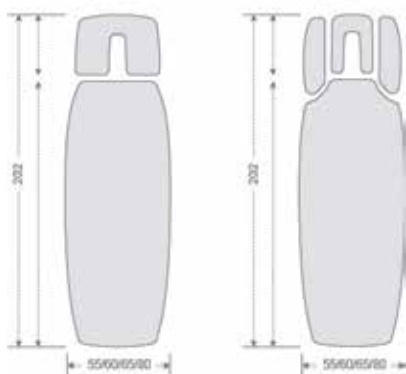

Katso Capre-pöytien ominaisuusvideot
Lojerin Youtube-kanavalta
<http://youtube.com/lojergroup>

Lisävarusteet Capre-hoitopöytiin

CA100 Keskuslukittavat pyörät

Lisävarusteena Capre M, F ja E -malleihin, vakiona Capre FX -mallissa. Tehdasasenteinen lisävaruste, mainittava pöytätilauksen yhteydessä.

CA101 Hands free - korkeudensäätökehikko

Lisävarusteena Capre M ja F -malleihin, vakiona Capre FX -mallissa. Tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön, mainittava pöytätilauksen yhteydessä.

CA102 Sivulevike pari

CA103 Sivulevike pari

Capre M -sivulevikkeet, jotka ovat säädettävissä vaakatasossa kolmeen eri asentoon. Huom! Onnistuu myös jälkiasennuksena.

CA104 Kaksoissaranoitu pääntuki

Kaksoissaranoitu pääosa mahdollistaa potilaan istuma-asennon käsittelyn aikana. Lisävarusteen avulla pääntukea voidaan nostaa horisontaalisesti. Lisävarusteen voi asentaa vain pöytiin, joissa on käsituet.

CA107 Tyhjennysasennon säätö kaasujousella, Capre F ja FX -malleihin

CA108 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti, Capre FX -malliin

CA129 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti, Capre F -malliin

CA110 Paperirullateline, 50 cm leveä

CA111 Paperirullateline, 60 cm leveä

CA116 Akku, saatavilla Capre M, F ja FX -malleihin

CA124 Erikoisleveys 80 cm Capre M -malleihin

CA105 Erikoisleveys 75 cm Capre F -malleihin

CA106 Erikoisleveys 75 cm Capre FX -malleihin

CA171 Hengitysaukon täyttävä tyyny





Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Delta Professional



Delta Professional DP5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Delta Professional

Delta Professional 5

Lojerin tytäryhtiö Rainer Rajala Oy:n alkuperäiset Delta-hoitopöydät. Klassinen hoitopöytä on jo pitkään ollut yksi hierojien, fysioterapeuttien, naprapaattien, kiropraktikkojen ja osteopaattien suosikkipöydistä.

Professional hoitopöydät edustavat alansa huippua, niin toimivuutensa kuin kestävyytensäkin puolesta. Monivuotinen osaamisemme pöytien suunnittelussa takaa pöytien vakauden ja tukevuuden kaikissa työskentelykorkeuksissa ja asennoissa.

Jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä, jossa sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 48-100 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet. Manuaalisesti tai sähköisesti (lisävaruste) säädettävä tyhjennysasento, sekä jalkaosansäätö 75° kulmaan. Pöydän vakioleveys on 55 cm, mutta saatavilla on leveydet 50 ja 60 cm ilman lisäkustannuksia. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Valittavissa useita eri verhoiluväri vaihtoehtoja. Maksimikuormitus 200 kg.

Delta Professional

Delta Professional 4

Delta Professional 4 -hoitopöydässä on neliosainen pöytä-taso, jossa on sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 47-98 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet.



Delta Professional DP4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)



Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Delta Standard



Delta Standard DS5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Delta Standard

Delta Standard 5

Lojerin tytäryhtiö Rainer Rajala Oy:n alkuperäiset Delta-hoitopöydät. Klassinen hoitopöytä on jo pitkään ollut yksi hierojien, fysioterapeuttien, naprapaattien, kiropraktikkojen ja osteopaattien suosikkipöydistä.

Delta Standard -hoitopöydät ovat ammattilaisen peruspöytiä: ne ovat edullisempia kuin Delta Professional -sarjan tuotteet, mutta toiminnot täyttävät vaativankin käyttäjän toiveet.

Delta Standard 5 on jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä, josta löytyy sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 58-89 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet. Manuaalisesti tai sähköisesti (lisävaruste) säädettävä tyhjennysasento sekä jalkaosansäätö 75° kulmaan. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Valittavissa useita eri verhoiluväri vaihtoehtoja. Maksimikuormitus 200 kg.



Delta Standard DS4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Delta Standard

Delta Standard 4

Delta Standard 4 -hoitopöydässä on neliosainen pöytätaso, jossa on sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä

57-87 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet.

Lisävarusteet Delta-hoitopöytiin

21222 Keskuslukittavat pyörät

21223 Sivulevike, pari

Pöydän leventämiseen, alas taittuvat. Tehdasasenteinen lisävaruste.

21199 Hands free -korkeudensäätökehikko

Tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön.

21204 Kaksoissaranoitu pääosa

Istuma-asennossa tapahtuvaan käsittelyyn. Lisävarusteen avulla pääosa voidaan nostaa horisontaalisesti. Lisävarustetta ei voida asentaa pöytiin, joissa ei ole käsitukia.

21190 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti

M02003 Käsikytin

Lisäkytkin pöydän korkeudensäätöön. Kytkin kiinnitetty pääntuen alle.

M02001 Lisäjalkakytkin

21198 Jalkakytkimen runko

Delta Standard pöytään

21200 Jalkakytkimen runko

Delta Professional pöytään

21210 Paperirullateline

21027 Erikoisleveys 70cm, malleihin d2 ja d4 (ilman sivulevvikkeitä)



21222



21223



21199



21204



21210



Safe Working Load SWL huimat 400 kg



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Lojer mattohoitopöydät (Bobath)

4010XB, Bobath battohoitopöytä, sähköinen

Uudistettu Bobath-mattohoitopöytä on suunniteltu ensisijaisesti neurologiseen terapiaan ja Bobath-terapiaan. Patentoitu rakenne tekee pöydästä erittäin tukevan ja sopivan myös vaativaan käyttöön. Bobath-mattohoitopöytä on suunniteltu siten, että terapeutti voi olla pöydällä samanaikaisesti hoidettavan potilaan kanssa — kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on jopa hämmästyttävä 400 kg.

Makuutaso on erittäin korkealuokkaisesti verhoiltu ja tason sivureunat on vahvistettu muovisella reunuksella. Bobathin patentoidun runkorakenteen johdosta potilasnosturit mahtuvat helposti pöydän alle (maavara on 15 cm), vaikka pöytä olisi alakorkeudessa. Erittäin matalan alakorkeuden ansiosta (40 cm) myös pyörätuolia käyttävät potilaat pääsevät pöydälle helposti.

4020XB, Bobath battohoitopöytä, 2-osainen makuutaso, sähköinen

4020XB:ssä on kaksiosainen makuutaso säädettävällä selkäosalla (0-73 astetta). Molemmat mallit voidaan varustaa valinnaisella kasvoaukolla potilasmukavuuden lisäämiseksi.



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Kippilauta

ST7641ER Seers kippilauta

Erittäin vakaa kippilauta, jossa on keskuslukittavat pyörät ja hätälasku vakiona. Seers Medicalin valmistama laatutuote (Englanti), jossa SWL 225 kg.

Sähköinen kallistus 0-90 astetta. Aste näkyy suoraan käsiohjaimessa. Sähköisesti korkeussäädettävä välillä 47-101 cm. Leveys 70 cm. Suuret pyörät ohjauspyörillä ja keskuslukituksella oletuksena. Hätälaskukahva esimerkiksi sähkökatkoksen varalta vakiona. Jaetut jalkalevyt, jotka voidaan säätää erikseen asentoon. Tila potilasnosturille alustan alla. Kahvat ja 3 kiinnityshihnaa ovat vakiona. Vartalon tuki ja pöytä lisävarusteena. Verhoilun vakioväri on vaaleanharmaa, mutta muitakin värejä on tilattavissa.



ST7641ER

Lisävarusteet kippilautaan

ST7648 Pöytä

ST6058 Vartalotuki, pari

ST6065 Kiinnityshihna, polvi

ST6066 Kiinnityshihna, lonkka / rinta



ST7648



ST6058



ST6065, ST6066



HÄTÄLASKUKAHVA

Kannettavat hoitopöydät

21306 Delta matkahoitopöytä

Delta matkahoitopöytä sopii sekä hierontaan, että erilaisiin hoitoihin ja käsittelyihin klinikoilla, työpaikoilla ja liikuntapaikoissa. Hoitopöydässä on vajerisysteemi, joka tekee siitä käyttö-kuntoon asennettuna todella jämäkän. Pöytä on poikkeuksellisen kevyt ja erittäin vaivattomasti kokoontaitettava, mikä tekee siitä helposti käsiteltävän ja kannettavan. Pöydässä on säädettävä kasvo-osa ja etukäsituki, sekä erilliset sivulevikkeet. Verhoilu on sininen ja sen leveys 55 cm. Lisäksi siinä on kantokahva ja pakettiin kuuluu kantokassi (sis. olkahihnan ja kantokahvan sivussa). Paino 12 kg ja korkeudensäätöalue 61–86 cm. Maksimikuorma 200 kg ja tuotteella on MDD-direktiivin mukainen CE-merkintä.



21306

Kasvoaukon pehmusteet

4195 Kasvoaukon pehmuste, ohut

Pehmeä ja miellyttävä pehmuste, joka antaa kasvoille mukavan tuen käsittelyn aikana. Valmistettu eheästä vaahtomuovista ja verhoilu skai-keinoahalla. Koko: 32 x 27 x 3,5 cm (PxLxK).



4FR1 Kasvoaukon pehmuste, paksu

Kuten edellinen, mutta korkeus 7 cm. Sopii pöytiin, joissa ei ole kasvoaukkoa.



41112 Kasvoaukon pehmuste, musta

Miellyttävä kasvojen mukaan muotoutuva ja pehmeä kasvotyyny. Vetoketjulla varustettu lycrapäällinen on irrotettava ja pestävä. Koko 30 x 24 x 4 cm (PxLxK).



41770 Anatominen kasvoaukon pehmuste

Tämä kasvoaukon pehmuste on anatomisesti suunniteltu ja se muotoutuu kasvojen mukaan pehmeän materiaalin ansiosta. Pehmustetta on helppo desinfioida ja pitää puhtaana. Valmistettu vaahtomuovimateriaalista, joka on päällystetty TPU-kalvolla. Väri harmaa, koko 27 x 23 x 6,5 cm (PxLxK).



Hygieniatyyny

50060 Hygieniatyyny, 50x60 cm

50045 Hygieniatyyny, 35x45 cm

Mukava ja kestävä hygieniatyyny päivittäiseen käyttöön! Tyynyssä on pallokuitutäyte, jonka ansiosta tyyny on helppo muotoilla alkuperäiseen muotoon käytön jälkeen. Irrotettava, kestävä ja nesteitä läpäisemätön tyynynpäällinen, jonka saumat ovat vesitiiviit ja vetoketju muovinen. Tyynyn voi pestä koneessa 60 asteessa mutta tyynynpäällisen voi pestä jopa 95 asteessa tai puhdistaa desinfiointiaineilla.



50060

50045

Työtuolit ja jakkarat

CH1100S, Easy Rider satulatuoli, varastotuote

Suosittu satulatuoli nopeaan toimitukseen. Tuolin saumaton verhoilu on uutta tyylikästä ja erittäin kestävä Future-materiaalia, värinä Carbon. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä musta kaasujousen suojuus. Istuimen leveys on 50 cm ja pituus 35 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

CH1100, Easy Rider satulatuoli

Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestävä Future-materiaalilla (14 väriä), ympäristöystävällisellä Nature-materiaalilla (5 väriä) tai valinnaisella mustalla nahkalla. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojuus.

CH1300, Easy Rider PRO satulatuoli

Satulatuoli, jossa on 2-osainen säädettävä istuinosa. Istuinosan leveyttä voidaan säätää välillä 42 cm - 48,5 cm.

CH1400, Step Anatomic työtuoli selkänojalla

CH1500, Pyöreä työtuoli

Tuoleihin on saatavissa useita eri lisävarusteita, korkeuksia ja verhoiluvärejä. Lisätiedot ja tuolien konfigurointi verkko-kaupassa www.shop.lojer.com



CH1100



CH1300



CH1400



CH1100S



CH1500

Voimistelujakkarat

42801 Voimistelujakkara, korkeus 25 cm

42802 Voimistelujakkara, korkeus 48 cm

Runko metallinen epoksimaalattu ja puinen istuinosa. Istuinkoko: 37 x 37 cm.

403001 Porrasjakkara

Tukeva jalkojen harjoittamiseen. 50 x 35 x 15 cm



42801

42802



403001

Lojer Capre BC kauneudenhoitotuoli

BC CAPRE BC – Beauty Chair

Ylellinen Lojer Capre hoitotuoli on suunniteltu yhdessä kauneushoidon ammattilaisten kanssa täyttämään tämän päivän hoitovaatimukset. Mukavan pehmeä ja muotoiltu keinoahka, yksilölliset säädöt kolmella moottorilla ja mukavuusvarustus, kuten tablet pc-teline ja led-valaisin edistävät hoitopaikan laatumielikuvaa. Tuoli soveltuu monitoimituoliaksi kosmetologille, hierojalle, jalkaterapeutille ja tatuojalle.



Lue lisää:

Capre BC: <http://www.lojer.com/fi/tuote/capre-bc-kauneudenhoitotuoli>

Ohjausjärjestelmä mahdollistaa sähköisesti tuolin korkeuden, selkäosan ja istuinkulman säädön. Kasvoaukollisessa pääosassa on sekä pituuden että kulman säätömekanismi. Tuolin jalkaosat ovat kaasujousisäätöiset, ja ne voidaan täysin kääntää sivuille. Jalkaosassa on lisäksi pituuden säätömekanismi. Käsituet voidaan kääntää 180°, ja optiona saatavissa monitoimikäsituissa on myös kulmasäätö.

Capre BC on Lojerin Suomessa valmistama tuoli, johon saat varaosia vuosienkin jälkeen. Esimerkiksi tuolin verhoilut voidaan uusita tulevien trendien mukaisesti. Pituus 186–213 cm. Leveys, istuintyynty 62 cm. Kokonaisleveys 88 cm. Korkeuden säätö 60–85 cm. Maksimikuormitus 160 kg.

Capre BC on edelleen kehitetty terveydenhoitoa varten kahdella mallilla: Capre MC – Medical Chair ja Capre RC – Recovery Chair.



BC



Harjoituslaitteet

Fyysinen harjoittelu on kuntoutuksen ja terveydenhuollon keskeisiä osa-alueita. Terveystieteiden laitetta koskevan lain 629/2010 mukaan kuntoutuksessa tulee käyttää CE-merkittyjä lääkelaitteita. Valikoimamme tarjoaa välineitä lääketieteelliseen kuntoutukseen sekä voimaharjoittelulaitteita, jotka soveltuvat kuntoutukseen, terveydenhuoltoon ja voimaharjoittelun tarpeisiin.



Lääkinnällinen harjoitusterapia

Lääkinnällinen harjoitusterapia, (LHT, Terapeuttinen harjoittelu) on aktiivista kuntoutusta, joka perustuu klinisiin tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin. Harjoitteet toteutetaan yleisinä tai kohdennettuina harjoitteina joko tietylle kehon osalle tai jopa koko kehoon kohdistuvina. Harjoitteet soveltuvat sekä kroonisiin että akuutteihin vaivoihin, harjoitteet ja annostus valitaan aina kulloiseenkin tilanteeseen soveltuviksi. Oikein valittu harjoitusvastus, oikea suoritustekniikka, oikeat liikeradat, oikea alkuasento ja oikeat harjoituslaitteet mahdollistavat terapian tuloksellisuuden. Harjoitteiden tavoitteena voi olla koordinaation, motorisen kontrollin tai lihassapainon palauttaminen / parantaminen, samoin oikein valitut harjoitteet mahdollistavat normaalin lihaskestävyyden ja lihasvoiman harjoittamisen kulloinkin tarvittavin liikeradoin ja -laajuuksin. Kokonaisuutena tavoitteena on päivittäisten toimintojen kehittäminen sellaisiksi, mikä kulloinkin on tarpeen. Lojer vetolaitteet ovat CE-merkittyjä lääkintälaitteita eli MDD-hyväksyttyjä.

Lojer Pulley vetolaitteet

19100-14 Lojer vetolaite, 14 kg, koteloitu

Hiljainen ja tasainen vastus, kromattu säätötanko ja vaimentimet jokaisessa painovälissä. Tukeva rakenne, joka mahdollistaa kiinnittämisen seinään tai vapaasti lattialla seisovaan Lojer Moduliin. Painopakka 14 kg, jaettuna 2 x 0,5 kg ja 13 x 1 kg. 3 x 0,25 kg lisäpainosarja vakiona, mahdollistaa kuorman lisäyksen 0,25 kg:n välein. Yksi vetokahva vakiovarusteena. Korkeus 230 cm.

19100-20 Lojer vetolaite, 20 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 20 kg jaettuna 2 x 0,5 kg ja 19 x 1 kg. Mukana 3 x 0,25 kg lisäpainosarja.

19200-50 Lojer Speed Pulley, 50 kg, koteloitu

Toiminnallinen vetolaite, jolla voidaan hyödyntää liikenopeuden muutoksia aina heittoliikkeeseen asti. Laitteessa vakiona kaksi vetokahvaa, joita voidaan käyttää samanaikaisesti tai vuorovedoin, harjoittelu vain yhdellä vetokahvalla myös mahdollista. Laitteen vetomekanismi "vaintaa" painopakan liikkeen vetonarun liikkeeseen verrattuna. 50 kg painopakka jaettuna 20 x 2,5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on 0,5 kg, painon lisäys 0,5 kg:n välein, max ulostuleva vastus 20 kg. Korkeus 230 cm.

19200-80 Lojer Speed Pulley, 80 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 80 kg, joka jaettu 16 x 5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on 0,83 kg.

19200-100 Lojer Speed Pulley, 100 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 100 kg, joka jaettu 20 x 5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on 1 kg.

19200M Lojer Speed Pulley, 50 kg, liikuteltava

korkeus (190 cm pyörätelineen kanssa). Laite on helposti siirrettävissä haluttuun paikkaan, harjoituksen ajaksi laite lasketaan neljälle tukevalle jalalle. Koteloitu painopakka vakiona.



19100-14

19200-50



19200M



Katso video Speed Pulley -vetolaitteista
www.lojer.com >> Fysioterapia ja Wellness
 >> Vetolaitteet >> Speed Pulley vetolaite

Lojer alasetolaiteet

19300-50 Lojer alasetolaite, 50 kg koteloitu

Painopakka 50 kg jaettuna 10 x 5 kg. Vetonarun pituutta säädellään kromatussa tangossa olevalla säätimellä. Leveä vetokahva vakiovarusteena. Alasetolaitteessa on vakiona myös alatalja soutu- tai nostoharjoitteita varten. Säädettävä kokonaiskorkeus välillä 228–298 cm. Laitteeseen saatavissa lisäpainosarja, jolloin vastusta voidaan säätää 1,25 kg:n tarkkuudella.

19300-80 Lojer alasetolaite, 80 kg koteloitu

Sama kuin yllä, mutta painopakka 80 kg jaettuna 16 x 5 kg.

19300-100 Lojer alasetolaite, 100 kg koteloitu

Sama kuin yllä, mutta painopakka 100 kg jaettuna 20 x 5 kg.



Vetolaitteiden lisävarusteet

- 13107** Triceps kahva
- 15106 / 15106T** Alaseto-orso
- 210050** Harjoituskäsine
- 2512126** Triceps köysi, 90 cm
- 402024** Soutukahva
- VD6800** Alasetokahva
- VH8083** Tukitanko
- VH80831** Tukitanko alaseto-orrella
- Lisäpainosarja** 3 x 0,25 kg



13107



15106



210050



2512126



402024



VD6800



VH8083



Katso ajantasainen lisävarustetarjonta www.lojer.com



Vetolaitteiden hihnat



402020 Pehmustettu nilkka-/ rannehihna 25 x 8 cm

402021 Pehmustettu reisi-/olkapäähihna 55 x 8 cm

402022 Pehmustettu vyötäröhihna 100 x 8 cm

402025 Rotaatiohihna, pehmustettu

402029 Nahkahiha ranne 32 x 5 cm

402030 Nahkahiha nilkka 62 x 5 cm

402031 Nahkahiha 105 x 8 cm

402032 Nahkahiha vyötärö 124 x 8 cm

402033 Nahkahiha, sisäosa pehmustettu 40 x 7,5 cm

402034 Päähihna

402040 Pehmustettu nilkkahiha tarranauhalla



Ivo Trainer

22450 Ivo Trainer

22451 Ivo Trainer liikuteltava kehikko

Ivo Trainer on uudenlainen vastuslaite, jota voidaan käyttää koordinaatio- ja voimaharjoittelussa niin huippu-urheilussa kuin kuntoutuksessakin. Ivo Trainerissa on patentoitu jarrujärjestelmä jossa on säädettävä jatkuva vastus.

Asenna laite seinään tai kiinnitä Ivo Trainer -kehikkoon (lisävaruste), jolloin voit käyttää laitetta helposti eri harjoituspaikoilla, sekä sisä- että ulkotiloissa. Kaapelin pituus on 22 metriä ja harjoittelu on mahdollista 180 asteen liikeradalla. Mukana vyötärönauha.



22450, 22451

Treenipenkki

2FS-20 2-osainen penkki

Erinomainen kaksiosainen penkki harjoitteluhuoneeseen. Istuinosassa on +10 kallistus ja selkäosan voi asettaa 6 eri asentoon, -10 – +80 välillä. Sisältää kuljetuspyörät. Väri: Runko hopean harmaa ja verhoilu musta. Toimitetaan osissa.

TRUE



Fysioterapiapeili

501132 Fysioterapiapeili pyörillä, kaksipuoleinen

Kulmasäädettävä peili kromatulla jalustalla. Peiliä on helppo siirrellä neljän pyörän ansiosta. Siinä on korkealaatuinen peililasi molemmin puolin. Peililasin korkeus on 150 cm ja leveys 54 cm. Tuote toimitetaan osissa.



501132

Puolapuut

27405 Puolapuut, puiset, korkeus 230 cm

Korkealaatuiset puolapuut on valmistettu Suomessa. Tuote toimitetaan osissa (kaikki tarvittavat osat sisältyvät pakkaukseen), ja se on erittäin helppo kasata itse. Puuosat ovat lakattuja. Leveys 80 cm ja käyttäjän maksimipaino 90 kg.

27406 Puolapuut, metalliset, korkeus 220 cm

Korkealaatuiset puolapuut on valmistettu Suomessa. Tuote toimitetaan valmiiksi kasattuna, saatavana eri väri vaihtoehtoina. Leveys 80cm ja käyttäjän maksimipaino 130 kg.



27405



27406

Ergo-Fit Vector Line -harjoituslaitteet

Vector Line on täysin uusi erittäin korkealaatuinen harjoituslaitteiden tuoteperhe. Tuotteet valmistaa Ergo-Fit Saksassa ja niillä on CE-merkintä MDD-direktiivin mukaan. Laitteiden liikkeet ovat pehmeitä, niitä on helppo säätää ja ne sopivat erinomaisesti kaikenlaiseen kuntoutukseen. Ne sopivat erinomaisesti myös muihin kuntoilutiloihin, kuten hotelleihin, työterveyshuoltoon ja kuntosaleille. Kaikissa lääkinällisissä laitteissa on liikerajoitin painopakassa. Painopakka koostuu 7,5 kg painoista ja lisäpainoista 2,5 kg ja 5,0 kg. Lisäpainot saadaan helposti käyttöön painopakán vieressä olevalla säätimellä. Painopakán koteloinnin taakse on asennettu ylellinen LED-valaistus. Jos se syttyy, pitää laitteeseen kytkeä sähkö. Toimitetaan valmiiksi koottuina. Suurin käyttäjän paino 200 kg.

Rungon väri: antrasiitti

Painopakán koteloinnin väri: valkoinen

Verhoilun väri: Valittavissa ilman lisäkustannuksia

23010 Ergo-Fit Back Extension, medical

Painopakka 95kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento. Kokonaispaino: 235 kg. Koko: 100 x 120 x 155 cm (P x L x K).



23010



23020

23020 Ergo-Fit Back Pull, medical

Painopakka 112,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 205 kg. Koko: 120 x 145 x 155 cm (P x L x K).

23030 Ergo-Fit Butterfly Reverse, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 190 kg. Koko: 135 x 155 x 155 cm (P x L x K).



23030



23040

23040 Ergo-Fit Lat Pull, medical

Painopakka 117,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 220 kg. Koko: 130 x 170 x 240 cm (P x L x K).

23050 Ergo-Fit -Shoulder Abduction, medical

Painopakka 90 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 200 kg. Koko: 120 x 115 x 155 cm (P x L x K).



23040



Jos haluat lisää tietoa, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ergo-Fit Vector Line -harjoituslaitteet

23060 Ergo-Fit Shoulder Press, medical

Painopakka 75kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädetty: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 210 kg. Koko: 135 x 135 x 180 cm (P x L x K).



23060

23070 Ergo-Fit Butterfly, medical

Painopakka 95kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädetty: alkuasento. Kokonaispaino: 207 kg. Koko: 120 x 155 x 155 cm (P x L x K).



23070

23080 Ergo-Fit Chest Press, medical

Painopakka 95kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädetty: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 237 kg. Koko: 145 x 155 x 155 cm (P x L x K).



23080

23090 Ergo-Fit Biceps Flexion, medical

Painopakka 60kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädetty: istuinkorkeus ja alkuasento. Kokonaispaino: 170 kg. Koko: 95 x 130 x 155 cm (P x L x K).



23090

23100 Ergo-Fit Triceps Extension, medical

Painopakka 60 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädetty: istuinkorkeus, alkuasento ja selkänöja. Kokonaispaino: 200 kg. Koko: 105 x 110 x 155 cm (P x L x K).



23100

23110 Ergo-Fit Abdominal Flex, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädetty: alkuasento. Kokonaispaino: 227 kg. Koko: 105 x 130 x 155 cm (P x L x K).



23110

23120 Ergo-Fit Abdominal Torsion, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 177 kg. Koko: 135 x 100 x 155 cm (P x L x K).



23120

23130 Ergo-Fit Abductor, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 222 kg. Koko: 140 x 130 x 155 cm (P x L x K).



23130

Ergo-Fit Vector Line -harjoituslaitteet

23140 Ergo-Fit Adductor, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 215 kg. Koko: 175 x 125 x 155 cm (P x L x K).



23140



23150

23150 Ergo-Fit Hip Extension, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 177 kg. Koko: 100 x 125 x 155 cm (P x L x K).

23160 Ergo-Fit Leg Extension, medical

Painopakka 112,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädetty: alkuasento, jalkatyyny ja selkänoja. Kokonaispaino: 265 kg. Koko: 105 x 140 x 155 cm (P x L x K).



23160



23170

23170 Ergo-Fit Leg Flexion, medical

Painopakka 117,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädetty: alkuasento, reisityyny, jalkatyyny ja selkänoja. Kokonaispaino: 255 kg. Koko: 105 x 145 x 155 cm (P x L x K).

23180 Ergo-Fit Squat Press, medical

Painopakka 200 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädetty: selkänoja (130-180 astetta 10 asteen välein), jalan pituus, jalkalevy ja olkatyyny. Kokonaispaino 415 kg. Koko: 240 x 100 x 155 cm (P x L x K).



23180



23190

23190 Ergo-Fit Pull Up / Dip, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 210 kg. Koko: 81 x 120 x 215 cm (P x L x K).

23200 Ergo-Fit Seated Dip, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 210 kg. Säädetty: istuinkorkeus ja selkänoja. Koko: 162 x 117 x 155 cm (P x L x K).



23200



Jos haluat lisää tietoa, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ergo-Fit Power Line 4000

22520 Ergo-Fit Cable 4000, medical

Speed pulley seinään kiinnitettävä. Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 123 kg. Mitat: 86 x 41 x 225 cm (PxLxK).

22521 Ergo-Fit Cable Free 4000, medical

Speed pulley lattiamalli. Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 156 kg. Mitat: 120 x 160 x 225 cm (PxLxK).

22522 Ergo-Fit Cable Crossover 4000

Painopakka 2 x 75 kg jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 250 kg. Mitat: 91 x 338 x 218 cm (PxLxK).

22523 Ergo-Fit Cable Tower 4000

Tätä laitetta voi käyttää useampi kuntoilija yhtäaikaan. Monitoimilaitteessa lat pull-, row-, biceps- ja triceps-harjoitteet. Painopakat 2 x 75 kg ja 2 x 100 kg jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 530 kg. Mitat: 120 x 290 x 220 cm (PxLxK).

22520

22521

22522

22523



Ergo-Fit Power Line 4000

22524 Ergo-Fit Multi Press 4000

Painotanko on tarkoitettu International painoille ja laitteessa on 4 säilytystappia levypainojen säilytykseen. Penkki ja painot tilattava erikseen. Suurin sallittu painojen määrä 250 kg. Laitteen kokonaispaino 150 kg. Mitat: 170 x 210 x 220 cm (PxLxK).

22533 Ergo-Fit Squat Rack 4000

Levypainojen säilytystapit kuuluvat telineeseen, mutta painotanko ja levypainot tilattava erikseen. Suurin sallittu painojen määrä 250 kg. Laitteen kokonaispaino 65 kg. Mitat: 175 x 120 x 175 cm (PxLxK).



Harjoittelupenkit Ergo-Fit Power Line 4000

22525 Ergo-Fit Abdominal Bench 4000

Tässä penkissä harjoitat vatsalihaksiasi tehokkaasti ja muotoiltu selkänoja ylläpitää optimaalisen asennon harjoituksen aikana. Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 60 kg. Mitat: 145 x 60 x 75 cm (PxLxK).

22526 Ergo-Fit Back Bench 4000

Tämä penkki tarjoaa tehokkaan tavan harjoittaa selän ja alavartalon lihaksistoa. Penkissä on 45 ° kulma. Lantiotyynyn korkeus on säädettävissä. Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 50 kg. Koko: 135 x 80 x 75 cm (PxLxK).

22527 Ergo-Fit Flat Bench 4000

Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 25 kg. Mitat: 105 x 60 x 40 cm (PxLxK).

22528 Ergo-Fit Multi Bench 4000

Säädettävä seläntuki. Maksimi kuormitus 250 kg. Kokonaispaino 35 kg. Mitat: 135 x 60 x 100 cm (PxLxK).

22530 Ergo-Fit Olympic Flat Bench 4000

Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja painot: 400 kg. Laitteen kokonaispaino 50 kg. Mitat: 160 x 125 x 125 cm (PxLxK).

22531 Ergo-Fit Olympic Incline Bench 4000

Säädettävä istuintyyny. Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja painot 350 kg. Laitteen kokonaispaino 45 kg. Mitat: 160 x 125 x 135 cm (PxLxK).

22532 Ergo-Fit Scott Bench 4000

Penkissä on ripustuskoukut painotangolle. Istuinkorkeus on säädettävissä. Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja painot 250 kg. Laitteen kokonaispaino 45 kg. Mitat: 85 x 80 x 110 cm (PxLxK).



Fitness Line yhdistelmälaitteet

True on tunnettu erittäin korkealaatuisten harjoituslaitteiden valmistaja. Fitness Line -sarja on hienosti suunniteltu ja se koostuu yhdistelmälaitteista, jotka vievät vähän tilaa ja ovat edullisia. Täydellinen yhdistelmä ergonomiaa, laatua ja taloudellisuutta. Soveltuu erinomaisesti mm. pienemmille klinikoille, henkilökunnan kuntosaleille, hotelleihin ja työterveyshuoltoon.

Kuorman säätö tehdään harjoitusasennosta ja kaikki vivut on merkitty selvästi keltaisella. Ohjeiden kuvaukset englanniksi on saatavana kaikille laitteille. Harmaa / hopealakattu runko ja musta verhoilu. Suurin käyttäjän paino 145 kg. Laitteet toimitetaan kokoamattomina. Ota yhteyttä huoltoomme, jos tarvitset apua kokoonpanossa.

Painopakka 75 kg koostuu 17 kappaleesta 10 paunan painoja, noin 4,5 kg / paino.

Painopakka 155 kg koostuu 17 kappaleesta 15 paunan painoja, noin 6,8 kg / paino.

2FS-50/75 Leg Extension/Seated Leg Curl, 75 kg

2FS-50/115 Leg Extension/Seated Leg Curl, 115 kg

Yhdistelmälaite jalkojen lihasryhmille. Selkänojaossa 5 eri asentoa. Reisiyhteydessä, joka laskeutuu alas polven koukistusharjoituksessa, on 6 eri asentoa. 4 eri aloitusasentoa sekä polven koukistusta ojennusliikkeelle. Itsestään säätävä nilkkatyyny varmistaa oikean asennon koko liikesuorituksen ajan. Mitat: leveys 109 cm, syvyys 160 cm ja korkeus 145 cm.

2FS-51/75 Leg/Calf Press, 75 kg

2FS-51/115 Leg/Calf Press, 115 kg

Yhdistelmälaite jalkojen ja pakaralihasten harjoitteluun. Jalkalauta säätyy 6 eri aloitusasentoon. Ergonomisesti muotoiltu selkänoja varmistaa hyvän ergonomian koko liikelaajuudella. Mitat: leveys 104 cm, syvyys 180 cm ja korkeus 165 cm.



2FS-50



2FS-51



Fitness Line yhdistelmälaitteet

2FS-52



2FS-52/75 Inner/Outer Thigh, 75 kg

Yhdistelmälaite reiden sisä- ja ulkosyrjän voimaharjoitteluun. Käännettävät reisityyny säädetään sen mukaan harjoitetaanko reiden sisä- vai ulkosyrjän lihaksia. Aloitusasennon säätäminen on helppoa hyvin asemoidun säätönupin ansiosta. 15 eri asentoa. Mitat: leveys 145 cm, syvyys 155 cm ja korkeus 165 cm.

2FS-53/75 Lat Pull Down/Seated Row, 75 kg

2FS-53/115 Lat Pull Down/Seated Row, 115 kg

Yhdistelmälaite yläselän ja käsivarsien lihasten harjoitteluun. Reisityyny on säädettävissä 8 eri asentoon. Jalkatuet soutu- liikkeen suorittamista varten. Vetokahvat alas- ja soutu- vetoja varten kuuluvat toimitukseen. Mitat: leveys 122 cm, syvyys 196 cm ja korkeus 213 cm.

2FS-53



2FS-55



2FS-55/75 Pec Fly/Rear Delt, 75 kg

2FS-55/115 Pec Fly/Rear Delt, 115 kg

Yhdistelmälaite rintalihasten ja yläselän lihasten harjoitteluun. Istuimessa korkeudensäätö (6 eri asentoa) ja harjoitustanko säädetään harjoituksen mukaan (7 eri asentoa). Mitat: leveys 142 cm, syvyys 152 cm ja korkeus 185 cm.

2FS-57/75 Low Back/Abdominal, 75 kg

2FS-57/115 Low Back/Abdominal, 115 kg

Yhdistelmälaite vatsa- ja selkälihasten harjoitteluun. Vastuskampi säädetään harjoitteen mukaan (5 eri asentoa). Jalkatuet päällystetty liukueste materiaalilla, mikä tarjoaa mahdollisuuden valita harjoitteluasennon. Mitat: leveys 125 cm, syvyys 112 cm ja korkeus 145 cm.

2FS-57



Liikunta- ja kuntoharjoittelu

Liikunta- ja kuntoharjoittelu ovat erittäin tärkeitä kehon hyvinvoinnin kannalta. Ne parantavat mm. verenkiertoelimistön toimintaa, kasvattavat hapenottokykyä ja rasva-aineenvaihduntaa sekä keskittymiskykyä. Tässä osiossa esittelemme kattavan valikoiman liikkumisen apuvälineistä kuntosalilaitteisiin, jotka soveltuvat klinikoille ja kuntosaleille. Painokevennettyyn kuntoutukseen tarjolla on useita eri malleja AlterG Anti-Gravity -juoksumatosta.



Passiivinen polven hoito

8000045 Artromot K1 Classic, Knee CPM

CPM (Continuous Passiv Motion) on etenkin polvileikkauksen jälkeinen passiivinen hoito. Artromot on laatutuote, joka soveltuu klinikka- ja kotihoitoon. Tuote voidaan säätää eri jalan pituuksille ja sopii potilaille, joiden kokonaispituus on 120-205 cm. Tuotetta ohjataan käsiohjaimella, jossa nopeus ja liike-määrä esiohjelmoidaan. Kannettava. Nopeudensäätö välillä 5-100 %, 5 % askelilla. Liikealue, polvi: Suoristus -10 – Taivutus 120 astetta ja lonkka 0-115 astetta. Mitat: 97x36x23 cm (PxLxK). Paino 11 kg. Max. kuormitus keinussa 25 kg. Max. käyttöpaino 230 kg. Takuu-aika 2 vuotta. CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.

Nojapuut

27413 Nojapuut, 3 m

27414 Nojapuut, 4 m

Tukevat Suomessa valmistetut korkeussäädettävät nojapuut. Kulkuaukon leveyttä voidaan helposti säätää liikuttamalla nojapuita pitkittäissuunnassa vastakkaisiin suuntiin. Nojapuut on valmistettu kokonaan kestävästä teräksestä. Jalkalevyissä viistot reunat sekä laaja tukipinta. Kulkuaukon maksimileveys 60 cm.



Restoraattorit

218015 Oxycycle 1, aktiiviseen ylä- ja alaraajojen harjoitteluun

Hiljainen ja pehmeä, säädettävissä oleva Magneettivastus. Toimitukseen kuuluu jalka- ja käsipedaalit, sekä liukueste-matto. Laitteen näytössä seurattavissa polkumäärää, aikaa, kaloreita sekä poljettua matkaa. Helppo siirrellä. Koko: 50 x 46 x 38 cm (PxLxK). Paino 9 kg.



218015

218030 Oxycycle 3, aktiivinen ja passiivinen harjoituslaite ylä- ja alaraajoille

Laitteessa säädettävä nopeus (passiivinen ohjelma) ja vastuksen määrä (aktiivinen ohjelma). Ajastintoiminto 15 min saakka. LCD-näytössä seurattavissa aika, polkua/minuutissa, polkujen kokonaismäärä ja kalorikulutus. Toimitukseen kuuluu tarra-nauhoilla varustetut jalkapedaalit, käsikahvat sekä liukueste-matto. Mitat: 50 x 46 x 38 cm (PxLxK). Paino 8,5 kg.



218030

SE-1000 Manuped SE-1000

Manuped SE-1000 on polkulaite aktiiviseen harjoitteluun. Sen pehmeä ja tasainen liikerata harjoittaa tehokkaasti sekä ylä- että alaraajoja. Se on erittäin tukeva ja sitä käytetään joko tuolilla tai pyörätuolissa istuttaessa. Vastus voidaan helposti valita 8 vastustasosta ja jalkojen paikalleen asettamista voidaan helpottaa lukitsemalla polkimet vivulla. Polkimet tarranauhoilla ja pohjetuet sisältyvät toimitukseen. Ergonomiset kahvat useilla otevaihtoehdoilla. Digitaalinen näyttö, joka näyttää ajan, nopeuden, matkan, kokonaismatkan ja kalorit. Koko: 100 x 56 x 129 cm (PxLxK). Paino 45 kg



SE-1000

Monark kuntoutus- ja kuntopyörät

Monarkilla on yli 90 vuotinen kokemus kuntopyörien kehittämisestä ja valmistuksesta Ruotsissa. Tämä historia on tuonut osaamista, kokemusta ja tuntemusta laitteeseen ja laatuun. Tänä päivänä Monark on testi- ja harjoituspyörien maailman kärkimerkki. Monarkin kuntoutus-, harjoitus- ja testipyörät ovat nyt CE-merkittyjä sekä lääkintälaittehyväksyttyjä.

2871E Monark 871E

Pieni ja kätevä ylä- ja alaraaja harjoituslaite. Laitetta on helppo käyttää ja siinä on tasainen vastus. Sopii loistavasti lihasten lämmittelyyn ja harjoitteluun, niin kotona kuin vastaanotoilla. Toimitukseen kuuluu pedaalit käsille ja jaloille. Näyttö ilmoittaa kierrosmäärän ja harjoitteluajan minuuteissa, sekä kokonaiskierrosmäärän ja kokonaisharjoitteluajan. Kantokahva mahdollistaa helpon siirtelyn. Koko: 60 x 45 x 53 cm (PxLxK). Paino 25 kg.



2871E



RT2

RT2 Monark RT2

Klassinen tuote, joka soveltuu erinomaisesti lihasten lämmittelyyn ja kuntoutukseen. Erittäin helppo vastuksen muutos kätevällä joystick-kahvalla. Matalarunkoinen ja mukava istuma-asento. Istuinkorkeus ja selkänöjan kaltevuus säädettävissä. Näyttö ilmoittaa ajan, kalorit, nopeuden, etäisyyden, polkunopeuden ja pulssin. Siirtopyörät. Sykevyö saatavilla lisävarusteena. Koko 190 x 68 x 106 cm (PxLxK). Maksimikuorma 250 kg. Paino 87 kg.



2827E

2827E Monark 827E

Tunnettu kuntopyörä, joka kestää isojakin kuormia ja sopii vastaanotoilla ja kuntosaleilla tapahtuvaan harjoitteluun. Pyöreä muotoilu, koteloitu vauhtipyörä ja vahvistettu runko. Näyttö ilmoittaa ajan, pulssin, nopeuden, matkan ja polkujen määrän. Siirtopyörät. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuorma 250 kg. Koko: 112 x 53 x 113 cm (PxLxK). Paino 47 kg.



2927E

2927E Monark 927E

Erinomainen kuntopyörä harjoittelu- ja kuntoutuskäyttöön. Matala runko, satulan ja ohjaustangon pikasäädöt. Yksinkertainen monitori, joka ilmoittaa symbolein nopeuden, matkan, ajan ja pulssin. Ajastin, joka voidaan asettaa mittaamaan aikaa tai matkaa. Vastusasteikko. Siirtopyörät. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuorma 250 kg. Koko: 124 x 64 x 126 cm (PxLxK). Paino 56 kg.

Lisävarusteet Monark-pyöriin

91815B Polar Puls/Sykevyö

Soveltuu henkilökohtaiseen tai monen henkilön sykkeenmittaukseen samalla mittarilla.



91815B

26954 Kuntopolkimet, pari

Ekstra leveä poljin jalkalevyllä, kantapään tuki ja hihnat jalkojen tukevaa kiinnittämistä varten. Sopii kaikkiin Monark-pyöriin.



26954

RM 4993-5 Satula, vakio, sininen

RM 4993-7 Satula, vakio, musta

Sopii Monarkin pyöriin, joissa on soikea tai neliönmuotoinen satulatolppa ja jotka on valmistettu vuoden 2008 jälkeen.



RM 4993-5

29112-66 Satula, leveä, sininen



29112-66

29145-93 Pöytäteline

Sopii Monark 871E- ja 881E-malleihin. Käytön jälkeen voidaan taittaa kokoon ja ripustaa puolapuihin.



29145-93

9145-8 Pöytäteline Monark 881E -mallille

Säädettävä pöytäteline Monark 881E:lle. Voidaan nostaa ja laskea käyttäjän mukaan. Vakaa runko käytännöllisillä kuljetuspyörillä ja laite kiinnitetään suoraan pöytälevylle. Voidaan käyttää pyörätuolissa istuttaessa. Koko: 69 x 75 x 70-95 cm (PxLxK). Paino 25 kg.



9145-8

Fluid – First Degree aerobiset laitteet

Vesi antaa tasaisen ja miellyttävän harjoitusvastuksen, jota voidaan säätää vauhdissa. Samalla virtaavan veden ääni tehostaa aitoa tunnetta veden vastuksesta ja inspiroi harjoittelua. Tuotteet sopivat moniin erilaisiin ympäristöihin.

2E520 Soutulaite Fluid E-520, medical

2101274 Selkänoja

Uniikki soutulaite, vastuksena vesi, joka tarjoaa miellyttävän ja rauhoittavan harjoituksen. Standardia korkeamman istuimen ansiosta laite sopii hyvin myös ikääntyneille. Ergonominen käsikahva. Näyttö ilmoittaa tason, kalorikulutuksen, vedot per minuutti, 500 m ajan, watit, matkan, intervallit ja ajan. 20 vastustasoa. Pulssin vastaanotin, pulssivyö ja selkänoja lisävarusteita. Voidaan varastoida pystyasennossa. Siirtopyörät. Maksimikuorma 250 kg. Koko: 190 x 71 x 68 cm (PxLxK). Paino 75 kg.



2E720 Polkupyörä Cross Trainer Fluid E-720, medical

Uniikki harjoitusväline, joka sopii ylä- ja alavartalon harjoitteluun. Kiertokampien kulmaa voidaan säätää 360 astetta, ominaisuus, joka mahdollistaa alaraajojen polkuharjoittelun istuma-asennossa, sekä ylävartaloharjoittelun seisten tai istuma-asennossa. Täydellinen lämmittely- ja harjoituslaite, jossa vesivastuksen ansiosta rentouttava vedensolina ja pehmeä ja miellyttävä polku. 20 vastustasoa. Näyttö ilmoittaa tason, pulssin, kalorikulutuksen, matkan, nopeuden, ajan, kierrokset per minuutti ja watit. Laitetta voidaan polkea etu- ja takaperin. Yhdistelmä pedaali- ja käsikahvat. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuorma 250 kg. Mitat: 130 x 99 x 113 cm (PxLxK). Paino 115 kg.



2E920 Ylävartalo Ergometri Fluid E-920, medical

Erinomainen valinta ylävartalon harjoitteluun. Vesi on vastuksena pehmeä ja miellyttävä. Harjoittelu voi tapahtua tuolissa tai pyörätuolissa istuen irrotettavan istuimen ansiosta, tai jopa seisten, sillä laitteen korkeus on säädettävissä. 4 istuinkorkeutta ja 20 vastustasoa. Jalkatuki. Näyttö ilmoittaa tason, pulssin, kalorikulutuksen, matkan, nopeuden, ajan, kierrokset per minuutti ja watit. Voidaan polkea sekä etu- että takaperin. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuorma 250 kg. Mitat: 125 x 99 x 113 cm (PxLxK). Paino 130 kg.



Ergo-Fit aerobiset laitteet

Lähes äänettömästi toimivat Ergo-Fit-laitteet ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja pyörrevirtavastuksensa ansiosta. Tästä johtuen harjoittelu on miellyttävää, eikä vastus rasita niveliä ja nivelsiteitä. Yritys valmistaa kaikki laitteensa Saksan tehtaillaan, mikä takaa korkean laadun ja viimeistellyn ulkonäön.

400-mallissa väri valkoinen/musta.

4000-mallissa värit valkoinen/musta tai hopeanharmaa/musta.

250010 Ergo-Cycle 400

Ergo Cycle on erittäin vakaa ja äänetön polkea. Se sopii loistavasti laitostyöhön tai kuntosalille. Yksinkertainen näyttö ja opastus. 4 esiohjelmointia ohjelmaa. Näyttö ilmoittaa etäisyyden, kierrokset, kalorinkulutuksen, tehon, ajan ja pulssin. Sykevyö lisävarusteena. Helppo kulku laitteeseen ja siitä pois. Kuormaa voi vaihdella välillä 15-400 wattia ja nopeuden välillä 20-120 kierr / min. Verkkovirtakäyttöinen. Kuljetuspyörät. Käyttäjän paino enintään 180 kg. Mitat: 120 x 60 x 140 cm (PxLxK). Paino 45 kg.

250010



250011 Ergo-Cycle 4000

250012 Ergo-Cycle 4000, medical

Erittäin tukeva ja turvallinen kuntopyörä, jossa mahdollisuus korkeaan raskuustasoon. Selkeä näyttö, jossa manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa, kalorinkulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Pulssivyö vakiovarusteena. Matala runkoinen. Vastus 15–600 watin välillä ja nopeus 20–120 kierrosta minuutissa. Sähkökäyttöinen. Kuljetuspyörät. Maksimikuorma 180 kg. Mitat: 118 x 54 x 145 cm (PxLxK). Paino 58 kg.

250011



250031 Ergo Recumbent 4000

250032 Ergo Recumbent 4000, medical

Kuntopyörä, jossa selkänoja ja muotoiltu istuin, selän kuormittumisen vähentämiseksi, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa, kalorinkulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Vastus 15–600 watin välillä ja nopeus 20–120 kierrosta minuutissa. Sähkökäyttöinen. Pulssivyö vakiovarusteena. Maksimikuorma 200 kg. Mitat: 160 x 54 x 125 cm (PxLxK). Paino 75 kg.

223280 Säädettyvä pedaali

Pedaalien säteen säädettävyyden mahdollistaa aikaisen harjoitteluvaiheen kuntoutuksessa, esim. tilanteissa joissa potilaalla on liikerajoituksia.



223280



250031

Ergo-Fit aerobiset laitteet

250041 Juoksumatto Ergo Trac Alpin 4000

250042 Juoksumatto Ergo Trac Alpin 4000, medical

Portaaton kallistuksen säätö 0–20 %.

250051 Juoksumatto Ergo Trac Tour 4000

250052 Juoksumatto Ergo Trac Tour 4000, medical

Portaaton kallistuksensäätö -5–15%. Juoksumatto on erittäin laadukas ja valmistettu ammattilaikäyttöön. Soveltuu kuntosali- ja kuntoutusharjoitteluun matalien käsikahvojen ja matalan aloitusnopeuden ansiosta. Portaaton nopeuden säätö 0,2–25 km/h välillä. Juoksutila: pituus 150 cm, leveys 50 cm. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, ajan, nopeuden, kalorikulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Häätäpysäytys ja turvaliina kiinnikkeillä. Pulssivyö vakiovarusteena. Sähkökäyttöinen. Mitat: 210 x 85 x 140 cm (PxLxK). Maksimikuorma 200 kg. Paino 178 kg.



250041

250071 Ergo Mix 4000

250072 Ergo Mix 4000, medical

Puolimakaavan harjoitusasennon ansiosta Ergo Mix minimoi niveliin kohdistuvan kuormituksen ja keventää myös selkänikamien discuksiin kohdistuvaa intervertebraalista painetta. Tällä laitteella voivat tehokkaasti harjoitella niin lonkka- ja polvipotilaat, kuin ylipainoisetkin. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. Nopeus 20–120 askelta minuutissa. Pulssivyö vakiovarusteena. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Mitat: 200 x 70 x 165 cm (PxLxK). Paino 160 kg.



250071

250061 Steperi Ergo Stair 4000

250062 Steperi Ergo Stair 4000, medical

Ergo Stair on ainutlaatuinen harjoituslaite jalka- ja pakara- lihaksille. Laitteen "portaot" liikkuvat toisistaan riippumattomina. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. Nopeus 15–155 askelmaa minuutissa. Pulssivyö kuuluu vakiovarustukseen. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Mitat: 110 x 77 x 181 cm (PxLxK). Paino 110 kg.



250061

250027 Crosstrainer Ergo Cross 4007, medical

Ergo Cross laitteessa harjoittelet yhtäaikaaisesti ylä- ja alaraajoilla, jonka ansiosta koko keho saa tehokasta harjoitusta. Tässä laitteessa alaraajojen liike on elliptinen. Laitteessa voi harjoitella etu- ja takaperin. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. Nopeus 15–200 askelta minuutissa. Pulssivyö vakiovarusteena. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino 150 kg. Mitat 205 x 67 x 170 cm (PxLxK). Paino 160 kg.



250027

AlterG – Anti Gravity -juoksumatto

AlterG FIT

Täysin uudistettu AlterG FIT painovoimakevennetty juoksumatto tarjoaa miellyttävän ja helpon käyttökokemuksen lisäksi markkinoiden edullisimpaan hintaan ilmanpaine-ero (DAP) teknologian. AlterG FIT:n avulla kehonpainoa pystytään keventämään asteittain ja tästä on merkittävää hyötyä kuntoutuksessa sekä kevennetyssä harjoittelussa. Tämä mahdollistaa entistä paremmin tule- ja neuropotilaiden sekä esimerkiksi ikääntyneiden ja urheilijoiden harjoittelua kivuttomalla sekä turvallisella tavalla.

Uudistettu AlterG FIT -malli pähkinäkuoressa:

- AlterG:n helppokäyttöisin ja edullisin painovoimakevennetty juoksumatto takaa kivutonta kuntoutusta ja harjoittelua.
- Käyttää ilmanpainetta miellyttävästi ja tarkasti vähentäen kehonpainoa 100 %:sta jopa 20 %:iin aina 1 %:n välein.
- Ennennäkemättömän matala sisään astumiskorkeus, vain n. 15 cm uudistetun rungon sekä magneetilla toimivan ilmapussin ansiosta.
- Kevyt ja helppo korkeuden säätö eri pituisille käyttäjille.
- Vähentää niveliin ja luustoon kohdistuvia iskuja sekä painovoimaa, kuitenkin vaarantamatta luonnollista biomekaniikkaa.

Ominaisuudet:

- Kehonpainon säätö: 100 %:sta jopa 20 %:iin 1 %:n välein
- Nopeus: 0 – 19,3 km/h
- Aloitusnopeus: 0,16 km/h
- Käyttäjäpaino: 38,5 kg – 181 kg

Saatavilla olevat lisätoiminnot:

- Kulman säätö juoksumattoon
- VMS etukamera
- Peruutustoiminto
- Suurempi nopeus 24 km/h (aloitusnopeus 0.8 km/h)
- Stride Smart kävelyanalyysi
- Reaaliaikainen videokuva



AlterG FIT

AlterG – Anti Gravity -juoksumatto

AlterG VIA

Via painovoimakevennetty juoksumatto tarjoaa fyysiseen kuntoutukseen ja harjoitteluun ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Yhdistämällä patentoidun NASA ilmanpaine-ero (DAP) teknologian, kosketusnäyttöliittymän, reaaliaikaisen analysoinnin ja live videokuvan, Via tarjoaa täysin uudenlaisen kokemuksen kävelyyn, juoksuun ja harjoitteluun.

Näin AlterG Via toimii:

- Painovoimakevennetty juoksumatto takaa kivuttoman fyysisen kuntoutuksen ja harjoittelun
- Hyödyntää ilmanpaine-eroa ja laskee kehonpainoa miellyttävästi ja tarkasti jopa 20%:iin, 1%:n välein.
- Vähentää niveliin ja luustoon kohdistuvia iskuja sekä painovoimaa, kuitenkin vaarantamatta luonnollista biomekaniikkaa.
- Yhdistää analytiikkaa ja live videoseurantaa datapohjaiseen kehityksen seurantaan.

Ominaisuudet:

- Kehonpainon säätö: 100%:sta jopa 20%:iin 1%:n välein
- Stride Smart askelanalyysi
- Live videoseuranta
- AlterG Assistant ohjelma
- Nopeus: n. -0,5 km/h – 19,3 km/h
- Aloitusnopeus: 0,16 km/h
- Kulma: 0% - 15%
- Käyttäjäpaino: 38,5 kg – 181 kg

Saatavilla olevat lisätoiminnot:

- Suurempi nopeus: 24 km/h (aloitusnopeus 0.8km/h)

AlterG Via



AlterG Pro

AlterG Pro painovoimakevennetty juoksumatto on suunniteltu huippu-urheilijoiden käyttöön ja se tarjoaa parhaan harjoittelu – ja kuntoutuskokemuksen. AlterG:n patentoidun NASA ilmanpaine-ero teknologian (DAP) avulla AlterG Pro kykenee vähentämään kehopainoa 100%:sta jopa 20%:iin 1%:n välein. Tämän ansiosta urheilijoiden kuntouttaminen voidaan aloittaa tavallista aikaisemmin, tai harjoittelun tehoa kasvattaa ilman loukkaantumisen riskiä.

Näin AlterG Pro toimii:

- Kaikki kehonpainon keventämisen hyödyt ilman, että luonnollinen biomekaniikka kärsii.
- Huippuluokan Woodway juoksumatto.
- Sisäänrakennettu live videojärjestelmä antaa välittömän visuaalisen palautteen.
- Reaaliaikainen suoritusdata näyttää kuntoutuksen tai harjoittelun etenemisen ja parantaa näin urheilijan motivaatiota.

Ominaisuudet:


- Woodway juoksumatto
- Kehonpainon säätö: 100%:sta jopa 20%:iin 1%:n välein
- Stride Smart askelanalyysi
- Live videoseuranta
- AlterG Assistant ohjelma
- Nopeus: -6 km/h – 25 km/h (lisäominaisuutena 29km/h)
- Aloitusnopeus: 0,16 km/h
- Kulma: 0% - 15 %
- Käyttäjäpaino: 38,5 kg – 181 kg

AlterG Pro



Harjoitusvälineet

Seuraavilta sivuilta löytyy useita erilaisia harjoitusvälineitä vastaanotoille, kuntosaleille ja kotiin. Olemme valinneet vain maailman kärkevalmistajien tuotteita. Laaja valikoima sisältää mm. vastusnauhoja, tasapaino-harjoitteluvälineitä, palloja, painomansetteja, käsipainoja ja painotankoja.

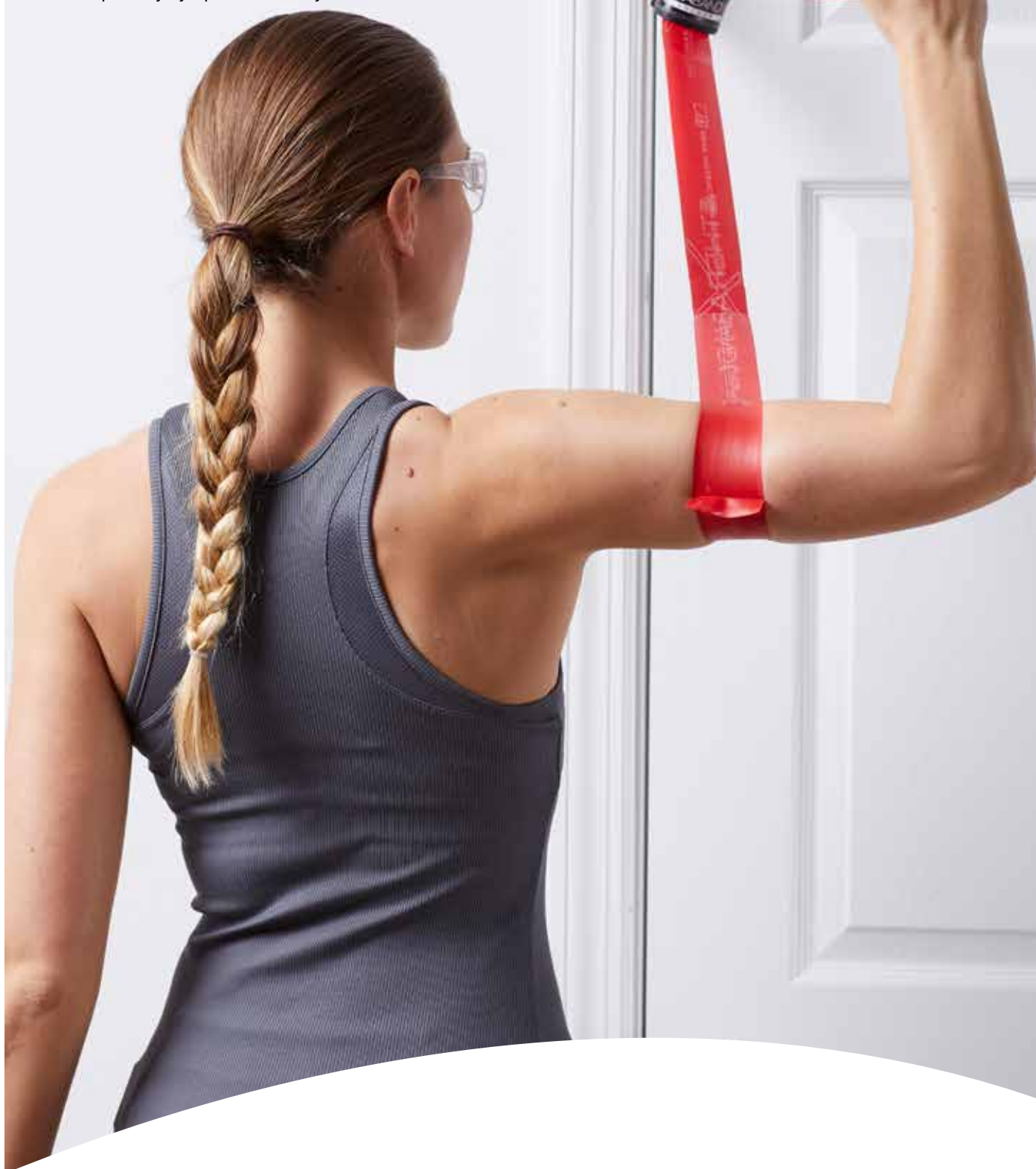

Thera-Band® vastuskuminauha

Thera-Band esiteltiin jo 70-luvulla ja on siitä lähtien ollut tärkeä harjoitteluväline. Sitä voidaan käyttää kaikkeen lihasharjoitteluun riippumatta lihaskunnosta tai diagnoosista. Thera-Bandia valmistetaan 7 erilaista vastusastetta ja väriä. Vastus kasvaa 25 % väreittäin välillä valkoinen - musta ja 40 % välillä musta – hopea. Thera-Band nauhoja on saatavilla usealla eri pakkauskooalla ja nauhan leveys on 13 cm.



TheraBand® 2,5 m

- 27921** Keltainen, kevyt
- 27927** Punainen, medium
- 27928** Vihreä, raskas
- 27929** Sininen, extra raskas
- 27931** Musta, erittäin raskas

2,5 metrin vastusnauha toimitetaan säilytyspussiin pakattuna.



TheraBand® 5,5 m

- 2037** Valkoinen, erittäin kevyt
- 2040** Keltainen, kevyt
- 2041** Punainen, medium
- 2042** Vihreä, raskas
- 2043** Sininen, extra raskas
- 2044** Musta, erittäin raskas
- 2140** Hopea, super raskas



TheraBand® 45,5 m

- 2139** Valkoinen, erittäin kevyt
- 2045** Keltainen, kevyt
- 2046** Punainen, medium
- 2047** Vihreä, raskas
- 2048** Sininen, extra raskas
- 2049** Musta, erittäin raskas
- 2141** Hopea, super raskas

TheraBand® 30 -pack x 1,5 m

Uusi pakkaus, joka sisältää 30 erillispakattua, 1,5 m pitkää harjoitusnauhaa. Uuden pakkauksen ansiosta vastusnauhat pysyvät hygieenisinä ja niitä on helppo välittää eteenpäin.

- 20520** Keltainen, kevyt
- 20530** Punainen, medium
- 20540** Vihreä, raskas
- 20550** Sininen, extra raskas
- 20560** Musta, erittäin raskas



Thera-Band® latexfree vastuskuminauhat, 22 metriä

Lateksittomien vastusnauhojen värikoodit ovat samat kuin lateksia sisältävien vastuskuminauhojen. Kätevä vaihtoehto lateksi-allergikoille sekä terveydenhuollossa, jossa pyritään välttämään turhaa lateksin käyttöä. Tuoksuton ja kalkiton. Leveys 10 cm.

- 50324** Keltainen, kevyt
- 50334** Punainen, medium
- 50344** Vihreä, raskas
- 50354** Sininen, extra raskas
- 50364** Musta, erittäin raskas



Thera-Band® CLX -kuminauhat

Lateksittomat CLX-kuminauhat rakentuvat peräkkäisistä silmukoista, joten erillisiä kahvoja tai solmuja ei tarvita. Se on monipuolinen harjoitusväline terapeuttiseen ja toiminnalliseen harjoitteluun. Nauhasta on mahdollista leikata sopivankokoisia paloja, yhden silmukan koko on noin 20 cm. Myydään kahdessa eri koossa. Eri värit merkitsevät eri vastus- / jäykkyytstasoja.

Thera-Band® CLX 2,1 metriä

- 13219** TheraBand CLX, keltainen, kevyt
- 13220** TheraBand CLX, punainen, medium
- 13221** TheraBand CLX, vihreä, raskas
- 13222** TheraBand CLX, sininen, extra raskas
- 13223** TheraBand CLX, musta, erittäin raskas

Thera-Band® CLX 22 metriä

- 12778** TheraBand CLX, keltainen, kevyt
- 12779** TheraBand CLX, punainen, medium
- 12780** TheraBand CLX, vihreä, raskas
- 12781** TTheraBand CLX, sininen, extra raskas
- 12782** TheraBand CLX, musta, erittäin raskas



11 silmukkaa



Thera-Band® Loops

Loops koostuu yhdestä jatkuvasta silmukasta mikä helpottaa käsien ja alavartalon kuntoutuskoulutusta. Loopsia on saatavana neljänä eri väriä / vastusasteenta. Pituus 30,5 cm (mitta kun hihna on alaspäin) ja leveys 7,5 cm. Setissä on yksi jokaista väriä.

- 20811** TheraBand Loops, keltainen, kevyt
- 20821** TheraBand Loops, punainen, medium
- 20831** TheraBand Loops, vihreä, raskas
- 20841** TheraBand Loops, sininen, extra raskas

20800 TheraBand Loops, setti 4kpl

Togu Loops

Loops koostuu yhdestä jatkuvasta silmukasta mikä helpottaa käsien ja alavartalon kuntoutuskoulutusta. Loopsia on saatavana neljänä eri värinä / vastusasteena. Pituus 30,5 cm (mitta kun hihna on alaspäin) ja leveys 7,5 cm. Setissä on yksi jokaista väriä.

- 650810** Togu Loops, keltainen, kevyt
- 650820** Togu Loops, vihreä, medium
- 650830** Togu Loops, sininen, raskas
- 650840** Togu Loops, musta, extra raskas
- 650800** Togu Loops, setti 4 kpl



Thera-Band® Powerband

TheraBand Powerbandit ovat laadukkaita ja vahvoja silmukakuminauhoja. Ne sopivat kaikenlaiseen harjoitteluun yksin tai ryhmissä, ja toimivat hyvin myös kotitreeneissä. Voidaan käyttää esimerkiksi kuntosalilla apuna eri harjoitteissa tai vastuksena kuntoutuksessa ja venyttelyssä. Vastus määräytyy nauhojen leveyden mukaan, ja pakettiin kuuluu kaksi nauhaa joissa on eri vastukset. Pituus 104 cm.

- 14951** TheraBand Powerband, kevyt + medium
- 14952** TheraBand Powerband, medium + raskas
- 14953** TheraBand Powerband, raskas + extra raskas



14951



14952



14953



Thera-Band® harjoitustuubi

Thera-Band Harjoitustuubi on ominaisuuksiltaan vastus-kuminauhan kaltainen, mutta putkimainen. Samat värikoodit kuin muissakin Thera-Band nauhoissa.



Thera-Band® harjoitustuubi, 7,5 m

- 21010** Valkoinen, erittäin kevyt
- 21020** Keltainen, kevyt
- 21030** Punainen, medium
- 21040** Vihreä, raskas
- 21050** Sininen, extra raskas
- 21060** Musta, erittäin raskas
- 21070** Hopea, super raskas

Thera-Band® harjoitustuubi, 30,5 m

- 2155** Valkoinen, erittäin kevyt
- 2156** Keltainen, kevyt
- 2157** Punainen, medium
- 2158** Vihreä, raskas
- 2159** Sininen, extra raskas
- 2160** Musta, erittäin raskas
- 2161** Hopea, super raskas



Lisävarusteet Thera-Band® vastusnauhoihin ja harjoitustuubeihin

- 2142 Käsikahva, pari
- 2144 Nilkkakahva, pari
- 2177 Ovistoppari



2142



2144



2177

TheraBand® Bodytrainer

- 21231 Keltainen, kevyt
- 21232 Punainen, medium
- 21242 Vihreä, raskas
- 21252 Sininen, extra raskas
- 21262 Musta, erittäin raskas

sisältää 1,4 metrin Thera-Band harjoitustuubin käsikahvoilla.



21231-21262

TheraBand® käsien harjoituspallo

- 26020 Erittäin pehmeä
- 26030 Pehmeä
- 26040 Keskikova
- 26050 Kova

Monipuolinen käden ja sormien harjoitusväline, jota voidaan lämmittää mikrossa muutamia sekunteja tai jäähdyttää pakastimessa 20 minuuttia parhaan harjoitustehon saavuttamiseksi. Materiaali palautuu aina takaisin pyöreään muotoonsa. Pallojen halkaisija 5 cm.



26020-26050

TheraBand® Flexible Exercise Bar

- 26103 Keltainen, erittäin kevyt
- 26100 Punainen, kevyt
- 26101 Vihreä, keskivahva
- 26102 Sininen, vahva



Käytännöllinen tuote tarttumisen ja voiman harjoiteluun, Pendel-liikkeisiin ja mobilisointiin. Tuotetta voidaan käyttää jopa epikondyliittiharjoitteissa – katso video www.youtube.com ja etsi "Tyler Twist". Pakkauksessa mukana harjoitus-esimerkkejä.



THERABAND
ACADEMY

Suositus!



www.thera-bandacademy.com -verkkosivusto, josta löytyy tuloksia lukemattomista tieteellisistä tutkimuksista sekä ja monia tuotekoulutuksia.



22160



2038



5BIOFEED

Olkaveto

22160 TheraBand Shoulder Pulley

Toivottu uutuus hartiaseudun liikkuvuuden harjoitteluun. Olkaveto ylläpitää ja edistää liikkuvuutta. Nauha kiinnitetään yksinkertaisesti oven taakse. Nauha on merkitty väreillä keltaisesta mustaan. Tämän ansiosta harjoituksesta saa välittömän palautteen ja edistymistä on helppo seurata.

2038 Ulla-Bella veto

Ulla-Bella on valmistettu päällystetystä kuminauhasta, jossa mukana tarramansetit. Vetonaru kulkee keskuspyörän kautta, joka mahdollistaa laajat liikelaajuudet liikeharjoittelussa.

PBU - Stabilizer

5BIOFEED PBU, Pressure Biofeedback Unit

Ennen kaikkea apuväline syvien eli "asentolihasien" toiminnan mittaamiseen. Koostuu kovamuovipuhaltimesta, johon pumpataan ilmaa ja paine mitataan manometrillä mm/hg.

Motion Guidance

91700 Motion Guidance Clinical Kit

Motion Guidance on erittäin hyödyllinen tuote, joka antaa laserosoitimen avulla visuaalista palautetta liikkeistä ja liikeradoista. Tuote auttaa varsinkin asiakkaita, joiden on vaikea hahmottaa, miten heidän kehonsa tai raajansa liikkuvat. Motion Guidancen avulla he voivat kehittää kehonhallintaansa ja parantaa liikeratoja. Paketti sisältää paljon erilaisia lisätarvikkeita



91700



6400047

Pilatesrulla

6400047 Togu Pilatesrulla

Erityisesti pilates-harjoitteluun kehitetty kiinteä rulla. Toimitetaan harjoitusohjeiden kera. Koko 15 x 90 cm.

Tasapainolaudat

29000 Tasapainolauta rock

29002 Lisäosa Rock tasapainolautaan

Verraten yksinkertainen tasapainolauta. Lisäosa nostaa laudan vaatavuustasoa. Maksimi kuorma 140 kg. Halkaisija koko 40 cm.

23895 Tasapainolauta käsikahvoilla

Musta tasapainolauta, jossa käsikahvat helpottamaan siirtymisiä tai apuna ylävartaloharjoitteisiin. Tasapainolaudassa on luistamaton pinta. Halkaisija 40 cm ja korkeus 10 cm.

27009 Tasapainolauta Balanza Ballstep

Uudentyyppinen tasapainoväline. Valmistettu puisesta laudasta ja neljästä ilmalla täytetystä muovipallosta, jonka ansiosta tasapainoharjoittelu tällä välineellä on miellyttävän haastavaa. Stabilointi- ja koordinaatioharjoittelun uusi ulottuvuus. Mitat: 89 x 43 x 14 cm (PxLxK). Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.

410407 Togu Challenge Disc 2.0

Togu Challenge Disc 2.0 on mielenkiintoinen ja edullinen tasapainolauta, joka testaa tasapainoa ja tekee harjoittelusta hausempaa. Se sopii käytettäväksi kaikille tasapainotasosta ja iästä riippumatta. Tasapainolaudassa on liiketunnistin, joka mittaa tietoja Bluetooth 4.0:n kautta suoraan tietokoneeseen, tablettiin tai puhelimeen. Lauta on vakaa ja sen pinta on liukumaton materiaalia turvallisen harjoittelun takaamiseksi. Levyn halkaisija on noin 44 cm. Maksimi käyttäjäpaino on 120 kg.



Tasapainotyyny

29005 Togu tasapainotyyny Dynair Senso

Monipuolinen tasapainotyyny, joka soveltuu istuen ja seisten tehtäviin tasapaino- ja koordinaatioharjoituksiin. Tyyny pumpataan halutun vaikeusasteen mukaisesti. Tyynyn toinen puoli on sileä ja toisella puolella on stimulaationystyrät. Tyynyn suojus on tehty velouri-tyyppisestä materiaalista jonka ansiosta istumaharjoitteet on mukavampi tehdä. Pestävä. Halkaisija 33 cm. Paksuus noin 5 cm. Mukana harjoitusohjeet. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.

29009 Togu tasapainotyyny Happy Back XL

Erikoisvalmistettu tasapainotyyny terveelliseen ja dynaamiseen istumiseen. Aktiivinen istuma-asento harjoittaa syviä vatsalihaksia ja tuotteen etu on, että sitä voidaan käyttää niin työssä, kotona kuin vastaanotoillakin. Dyn-Airiin verrattuna, tässä tyynyssä vähemmän stimulaationystyröitä ja materiaali on pehmeämpi. Tämän ansiosta tyyny muotoutuu hyvin kehon muotojen mukaan. Halkaisija 36 cm. Paksuus noin 5 cm. Väri harmaa. Harjoitus-esimerkit sisältyvät toimitukseen. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.

23304 TheraBand tasapainotyyny, sininen, keskivaikea

Ovaali, joustavapintainen tasapainotyyny, valmistettu kumista. Voidaan käyttää erikseen tai päällekkäin pinottuna vaikeuttamaan harjoituksia. Sopii erinomaisesti tasapaino-, stabilointi- ja koordinaatioharjoituksiin. Mukana harjoitusohjeet. Koko: 40 x 24 x 5 cm



29000



23895



27009



410407



29005



29009

happyback™



23304



29004

26201



Tasapainotyyny

29004 Togu tasapainotyyny Aero-Step PRO

Ilmatäytteinen ja tukevilla levyillä toisiinsa kiinnitetty tyyny. Tyynyn pinnassa on yli 1000 muovinystyä, jotka parantavat verenkiertoa. Ohjetaulu ja pumpattu sisältyvät toimitukseen. Koko: 52x40x8,5 cm (PxLxK). Maksimikuormitus 200 kg.

26201 Bosu tasapainotyyny

Tunnettu ilmatäytteinen puolipallo tasapainon, voiman ja koordinaation harjoitteluun. Bosulla voidaan harjoitella kumpi tahansa puoli ylöspäin, jonka ansiosta välineen voi kääntää kesken harjoittelun. Voidaan käyttää istuen, seisten, yksilö- ja ryhmäharjoittelussa. Pumpattu ja harjoitus-esimerkit kuuluvat toimitukseen. Halkaisija 63 cm ja korkeus 24 cm. Maksimi käyttäjäpaino 150 kg.

67322 Airex tasapainotyyny Mini, 41x25 cm

67321 Airex tasapainotyyny Elite, 50x41 cm

67330 Airex tasapainotyyny X-Large, 98x41 cm

X-Large-tasapainotyyny tarjoaa mahdollisuuden normaalia monipuolisempaan harjoitteluun ja näin kuntoilija saa halutessaan myös lisähaastetta treeneihin. Joustavan 6 cm paksun materiaalin ansiosta harjoittelija joutuu jatkuvasti haastamaan oman kehonsa säilyttääkseen tasapainon sekä stabiloidakseen nivelensä.

673143 Airex Balance-Beam

Matala palkki tasapainoharjoitteluun. Valmistettu pehmeästä ja joustavasta materiaalista joka asettaa haasteita tasapainotaidoillesi. Sopii tasapaino-, sensomotorikka ja koordinaatioharjoituksiin. Sininen. Koko: 160 x 23 x 6 cm (PxLxK). Paino 0,9 kg.

67322



67321



67330



673143

Harjoitusmatot

11013 Liukumatto Flowin Pro

Flowin on toiminnallinen harjoitusmuoto, joka on kehitetty Sveitsissä. Harjoitusmuodossa oma keho toimii vastuksena. Harjoittelu on hauskaa ja koko keho kuormittuu armotta. Väline sopii uskomattoman hyvin kuntoutukseen, koska harjoitteiden vaikeustasoa voidaan helposti säädellä. Flowin Pro on kaupalliseen käyttöön tarkoitettu ammattilaismalli. Tuote on vakaa ja helppo säilyttää. Toimitukseen sisältyy viisi pehmustetta (polvi, käsi ja jalat). Mitat: 140 x 100 cm.



11013

27335 Trampoliini Trimilin Swing

Korkealaatuinen trampoliini, valmistettu korkeaelastisesta materiaalista, jonka ansiosta trampoliini on pehmeän kimmoisa. Toimituksessa pomppualusta valmiiksi asennettuna, vain jalat on ruuvattava paikoilleen. Valmistettu Saksassa. Väri: Musta/hopea. Mitat: Halkaisija 120 cm, korkeus 29 cm. Maksimi käyttäjäpaino 100 kg. Tukitanko on säädettävissä välillä 114-144 cm.

27335



Steppilauta

2P-002000 Reebok steppilauta

Alkuperäinen steppilauta jossa 3 korkeusvaihtoehtoa: 15, 20 ja 25 cm. Valmistettu yhdestä palasta, jonka ansiosta lauta kestää hyvin siihen kohdistuvan paineen. Lattiapala ja askellustaso liukumaton materiaalia. Pituus 90 cm, leveys 35 cm. Paino 7,5 kg. Maksimikuorma 120 kg.



2P-002000

Decline Incline Board

27410 Decline Incline Board

Erittäin vankka ja tukeva decline-incline-lauta, joka on valmistettu puusta. Liukuestot laudan pohjalla ja päällä takaavat turvallisen harjoittelun. Kaltevuus 25 astetta. Koko: 47x38x21 cm (PxLxK). Maksimikuormitus 200kg.

27410



Hyppynaru

2101 Hyppynaru

Kahvaton naru, pituus 300 cm.



2101

Kävelysauvat

28000 Kävelysauvat, teleskooppi, pari

Kevyet, 2-osaiset teleskooppi-sauvat ovat pituussäädettävissä portaattomasti 80-140 cm välillä. Ergonomisia kahvahirnoja säädetään tarraauhakiinnityksillä. Metallipiikit irrotettavilla kumisuojuksilla eri alustoille. Paino 0,17 kg/ sauva.

Functional Trainer

8725 Functional Trainer

Functional Trainerissa vastuksena toimii oman kehosi paino. Trainerilla voi tehdä lukuisia tasapaino-, lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita. Functional Trainerilla voi tehdä noin sata erilaista kuntoiluliikettä! Harjoitteluhihnan voi kiinnittää kattokoukkuun (ei sisälly hintaan) tai oveen mukana tulevan oviankkurin avulla. Mukana harjoitusjulistte ja DVD.



Togu jumppapallot ABS

- 64045 Jumppapallo, 45 cm, hopea
- 64055 Jumppapallo, 55 cm, oranssi
- 64065 Jumppapallo, 65 cm, vihreä
- 64075 Jumppapallo, 75 cm, hopea
- 64085 Jumppapallo, 85 cm, sininen
- 64095 Jumppapallo, 95 cm, punainen

Markkinoiden turvallisimmat jumppapallot, jotka on valmistettu korkealuokkaisesta muovimateriaalista sisältäen venttiilin ja niiden ABS-ominaisuus ("Anti Burst System") tyhjentää pallon hitaasti puhjetessaan, ilman räjähdysvaaraa. Yllä ilmoitetut mitat ovat maksimi läpimittoja, jotka voivat vaihdella 5–10% riippuen täyttöpaineesta. 45–75 cm kokoisten pallojen mukana seuraa harjoitusvinkkiopas. Halkaisijaltaan 45–65 cm kokoiset pallot kestävät 1000 kg staattisen kuormituksen ja ne ovat räjähdysturvallisia aina 170 kiloille käyttäjälle asti. Halkaisijaltaan 75 cm pallot ovat räjähdysturvallisia 1000 kg/120 kg ja halkaisijaltaan 85–95 cm pallot 250 kg/45 kg.



Togu jumppapallot My Ball Soft

- 64155 Jumppapallo, 55 cm, antrasiitti-musta
- 64165 Jumppapallo, 65 cm, antrasiitti-musta
- 64175 Jumppapallo, 75 cm, antrasiitti-musta

Pallot on valmistettu korkealuokkaisesta muovimateriaalista, jossa miellyttävä pinta ja venttiili. Yllä ilmoitetut mitat ovat maksimi läpimittoja, jotka voivat vaihdella 5-10 % riippuen täyttöpaineesta. Pallojen mukana seuraa harjoitusvinkkiopas.



Voimistelupallot

67340 Togu voimistelupallo, 16 cm

67342 Togu voimistelupallo, 19 cm

Pallo on valmistettu joustavasta muovista, jolla on hyvä kimmoisuus. Pallossa on täyttöventtiili.



Nystyräpallot

64630 Togu nystyräpallo, 8 cm

64631 Togu nystyräpallo, 23 cm

Nystyräpallo herkkyy- ja oteharjoitteluun.




Pehmeät pallot

67352 Pehmeä pallo, 18 cm, muovipintainen

67353 Pehmeä pallo, 7 cm, muovipintainen

Muovipintainen vaahtomuovipallo. Helposti tartuttava ja kuivattava pinta.

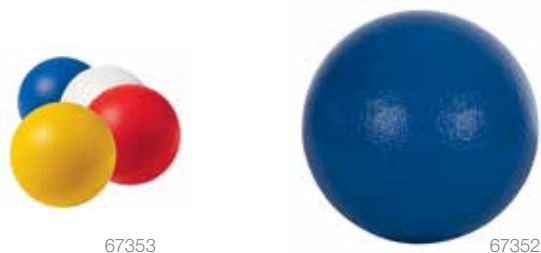

Redondo pallo

6491000 Togu Redo pallo, 22 cm, sininen

Pehmeä tukevapintainen helposti tartuttava pallo, joka soveltuu pilates-, yoga-, kuntoutus- ja terapiaharjoitteluun. Pallo toimittaan litteänä ja se täytetään mukana toimitettavalla "pillillä". Ohjekirja sisältyy toimitukseen.



Medicin pallot

67370 Togu Medicinboll 1 kg, punainen

67373 Togu Medicinboll 3 kg, sininen

67375 Togu Medicinboll 5 kg, sininen

Korkealaatuinen Togun kuntopallo soveltuu erinomaisesti sekä ryhmäliikuntaan että kotiharjoitteluun. Pallo on erittäin kestävä, lateksivapaa ja siinä on luistamaton pinta joka takaa hyvän pidon.



Pallopumput

67344 Pumppu voimistelupalloille

67346 Pumppu jumppapalloille



67344



67346

Jumppapallojen säilytys

67360 Pallokori pyörillä

Pyörille asennettu, muovipinnoitetusta teräsverkosta ja kromatusta putkesta rakennettu pallokori. Mitat: 58 x 48 x 65 cm (PxLxK).



67360

604003 Säilytysrengas jumppapalloille

Aktiiviseen istumiseen ja säilytykseen.

604003



6930500 Palloteline jumppapalloille, 3 kpl

Yksinkertainen ja tilaa säästävä säilytysratkaisu jumppapalloille. 3 kpl/pakkaus.



6930500

3902 Palloteline, seinämalli

Seinään kiinnitettävä palloteline 45–85 cm halk. bobathpalloille. Telineen halkaisija 30 cm. Mitat: 58 x 12 cm.



3902

17170 Säilytyshylly seinälle, kahdella tangolla

Seinähyllä, jossa 2 tangon välissä säilytyspaikka bobathpalloille. Paikka 3-4 palloille. Mitat: 50 x 175 cm.



17170

Painomansetit – Medema

Erittäin laadukas painomansetti, joka on valmistettu Ruotsissa. Sisään käännetty saumat ehkäisevät sisusta vuotamasta. Painomansetin pituus kasvaa hieman painoluokan noustessa. Manseteissa tarranauhat. Kosteantilan painomansettien painokuulat ovat kestävä, kiinnisaumatun muovitaskun sisällä, eivätkä ne pääse kontaktiin veden kanssa.

Kuivatila



2250 Painomansetti, 0,25 kg

2251 Painomansetti, 0,50 kg

2253 Painomansetti, 1,00 kg

2254 Painomansetti, 1,50 kg


2255 Painomansetti, 2,00 kg

2257 Painomansetti, 3,00 kg

2259 Painomansetti, 4,00 kg

2261 Painomansetti, 5,00 kg

Kosteatila

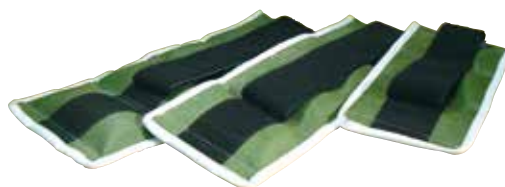

2051 Painomansetti, 0,50 kg

2053 Painomansetti, 1,00 kg

2054 Painomansetti, 1,50 kg

2055 Painomansetti, 2,00 kg

2057 Painomansetti, 3,00 kg

Kahvakuula Ergo

Ergo-kahvakuulan muotoilu vähentää käteen kohdistuvien iskujen painetta ja helpottaa kuulan käsittelyä. Mukavan harjoittelun täydentää neopreenipäällyste, joka pehmentää käteen kohdistuvia iskuja eikä kolhi lattiaa. Kahvakuulaharjoittelun teho perustuu liikkeiden toiminnallisuuteen, jolloin useampi lihasryhmä toimii samanaikaisesti. Kahvakuulalla voit tehdä kymmeniä erilaisia harjoitusliikkeitä, mutta jo muutamalla perusliikkeellä voit harjoittaa tehokkaasti kaikkia kehon päälihasryhmiä. Kahvakuulilla voit tehdä erilaisia nostoja, heilautuksia ja tasapainoliikkeitä. Mukana harjoitus-DVD, joka sisältää 25 eri liikettä.



- 2401** Kahvakuula, kumitettu, 4kg
- 2402** Kahvakuula, kumitettu, 6 kg
- 2403** Kahvakuula, kumitettu, 8 kg
- 2404** Kahvakuula, kumitettu, 10 kg
- 2405** Kahvakuula, kumitettu, 12 kg
- 2407** Kahvakuula, kumitettu, 16 kg

2409 Teline kahvakuulille

3-tasoinen teline kahvakuulille. Telineeseen sopii 5 kpl kahvakuulia. Mitat: 39 x 48 x 66 cm (PxLxK).



2409

Kromatut käsipainot



Kromatut käsipainot, karhennettu otekahva. Painomerkintä painossa.

- 2089** Kromattu käsipaino, 0,5 kg
- 2090** Kromattu käsipaino, 1,0 kg
- 2091** Kromattu käsipaino, 2,0 kg
- 2092** Kromattu käsipaino, 3,0 kg
- 2093** Kromattu käsipaino, 4,0 kg
- 2094** Kromattu käsipaino, 5,0 kg
- 2095** Kromattu käsipaino, 6,0 kg
- 2096** Kromattu käsipaino, 7,0 kg
- 2097A** Kromattu käsipaino, 8,0 kg
- 2097B** Kromattu käsipaino, 9,0 kg
- 2097** Kromattu käsipaino, 10,0 kg

2098 Kromatut käsipainot, 10 kpl setti

Setissä 10 paria kromattuja käsipainoja kilon välein 1 – 10kg.

Vinyylipintaiset käsipainot



Käsipainoissa kiiltävä vinyylipinta, jota helpottaa puhtaanapitoa ja on turvallinen käyttöä.

- 514152** Vinyylipintainen käsipaino, 1,0 kg, punainen
- 514153** Vinyylipintainen käsipaino, 2,0 kg, musta
- 514154** Vinyylipintainen käsipaino, 3,0 kg, punainen
- 514155** Vinyylipintainen käsipaino, 4,0 kg, musta
- 514156** Vinyylipintainen käsipaino, 5,0 kg, punainen

Käsipainojen säilytys

2099 Käsipainoteline, musta, kromatuille käsipainoille

Lattiateline 10 kromatulle käsipainoparille.
Mitat: 22 x 49 x 120 cm (LxPxK).



2099

2088 Käsipainoteline puinen

Seinään kiinnitettävä teline kuudelle käsipainolle.
Leveys 9 cm, syvyys 11 cm ja pituus 90 cm.



2088

Pump-set

8405 Pump-setti

Erinomainen tuote kuntosaleille, ryhmille, kuntoutukseen tai kotikäyttöön. Pump-settiin kuuluu: 1 painotanko pehmeällä kumisella päällisellä (paino n. 2 kg, pituus 140 cm, max kuorma tangolle 37,5 kg), kumitettut painot 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg ja 2 x 5 kg ja 2 kpl pikalukkoja.



8405

8404 Pump-paino, 10 kg

8406 Pikalukko, pari



8406

Levytanko ja -painot



8411

8411 Painotankosetti, 50 kg

Täydellinen painotankosetti, joka koostuu: vinyyli levypainot 2 x 10 kg, 2 x 5 kg, 4 x 2,5 kg ja 2 x 1,25 kg, painotanko ja lukot. Levypainojen reikien halkaisija 30 mm. Levytanko painaa 7,5 kg ja on 165 cm pitkä. Kokonaispaino on 50 kg.

Storz paineaaltolaitteet

Paineaaltohoito on vakiinnuttanut paikkansa jo useiden ammattilaisten käytössä. Uusi tutkimusnäyttö sekä positiiviset kokemukset ovat kasvattaneet luottamusta hoitomuotoa kohtaan eri ammattikuntien piirissä. Samalla kun positiiviset kokemukset shockwavekäyttäjien keskuudessa kasvavat, lisääntyy myös laadukkaiden tieteellisten julkaisujen määrä aiheesta.

Käsittely on arvokas lisä monille lääkäreille ja terapeuteille, jotka toimivat etenkin kipu- sekä erilaisten toiminnanvaja-asiakkaiden parissa. Paineaalto-/shockwavehoitoa voidaan käyttää tehokkaasti muuten haastavissa lihas-, fascia- ja jänneongelmissa.

Lojer Oy edustaa Storz Medical -paineaaltolaitteita. Storz Medical on tunnettu teknologian korkeasta laadusta, innovatiivisista ratkaisuista sekä panostuksistaan jatkuvaan tuotekehitykseen.



Ota meihin epäroimättä yhteyttä, niin kerromme aihealueesta lisää.

Radiaaliset shockwavelaitteet

497224 Storz Masterpuls MP100 Ultra

Radiaalinen (RSWT) paineaalto on käytetyin muoto shockwavehoidolle. Laitteen sisään rakennettu kompressori tuottaa energian, jolla käsiosan sisällä putkessa liikkuva ”luoti” tuottaa voiman paineaallon muodostamiseen. Masterpuls Ultra sarjan laitteet tuovat markkinoille täysin uudenlaisen teknologian paineaaltolaitteissa. Laitteet ovat erittäin suorituskykyisiä tekniikaltaan ja hyvännäköisiä ulkonäöltään. Laitteet valmistetaan Sveitsissä. Painea ja frekvenssiä säädetään suoraan käsiosan näppäimistä, mikä tekee käytön helpommaksi, ergonomiseksi sekä nopeammaksi. Käsiohjaimen näyttö näyttää paineen ja frekvenssin lisäksi tavoiteiskumäärän sekä jo hoidossa annettujen iskujen määrän. Paine: 0,3–5 bar (12 Hz / 5,0 Bar, 16 Hz / 4,5 Bar, 21 Hz / 4 Bar). Taajuus: 0–21 Hz

498201 Storz Masterpuls MP100 Ultra VET

Tämä laite on tarkoitettu eläinten hoitamiseen.



497224 (kuvan tuotteessa lisävarusteita)

497226 Storz Masterpuls One

Storzin uusi radiaalinen paineaaltohoitolaite Masterpuls One on kehitetty keskittyen käyttäjäystävällisyyteen, liikuteltavuuteen, muotoiluun sekä houkuttelevaan hintaan. Masterpuls One on täydellinen aloitusmalli, sillä sitä on helppo käyttää, ja se sopii yleisimpien oireiden hoitoon. Masterpuls One on hyvä valinta myös toiseksi tai kolmanneksi laitteeksi vastaanotolle, tai silloin kun laitetta on tarkoitus liikutella paljon paikasta toiseen. Laitteen voi helposti ottaa mukaan esimerkiksi toiselle klinikalle tai vaikkapa urheilujoukkueen luo kompaktin koon ja kantokahvan ansiosta. 6 käsittelytilaa / tehoaluetta: taajuus 6-18 Hz, paine max. 2,7 bar. Sisältää kaksi applikaattoria: R15 Standard ja D20-S Standard Oscillator, Ylimääräinen vaihtosarja sisältyy hintaan.



Lisävarusteet

MP100

497730 Kosketusnäyttö

Täydennä Masterpuls Ultra 10 tuuman kosketusnäytöllä ja siihen kuuluvalla telineellä. Erittäin kattava anatominen kirjasto selvillä kuvilla, jotka voidaan nähdä eri kulmista

497712 Vaunu Masterpuls Ultra**497731 Storz Standard-applikaattorisarja, 9 kpl****498120 Storz Faskia-applikaattorisarja, 4 kpl****498121 Storz Spine-applikaattorisarja, 3kpl****497788 Kantolaukku, kova, Masterpuls Ultra****497772 Kantolaukku, pehmeä, Masterpuls Ultra****494427 V-Actor värinähoito-osa**

MP One

497711 Vaunu MP One

Tukeva vaunu, jossa on kaksi hyllyä. Suuret lukittavat pyörät helpottavat vaunun siirtämistä paikasta toiseen. Toimitetaan kokoamattomana.

497710 Kuljetuslaukku, pehmeä MP One

Pehmeä kantolaukku, joka sisältää sivutaskun tarvikkeille. Laukussa on sekä kahva että olkahihna.

494449 D20-S Standard Oscillator**494899 D20-T Gold Oscillator****494585 R15 Standard Applicator****495695 C15 Ceramic Energy****494425 DI15 Gold Depth**

Fokusoidut shockwavelaitteet

497732 Storz Duolith SD1 T-Top Ultra

Storz Duolith SD1 T-Top Ultra fokusoidulla paineaaltolaitteella saadaan tarkasti määriteltyä hoitokohde sekä haluttu energiamäärä kudokseen. Käsiosan etuosaan vaihdetaan geelityyny aina halutun hoidon kohteen ja energiamäärän mukaan. Geelityynyillä määritellään myös hoitokohteen syvyys / piste kuinka syvälle hoito halutaan kohdistaa. Sekä energian määrää että taajuutta säädetään käsiosan näppäimistä. Tämä tekee käsiosan käytöstä hyvin yksikertaista, helppoa ja nopeaa. Käsiosan näyttö näyttää tuotetun energian ja käytettävän taajuuden lisäksi iskujen määrän.



17645 Storz Duolith SD1 T-Top Ultra VET

Tämä laite on tarkoitettu eläinten hoitamiseen.



497730

497730 Kosketusnäyttö

Täydennä Duolith SD1 T-Top Ultra 10 tuuman kosketusnäytöllä ja siihen kuuluvalla telineellä.



499000 Storz Magnetolith

Magnetolith on erittäin mielenkiintoinen uutuus Storz Medicalilta. Extracorporeal Magnetotransduction Therapy (EMTT) on yksi tulevaisuuden hoitomuoto, johon Storz on valmistanut Magnetolith-laitteen uusimmalla teknologialla ja palkitulla muotoilulla.

Magneettiterapia avaa uusia mahdollisuuksia kehon uusiutumiseen ja kuntoutukseen ennen kaikkea kroonisissa vaivoissa. Hyviä tuloksia on saatu mm. nivelten, jänteiden ja lihasten hoidossa. Laitetta on erittäin helppo käyttää ja hoito voidaan antaa ilman potilaan riisuuntumista. Korkeataajuinen magneettikenttä 100-300 kHz. . Integroitu LCD-näyttö, josta näkee on tason, taajuuden ja pulssien lukumäärän asetukset. Laittepyötä, vetokahva ja 4 lukittavaa pyörää sisältyy kuten myös säädettävä jalusta käsiosan ripustamiseen sisältyy. Käsiosaa voi käyttää myös manuaalisesti dynaamista hoitoa varten.



ITO Sähkö- ja ultraäänilaitteet

Japanilainen valmistaja ITO perustettiin ja 1916 ja on pitkän kokemuksensa aikana tuonut laitteensa esiin maailmanlaajuisesti. ITO:n logo on ollut varma merkki tuotteen korkeasta laadusta kaikissa yksityiskohdissa. ITO:n uusi laitemallisarja kuuluu huippuluokkaan ja se on voittanut kansainvälisiä suunnittelupalkintoja. Kaikki laitteet ovat CE-merkittyjä lääkintälaitedirektiivin mukaan.



5EU-921, 5SU-520



5ES-5200, 5SU-520

Sähkö- ja yhdistelmälaitteet

5EU-921 ITO Yhdistelmälaite EU-921

Japanilaisen ITO:n valmistama huippuluokkainen yhdistelmälaite, joka sisältää kaikki sähkö- ja ultraäänilaitteen tarvittavat hoitomuodot. Selkeä ja iso LCD-värinäyttö yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjelmointia. Ihmiskehon muotoisesta kaaviosta voi helposti valita hoidettavan alueen. Laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi 47 erilaista hoitoaluetta, ja 30 erilaista hoitomuotoa, joten oikeat asetukset on helppo valita. Ultraäänianturi, kaapelit ja elektrodit sisältyvät hintaan. Voidaan yhdistää alipaineyskikköön SU-52.

5ES-5200 ITO Sähköhoitolaite ES-5200

Laadukas sähkölaite japanilaiselta ITO:lta. Laitteessa on kaikki tarvittavat sähköhoitomuodot! Selkeä ja iso värillinen LCD-kosketusnäyttö yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjelmointia. Ihmiskehon muotoisesta kaaviosta voit helposti valita hoidettavan alueen. Laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi 28 erilaista hoitoaluetta, ja 20 erilaista hoitomuotoa, joten oikea sähkövirta on helppo valita. Laitteeseen on mahdollista tallentaa 120 erilaista hoito-ohjelmaa ja tallentaa yksilöllisiä ohjelmia. Mukana kaapelit ja elektrodit.

Laitepöydät



340101

340101 Teräksinen laitepöytä, laatikolla

Kaksi teräksistä hyllylevyä. Tässä mallissa ylimmän hyllyn alla on kaksi muovista vetolaatikkoo, joiden koko 34 x 37 cm. Neljä pyörää. Korkeus 80 cm, leveys 60 cm ja syvyys 40.

Terapeuttinen ultraääni

5US-101L ITO Ultraääni US-101L, 1 MHz

5US-101L-1 Kannettava paketti

5US-101L-2 Pöytäteline

Markkinoiden pienin ultraäänilaitte, joka on helppo ottaa mukaan. Kannettava laite painaa vain 200 grammaa ja on vain 14 cm pitkä. Helppo käyttää viittä esiohjelmoitua ohjelmaa. Pulsuoitu tai jatkuva teho automaattisella kosketuksen ohjauksella. 1 MHz. Vedenpitävä ja matalalla BNR-arvolla. Vaatii virtalähteen. Kannettava paketti sisältää akun, akkulaturin, paristotelineen, kantolaukun ja kaapelin. Koko: 14x6x6 cm (PxLxK).



5US-101L

5US-751 ITO US-751 Terapeuttinen uä-laite

5PR-751S ultraäänianturi, pieni

Japanilaisen ITO:n huippulaadukas ultraäänilaitte, jossa kaksi vaihtoehtoista käsittelytaajuutta (1MHz tai 3MHz samalla anturilla). Värillinen kosketusnäyttö helppokäyttöisellä valikolla. Valittavana 8 eri kieltä. 42 erilaista hoito-ohjelmaa ohjelmoitu valmiiksi, joista on helppo valita sopiva ihmiskehon mallisesta valikosta. 6 erilaista pulsoitua vaihtoehtoa tai jatkuva teho. Automaattinen kontaktitoiminto. Ergonomisesti suunniteltu kahvan pää, jonka BNR-arvo on hyvin alhainen: 2,4-3,0. Hoitoa voidaan antaa myös vedessä. Pieni ultraäänianturi pienille alueille. Molempia antureita voidaan tarvittaessa käyttää samanaikaisesti.



5US-751, 5PR-751S

Ultraäänigeelit

5022 Ultraäänigeeli, kanisteri 5,7 kg, vaaleansininen

5025 Ultraäänigeeli, kanisteri 5,7 kg, väritön

50232 Annostelija kanisteriin 5022

5021 Pumppu kanisterille

5291 Ultraäänigeeli, pullo 260 ml, vaaleansininen

5002 Ultraäänigeeli 12 pulloa x 260 ml, vaaleansininen

Ultrageeliä voidaan käyttää markkinoiden kaikissa ultraäänilaitteissa ja elektrodeissa. Korkealuokkaista geeliä ilman ilmapuolia. Valitse joko väritön ja vaaleansiniseksi värjätty. Pumppu tai annostelulaite kanisteria varten ei sisälly toimitukseen.



5022



5025



5021

449-1 Ultraäänigeeli Bluescan, 1 litra, vaaleansininen geeli

449-12 Ultraäänigeeli Bluescan, 12x1litra

Tätä ultraäänigeeliä voidaan käyttää sekä iskuaalto-, ultraääni- ja elektrodihoiossa. Sen viskositeetti on erittäin korkea, minkä vuoksi se ei valu, roisku tai tipu.



5291



449-1

Tens/Tems-laitteet



27004 Tens/Tems-laite Promed EMT-6

Promed EMT-6 Tens/Tems on edullinen sekä helpokäyttöinen kaksikanavainen yhdistelmälaite. Siinä yhdistyvät kivunhoito sekä lihasstimulaatio samassa laitteessa. Promed EMT-6 Tens/Tems -laitteessa on 11 esiasetettua ohjelmaa, sekä 4 käyttäjäohjelmaa joihin voi itse valita asetukset. Promed EMT-6 Tens/Tems laitteessa on muisti- ja lukitustoiminnot. Laite toimitetaan kantolaukussa, joka sisältää kaapelit, itsekiinnittyvät elektrodit sekä patterin.

Itsekiinnittyvät elektrodit



879100 Elektrodi, pyöreä, 3,2 cm, 4 kpl/pkt

879200 Elektrodi, pyöreä, 5 cm, 4 kpl/pkt

879300 Elektrodi, pyöreä, 7 cm, 4 kpl/pkt

895220 Elektrodi, 5 x 5 cm, 4 kpl/pkt

895240 Elektrodi, 5 x 9 cm, 4 kpl/pkt

Erittäin korkealaatuiset itsekiinnittyvät elektrodit. Elektrodeilla on erittäin hyvä tarttuvuus ja niitä voidaan käyttää useissa hoitokerroissa, jos säilytetään asianmukaisesti. Sopii kaikkiin erilaisiin 2 mm liittimellä. Lateksiton. 4 kpl / pakkaus.

Elektrodit kumiset



579966 Elektrodi, 4 x 6 cm

579967 Elektrodi, 6 x 8 cm

579968 Elektrodi, 8 x 12 cm

579969 Wettex-suojus, elektrodille 4 x 6 cm

579970 Wettex-suojus, elektrodille 6 x 8 cm

579971 Wettex-suojus, elektrodille 8 x 12 cm

Silikonipohjaiset hiilikumielektrodit, jotka sopivat kaikkiin kaapeleihin 2mm liittimillä.

Akupunktio

Hegu on Skandinavian johtava akupunktioneulojen toimittaja, joka on perustamisestaan vuodesta 1993 alkaen tuottanut steriilejä neuloja omalla tavaramerkillä. Neulat valmistetaan Kiinassa ja Japanissa, ja ne ovat CE-merkittyjä terveydenhuollon tarvikkeita. Olemme mukana neulan suunnittelusta aina käyttäjälle asti, joten asiakkaamme tietävät mitä saavat – laatua ja turvallisuutta. Me tarjoamme myös muiden huolella valittujen toimittajien akupunktio-neuloja.

HEGU

Nordic
Acupuncture



HEGU Classic -akupunktioneulat

HEGU Classic -akupunktioneula on valmistettu korkealaatuisesta japanilaisesta kirurgisesta ruostumattomasta teräksestä. Neula on valmistettu perinteisellä kiinalaisella tavalla, jossa kädensija tekee silmukan. HEGU Classic -neuloissa kädensija on tämän tyyppisiä tavallisia akupunktioneuloja paksumpi, mikä helpottaa käsittelyä. Tämä tekee HEGU Classicista erityisen sopivan perinteiseen kiinalaiseen akupunktiohoitoon. Kädensija on hopeoitu, jolla saadaan aikaiseksi korkea sähkönjohtavuus, ja estetään hapettuminen. Steriloitu etyleenioksidikaasulla, 3 vuoden steriliteetti.

1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia

1-pack / yksittäispakattu neula ohjausputken kanssa. 100 neulaa/rasia

5-pack / 5 neulaa samassa paketissa ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia (100kpl x 5-pack)



STD07020 Classic 0,20 x 7 mm
STD13020 Classic 0,20 x 13 mm
STD15020 Classic 0,20 x 15 mm
STD15025 Classic 0,25 x 15 mm
STD25025 Classic 0,25 x 25 mm
STD25030 Classic 0,30 x 25 mm
STD30025 Classic 0,25 x 30 mm
STD30030 Classic 0,30 x 30 mm
STD30032 Classic 0,32 x 30 mm
STD40025 Classic 0,25 x 40 mm
STD40030 Classic 0,30 x 40 mm
STD50030 Classic 0,30 x 50 mm
STD50040 Classic 0,40 x 50 mm
STD75030 Classic 0,30 x 75 mm
STD75040 Classic 0,40 x 75 mm
STD125040 Classic 0,40 x 125 mm

STD15020H Classic 0,20 x 15 mm
STD25025H Classic 0,25 x 25 mm
STD30025H Classic 0,25 x 30 mm
STD30030H Classic 0,30x 30 mm
STD40025H Classic 0,25 x 40 mm
STD40030H Classic 0,30x 40 mm
STD50030H Classic 0,30x 50 mm
STD50035H Classic 0,35x 50 mm
STD70030H Classic 0,30x 70 mm
STD75030H Classic 0,30x 75 mm
STD75032H Classic 0,32x 75 mm
STD75040H Classic 0,40x 75 mm
STD90035H Classic 0,35x 90 mm

STD13020-5 Classic 0,20 x 13 mm
STD15020-5 Classic 0,20 x 15 mm
STD15025-5 Classic 0,25 x 15 mm
STD25025-5 Classic 0,25 x 25 mm
STD30025-5 Classic 0,25 x 30 mm
STD30030-5 Classic 0,30 x 30 mm
STD30032-5 Classic 0,32 x 30 mm



Lisää tietoa HEGUsta ja neuloista löytyy osoitteesta www.nordicacupuncture.com

HEGU Classic Gold -akupunktioneula

Klassinen kiinalainen akupunktioneula, kultapäällysteinen. Voidaan käyttää nikkeliallergiaa epäiltäessä. Valmistettu ruostumattomasta kirurgisesta jousiteräksestä. Steriloitu etyleenioksidikaasulla, 3 vuoden steriliteetti.

1-pack, yksittäispakattu ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia

STD30030G Classic Gold 0,30 x 30mm



HEGU Xeno -akupunktioneulat

HEGU Xeno -akupunktioneula on kunnianhimoisen tuotekehitysohjelman tulos. Tämä ainutlaatuinen neula on valmistettu korealaiseen tyyliin jousimaisella kädensijalla ilman silmukkaa. HEGU Xenon kiedottu kädensija on valmistettu ruostumattomasta teräslangasta, mikä tekee siitä kovemman ja tukevamman neulan, mitä varsinkin länsimaiset akupunktioterapeutit arvostavat. Ergonominen kädensija mahdollistaa erinomaisen otteen, maksimaalisen tarkkuuden ja ohjattavuuden sekä se johtaa hyvin sähköä. HEGU Xeno -neulat on valmistettu poikkeuksellisen laadukkaasta japanilaisesta kirurgisesta ruostumattomasta teräksestä. 3 vuoden sterilitaetti.



1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia



1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia



5-pack / 5 neulaa samassa paketissa ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia (100kpl x 5-pack)



XEN15020 Xeno 0,20 x 15 mm
XEN15025 Xeno 0,25 x 15 mm
XEN15030 Xeno 0,30 x 15 mm
XEN25020 Xeno 0,20 x 25 mm
XEN25025 Xeno 0,25 x 25 mm
XEN25030 Xeno 0,30 x 25 mm
XEN30016 Xeno 0,16 x 30 mm
XEN30025 Xeno 0,25 x 30 mm
XEN30030 Xeno 0,30 x 30 mm
XEN30032 Xeno 0,32 x 30 mm
XEN40025 Xeno 0,25 x 40 mm
XEN40030 Xeno 0,30 x 40 mm
XEN50030 Xeno 0,30 x 50 mm
XEN50035 Xeno 0,35 x 50 mm

XEN15020H Xeno 0,20 x 15 mm
XEN25025H Xeno 0,25 x 25 mm
XEN30025H Xeno 0,30 x 25 mm
XEN30030H Xeno 0,30 x 30 mm
XEN40030H Xeno 0,30 x 40 mm
XEN50030H Xeno 0,30 x 50 mm
XEN50035H Xeno 0,35 x 50 mm
XEN70030H Xeno 0,30 x 70 mm
XEN75035H Xeno 0,35 x 75 mm

XEN15020-5 Xeno 0,20 x 15 mm
XEN15025-5 Xeno 0,25 x 15 mm
XEN25025-5 Xeno 0,25 x 25 mm
XEN25030-5 Xeno 0,30 x 25 mm
XEN30025-5 Xeno 0,25 x 30 mm
XEN30030-5 Xeno 0,30 x 30 mm
XEN40030-5 Xeno 0,30 x 40 mm
XEN50030-5 Xeno 0,30 x 50 mm

HEGU Onex -akupunktioneulat

HEGU Onex lanseerattiin 20-vuotisjuhlamme kunniaksi vuonna 2013. Onex on laadukas akupunktioneula, joka on valmistettu japanilaisesta kirurgisesta ruostumattomasta teräksestä. Onex-neula luokitellaan korealaiseksi akupunktio-neulaksi, jolla on myös erinomainen lämmön ja sähkön johtavuus. HEGU Onex -akupunktioneulassa on ainutlaatuisen terävä timanttileikattu kärki, jolla saavutetaan erittäin suuri tarkkuus. Neulan kärjen muoto, erittäin ohut kerros lääketieteellistä silikonia neulassa ja vakaa kädensija mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. 3 vuoden sterilitaetti.



1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia



1-pack / yksittäispakattu neula ohjausputken kanssa. 100 neulaa/rasia



5-pack / 5 neulaa samassa paketissa ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia (100kpl x 5-pack)



ONX15020 Onex 0,20 x 15 mm
ONX15025 Onex 0,25 x 15 mm
ONX15030 Onex 0,30 x 15 mm
ONX25020 Onex 0,20 x 25 mm
ONX25025 Onex 0,25 x 25 mm
ONX25030 Onex 0,30 x 25 mm
ONX30016 Onex 0,16 x 30 mm

ONX30016H Onex 0,16 x 30 mm
ONX30025H Onex 0,30 x 25 mm
ONX30030H Onex 0,30 x 30 mm
ONX50030H Onex 0,30 x 50 mm
ONX75040H Onex 0,40 x 75 mm

ONX15020-5 Onex 0,20 x 15 mm
ONX25025-5 Onex 0,25 x 25 mm
ONX30025-5 Onex 0,25 x 30 mm
ONX30030-5 Onex 0,30 x 30 mm
ONX40025-5 Onex 0,25 x 40 mm

HEGU Pura -akupunktioneulat

HEGU Pura -akupunktioneulat kuuluvat hienoimpiin japanilaisiin neulatyyppeihin, jotka tunnetaan hyvistä hoitotuloksista. Pura-neuloissa on muoviset kädensijat, joiden väri vaihtelee neulan halkaisijan mukaan. Pitkä, jämäkkä ja ergonomisesti muotoiltu kädensija tekee HEGU Pura -neulasta erittäin käyttäjäystävällisen ja sillä on helppo työskennellä. Itse neula on valmistettu erityisestä japanilaisesta ruostumattomasta teräksestä. Kartio-mainen neulan kärki on mikrohiottu ja DDS-pinnoitettu. 3 vuoden sterilitaetti.



1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia

1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia

5-pack / 5 neulaa samassa paketissa ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia (100kpl x 5-pack)

HEG15020P Pura 0,20 x 15 mm
HEG30025P Pura 0,25 x 30 mm
HEG30030P Pura 0,30 x 30 mm
HEG50030P Pura 0,30 x 50 mm


HEG15020PH Pura 0,20 x 15 mm
HEG30025PH Pura 0,25 x 30 mm
HEG50030PH Pura 0,30 x 50 mm
HEG50035PH Pura 0,35 x 50 mm

HEG25025P-5 Pura 0,25 x 25 mm
HEG30030P-5 Pura 0,30 x 30 mm

HEGU Dry Needle (kuivaneulaus)

HEGUn Dry Needle -akupunktioneula ja sen sisältämät materiaalit on suunniteltu erityisesti Dry Needling eli kuivaneulonta -hoitoihin. Neulan kärjen muoto, erittäin ohut kerros lääketieteellistä silikonia neulassa ja vakaa kädensija mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Dry Needling -akupunktihoitajat kertovat saavansa hyvän kosketusvasteen HEGU Dry Needle -akupunktioneulasta, ja että se läpäisee myös "tiukat lihassolmut" helpommin, jolloin myös hoitotulokset ja asiakkaan tyytyväisyys ovat parempia. 3 vuoden sterilitaetti valmistuspäivästä.

1-pack / yksittäispakattu neula ohjausputken kanssa. 100 neulaa/rasia

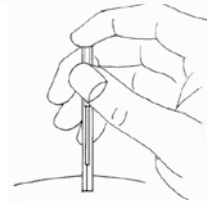

DNH40030H Dry Needle 0,30 x 40 mm
DNH50030H Dry Needle 0,30 x 50 mm
DNH60030H Dry Needle 0,30 x 60 mm
DNH75040H Dry Needle 0,40 x 75 mm



Kuivaneulaus ja akupunktio ovat kaksi erilaista hoitomenetelmää, jotka vaativat oman koulutuksensa ja osaamisensa.

Akupunktionuket ja -mallit

Anatomiset mallit pehmeästä vinyylimuovista jalustalevyllä. Akupunktiopisteet ja meridiaanit on merkitty selvästi.

KVINNA-47 Akupunktiomalli - Nainen 47cm, pehmeä
MAN-50 Akupunktiomalli - Mies 47cm, pehmeä
ÖRA Ihmisen korvan malli, 22cm

KVINNA-47



MAN-50



ÖRA

Seirin akupunktioneulat

Seirin on tunnettu korkealaatuinen japanilainen akupunktioneulavalmistaja. Neulat on konehiottu, kiillotettu ja ne on valmistettu kirurgisesta jousiteräksestä. Seirinin neuloilla on 4 vuoden sterilitaetti valmistuspäivästä. Neulojen kärjessä on erittäin ohut silikonipäälyste.



SER15020B



SER30030B



SER30025JH

B / D-tyyppi: 1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia

SER15020B Seirin 0.20 x 15 mm, sininen
SER30030B Seirin 0.30 x 30 mm, beige
SER40025B Seirin 0.25 x 40 mm, lila
SER50030B Seirin 0.30 x 50 mm, beige
SER50035B Seirin 0.35 x 50 mm, musta
SER15025D Seirin 0.25 x 15 mm, lila

J-tyyppi: 1-pack / yksittäispakattu neula ohjausputken kanssa. 100 neulaa/rasia

SER30016JH Seirin 0.16 x 30 mm, punainen
SER30025JH Seirin 0.25 x 30 mm, lila
SER30030JH Seirin 0.30 x 30 mm, beige
SER40025JH Seirin 0.25 x 40 mm, lila
SER50030JH Seirin 0.30 x 50 mm, beige
SER60030JH Seirin 0.30 x 60 mm, beige

Jäteneulapurkit

Käytetyt akupunktioneulat luokitellaan tartuntavaaralliseksi jätteeksi, ja niitä on käsiteltävä huolella pistovahinkojen ja tartuntojen välttämiseksi. Neulat tulee siksi säilyttää iskunkestävissä purkeissa. Neuloja voi säilyttää purkeissa enintään 1 vuoden ajan. Purkkien myöhempää käsittelyä koskevat säännöt voivat vaihdella kunnittain.

RISK-0,5L Jäteneulapurkki 0,5 litraa


RISK-1,5L Jäteneulapurkki 1,5 litraa



Akupunktiojulisteet

71820 Akupunktiojuliste

Akupunktiojuliste johon on merkitty kaikki kehon akupisteet. Molemmipuolinen laminointi ja metallilenkki ripustusta varten. 98 x 68 cm.

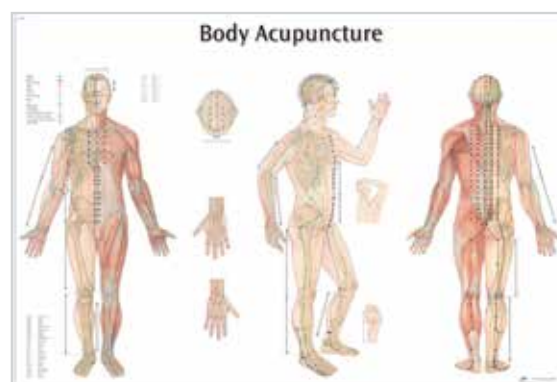

71820

Korva-akupunktio

STD-PRESS Hegu Classic akupunktionasta, 0,22 x 1,3 mm

Hegu Standard akupunktionasta tai painoneula on kiinalainen neula, jota käytetään pitkäaikaisissa, tavallisesti urheiluun ja riippuvuuksiin liittyvissä akupunktioidoissa. Akupunktionastaa käytetään useimmiten hoidettaessa korvaa, mutta sitä voidaan käyttää myös muihin kehon pisteisiin.

Akupunktionastat ovat kiinni ihonvärisessä laastarissa ja ne voidaan jättää paikoilleen useiksi päiviksi ilman että potilas kokee ne epämiellyttäväksi. Yhteen laastariin on pakattu steriilisti 10 akupunktionastaa, ja yhdessä rasiassa on yhteensä 100 nastaa (10 laastaria). Säilyvyys 3 vuotta valmistuspäivästä alkaen.



Seirin akupunktionasta

Seirin Pyonex -nastan valmistaja Seirin on maailman ehdotonta kärkeä kivuttomaan hoitoon tarkoitettujen neulojen valmistajana. Pyonex akupunktionastat sopivat sekä korvien että kehon akupunktioon, ja niitä on saatavilla useilla värikoodatuilla pituuksilla. Hoidon vaikutusta on mahdollista pitkittää, sillä nastaa voidaan pitää paikoillaan jopa 48 tuntia. Potilas voi itse hieroa neulaa sen ollessa paikoillaan.

Laadukas laastari pysyy paikallaan pitkäaikaisessakin hoidossa. Yhteen laastariin on pakattu steriilisti 10 akupunktionastaa, ja yhdessä rasiassa on yhteensä 100 nastaa (10 laastaria). Säilyvyys 3 vuotta valmistuspäivästä alkaen.



PY00.6020	0,15 x 0,6 mm
PY00.9020	0,17 x 0,9 mm
PY01.2020	0,20 x 1,2 mm
PY01.5020	0,20 x 1,5 mm

8010600 Royaltop kuulalaastarit

Royaltop kuulalaastareita käytetään stimuloimaan korvien ja kehon akupunktiopisteitä ilman, että ihoa täytyy läpäistää. Royaltop kuulalaastareiden ainutlaatuinen muotoilu takaa tehokkuuden ja vakaan paineen, joka vastaa 5 kg/m². Kuulan aiheuttama paine pehmentää lihaksia tehokkaasti ja stimuloi verenkiertoa. Kuulalaastareiden käyttö lievittää lihaskipua ja nopeuttaa palautumista. Royaltop kuulalaastareita voidaan käyttää muutamasta tunnista useaan päivään. Kuulalaastarit on valmistettu Japanissa. 300 kpl / pakkaus.



Kuulalaastareita voidaan käyttää vaihtoehtona perinteiseen korvan akupunktioon.

Akupunktiostimulaattorit

ASSUPER Akupunktiostimulaattori AS Super 4 Digital

Schwa Medico AS Super 4 Digital sisältää 30 valmista ja 7 ohjelmoitavissa olevaa ohjelmaa. Laite sisältää myös modernin kivunhoidon mukaisen HAN-stimulaatio-ohjelman. Sähköstimulaattorissa on palovammoilta suojaava AKS-ihonsuojajärjestelmä. AS Super 4 Digitalissa on 4 kanavaa jopa 8 akupunktioneulan samanaikaiseen stimulaatioon. Voimakkuus voidaan säätää erikseen jokaiselle kanavalle. Voimakkuutta säädetään asteittain 0,1 MA verran, millä varmistetaan akupunktioidon turvallisuus. Sähköstimulaattoria voidaan käyttää joko paristolla tai verkkovirralla. Myyntipakkaukseen kuuluu 4 eriväristä kaapeliparia puristimiseen, adapteri verkkovirtaa varten sekä 4 paristoa.



ASSUPER



5ES-130

5ES-130 Akupunktiostimulaattori ITO ES-130

Erittäin tunnetun japanilaisen ITO:n kompakti, kevyt ja laadukas akupunktiostimulaattori. Kolme kanavaa, joilla voi stimuloida samanaikaisesti enintään kuutta neulaa. Kolmen ulostulon taajuksia voidaan säätää toisistaan riippumatta. Low/High -painike matalalle tai korkealle intensiteetille. Paristokäyttöinen 9V paristolla. Toimitetaan käyttövalmiina kaapeleiden, suojakotelon ja vyöpidikkeen kanssa.

5ES-160 Akupunktiostimulaattori ITO ES-160, 6-kanavainen

Suosittu japanilaisvalmisteinen sähköakupunktiolaite, jossa on 6 kanavaa jopa 12 neulan samanaikaiseen stimulointiin. 8 erilaista stimulointiohjelmaa: Jatkuva, Burst (matalataajuisen), Surge (4/6 s), Fast+Slow, Sweep, Random-ohjelma 1-3. Viimeksi käytetty ohjelma ja 16 tallennettavissa olevaa omaa ohjelmaa. Mukana herkkä ja tarkka akupunktioetsin, jonka avulla voidaan stimuloida sekä mitata ja käsitellä tasavirtaa käyttäen (ns. Ryodoraku-menetelmä). Paristokäyttöinen 6V paristolla. Toimitetaan käyttövalmiina kaapeleiden ja etsimen kanssa.



5ES-160

Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

Tässä luvussa esittelemme hierontaan liittyvän laajan tuotevalikoiman. Mukana mm. hierontaöljyt, suojapaperit, lämpö- ja kylmähoitotuotteet. Näitä tuotteita voidaan käyttää niin hyvinvoinnin edistämiseen, vammojen ennaltaehkäisyyn kuin kuntoutukseenkin.



Hierontatuotteet

27201 Hierontaristi, puinen

Aasialainen puinen hierontaristi kaikkeen käsittelyyn, jossa halutaan vaikuttaa syvällä oleviin kudoksiin tai triggerpisteisiin. Koko: 10 x 11 cm.



27201



27200

27200 Gua Sha faskiahierontasetti

Pakkaus sisältää kolme Gua Sha -välinettä; Rod, Fish ja Heart, joita käytetään kehon pehmytkudosten hoitamiseen. Välineet on valmistettu jade-kivestä. Gua Sha on vanha kiinalainen hoitomuoto, jossa erilaisilla välineillä stimuloidaan ihoa ja näin voimistetaan verenkiertoa. Pyöristetyt reunat ovat miellyttävät sekä terapeutille että potilaalle. Erilaiset muotoilut mahdollistavat käytön eri tavoin.



12010

12010 Hierontarulla Thera-Band

Käytännöllinen hierontarulla, joka on helppo käyttää kehon lihasten hierontaan, kotona ja klinikalla. Sisältää harjoitusohjeet. Lateksiton. Pituus 53 cm.



Hierontapöydät

Valikoimassamme on monia erilaisia hierontapöytämalleja, sekä kannettavia että isompia tukevia hoitopöytiä, jotka sopivat erinomaisesti hierontaan ja fysioterapiaan. Kaikki mallit löydät kappaleesta "Hoitopöydät"

Hierontarullat ja -pallot



- 400048** Blackroll Foam Roller, 30x15 cm
- 410030** Blackroll Mini, jalkarulla, 15x5 cm
- 410010** Blackroll Boll, 8 cm
- 410020** Blackroll Boll, 12 cm
- 410040** Blackroll Set, 4 kpl (rullat ja pallot)
- 410050** Blackroll Duoboll, 16x8 cm

Kova kaksoispallo lihasten ja pehmytosten hierontaan, nk. SMR-hieronta (Self-Myofascial Release massage). Sopii erinomaisesti rintarangan, niskan ja selän hierontaan ja voidaan käyttää lattiaa tai seinää vasten. Materiaali on lujatekoista ja helppo puhdistaa. Tuote on ihoystävällinen, hajuton sekä 100% kierrätettävä. 16 x 8 x 8cm



Faskiavaha

12213 Lojer Fasciavaha, 150 ml

Lojer Faskiavaha on täysin luonnollisista aineista valmistettu vaha manuaaliseen terapiaan ja hierontaan. Vaha sisältää kamomillaa ja aloe veraa, valmistuksessa ei ole käytetty keinotekoisia aineita. Valmistusmaa Suomi.



Ekologiset hierontaöljyt



- 12401** Hierontaöljy Eco neutral
- 12402** Hierontaöljy Eco Ylang Ylang
- 12403** Hierontaöljy Eco Chili
- 12400** Hierontaöljy Eco, 3-pack

Ekologiset hierontaöljyt koostuvat luonnollisista öljyistä eivätkä sisällä synteettisiä lisäaineita, väriaineita, hajusteita tai säilöntäaineita. Neutral on hajusteeton ja on erinomainen perusöljy. Ylang-Ylang tuoksuu kukille ja sillä on rauhoittava ja rentouttava vaikutus. Chili antaa lämpenemisen ja rentouttavan tunteen. Hierontaöljyt toimitetaan 500ml pumppupulloissa.

Hierontaöljyt



12200-1 Garnatioöljy, 1 litra

12200-5 Garnatioöljy, 5 litraa

Ohut parafiinipohjainen perusöljy, joka soveltuu parhaiten ei karvaiselle iholle.

12300 Inert, 1 litra

12301-5 Inert, 5 litraa

Turvallinen, allergisoimaton synteettinen hierontaöljy, joka ei herkistä eikä ärsytä ihoa.

12202-1 Maapähkinäöljy, 1 litra

12202-5 Maapähkinäöljy, 5 litraa

Luonnon maapähkinäöljy E-vitamiinilla, joka sopii erinomaisesti kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

12203-1 Massnutöljy, 1 litra

12203-5 Massnutöljy, 5 litraa

Garnatio- ja maapähkinäöljyn sekoitus E-vitamiinilla.

12212-1 Manteliöljy, 1 litra

12212-5 Manteliöljy, 5 litraa

Paksuhko ja hienojakoinen luonnonöljy E-vitamiinilla, joka soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

12217 Appelsiiniöljy, 1 litra

12217-5 Appelsiiniöljy, 5 litraa

Auringonkukka- ja garnatioöljyn seos E-vitamiinilla, johon on lisätty appelsiinieteerinen öljy.

Hierontavoiteet

12214 Rub In, 1 litra

12215 Rub In, 5 litraa

Ohuehko voidemainen, ihoa hoitava ja ravitseva, tahraamaton B-vitamiininen hierontavoide. Miellyttävä iholle ja helposti poistettava. Soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

12206 Lojer Finn-Green, 1 litra

12206-5 Lojer Finn-Green, 5 litraa

Tuoksuton kasviöljypohjainen, turvallinen ja erittäin ihoystävällinen vaihtoehto, niin hierojalle kuin hierottavalle. Sisältää ihoa hoitavia aineita, kuten Aloe veraa, Allantonia, Kamomillaa ja on käytössä taloudellinen.

12204 Herbacur, 1 litra

12207 Herbacur, 5 litraa

Paksuhko, kookosvoidepohjainen, hajustamaton ja vesiliukoinen voide erityisesti karvaisen ihoalueen hierontaan.

12216 Lavendel, 1 litra

Paksuhko parafiinipohjainen hierontavoide, johon lisätty laventeleeteerinen öljy. Sopii erityisesti karvaisen ihoalueen hierontaan.

12218 Prolive, 1 litra

12218-5 Prolive, 5 litraa

Hajuton oliiviöljypohjainen kuivalle iholle soveltuva hierontavoide.



Pumput

14101 Pumppu 1 litran pulloon

14100 Pumppu 5 litran muoviasiaa



Hierontalaite

31506 Värihieronta, Vibramat

Voimakas hierontalaite kahdella eri nopeudella, 1400 ja 2800 värähdystä/min. klinikka- ja kotikäyttöön. Suuri käsittelypinta-ala. Täydellinen toimitus kahdella sovittimella, toinen sileää kumia ja toinen muovinastoin. Kantolaukku sisältyy. Paino 3,2 kg.



31506

Lämmityslaitteet

1222108 Lämmityslaitte E 1, pöytämalli

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan rutilällä ja 4 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 33 cm, syvyys 20 cm, korkeus 41 cm. Paino 7 kg.

1222808 Lämmityslaitte M 2 (VAI E2), pöytämalli

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyskellä. Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan täydellisenä rutilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat: Leveys 51 cm, syvyys 31 cm, korkeus 46 cm. Paino 13 kg.

1222408 Lämmityslaitte M 2, lattiamalli pyörillä

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyskellä. Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan täydellisenä rutilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat: Leveys 51 cm, syvyys 31 cm, korkeus 46 cm. Paino 22 kg.

1222508 Lämmityslaitte M 4, lattiamalli pyörillä

Toimitetaan 24 vakiopakkauksella, muutoin sama kuin M 2. Ulkomitat: Leveys 89 cm, syvyys 51 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat: Leveys 71 cm, syvyys 41 cm, korkeus 46 cm. Paino 60 kg.

1224010 Sivupöytä, M 2 ja M 4 malliin

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä pöytätasolla ja kahdella rutilätasolla. Mitat: Leveys 66 cm, syvyys 35 cm, korkeus 76 cm.



1222108



1222808



1222408



1222508, 1224010

Geelilämpöpakkaukset

130321 Vakiomalli, 20 x 40 cm

130322 Selkämalli, 30 x 40 cm

130323 Niskamalli, 19 x 60 cm

Pakkauksien etu on niiden käytettävyys lämmityslaitteissa tai mikroaaltouunissa. Valmistettu muovista geelitäytteellä. Muotoiltava.



Savilämpöpakkaukset



15103 Selkämalli, 25 x 61 cm

15102 Niskamalli, 13 x 61 cm

15104 Erikoissuuri, 38 x 61 cm

15100 Vakio, 25 x 30 cm

Antaa miellyttävän kostean lämmön noin 30 minuutin ajan. Pakkaukset ommeltu osioihin, jotka täytetty erikoissavella. Pakkaukset säilytetään lämmityslaitteessa noin 71° - 74° C vedessä. Aseta pakkaus aina potilaan päälle, älä päinvastoin.

Parafiiniallas

29140 Parafiiniallas Para Pro

Parafiinihoito lämmittää miellyttävästi, lievittää nivelkipuja ja pehmittää jäykkiä lihaksia. Samalla se pehmentää ja kosteuttaa ihoa. Parafiini Para Pro -altaaseen mahtuu 3 kg parafiinia ja siinä on säädettävä termostaatti 50–60 °C. Lämpötilaa on helppo seurata digitaalisen näytön ansiosta. Ulkomitat: 39x25x18. Paino 3,1 kg ilman parafiinia. CE-merkitty MDD direktiiviin. Ei sisällä parafiinia.



29140



Froteepäällinen



15110 Frotée, vakiopakkaukselle

15111 Frotée, erikoissuuri- ja selkähakaukselle

15112 Frotée, niskapakaukselle

Froteepäällinen tarranauhalla. Sopii savilämpöpakkauksiin.

Parafiini

19007 Parafiini, 3 kg (6 pussia á 0,5 kg)

19008 Parafiini, 18 kg (36 pussia á 0,5 kg)

19009 Parafiini, 4 kg harkkoina, (4 harkkoa á 1 kg)

19010 Parafiini, 16 kg (16 harkkoa á 1 kg)

Parafiinit käyvät kaikkiin parafiinialtaisiin.

19130 Paraffin ParaPearls, 2,5 kg

ParaPearls on pieniksi helmiksi muotoiltua parafiinia. Helmiä on helppo annostella ja pienen kokonsa ansiosta ne myös sulavat nopeasti. Toimitetaan kätevässä uudelleen suljettavassa ämpäri-ässä. Sulamispiste on 52-54 astetta.



19007



19009



19130

Kylmävoiteet

12220 Kylmävoide, pumppupullo 500 ml

12219 Kylmävoide, pumppupullo 6 x 500 ml

12223 Kylmävoide, muovikanisteri 5 litraa

Kylmävoidetta on helppo levittää, sillä se imeytyy nopeasti eikä tahraa vaatteita. Sopii käytettäväksi mm. vastaanotoilla ja kotona.



12220



12223

Kylmähoitotuotteet

181904 Kylmäsuihke, purkki 200 ml

Articare kylmäsuihketta käytetään välittömään jäähdyttämiseen ja kivunlievennykseen pehmytkudosvaurioissa, kuten äkillisissä revähdyksissä ja venähdyksissä. Suihkutetaan useina pieninä suihkeannoksina 15 cm etäisyydeltä.

181903 Quick Cold, kertakäyttöinen kylmäpussi, 24 kpl

Kertakäyttöiset kylmäpussit äkillisiin loukkaantumisiin. Antaa paikallisen kivun lievityksen tehokkaalla kylmäkäsittelyllä jopa 30 minuutin ajaksi. Tuote aktivoidaan painamalla pakkausta käsin. Pyyhe tai vastaava on asetettava käsiteltävän henkilön ihon ja kylmäpussin välille. Koko: 15 x 24 cm. 24 kpl/pakkaus.



181904



181903

Kylmäpakkaukset

17015 Standard, 25 x 34 cm

17017 Puolikoko, 17 x 28 cm

Coldpackissa on geelitäyte, joka säilyttää muotoiltavuutensa myös jäähdytettäessä. Antaa tehokkaan hoidon noin 30 minuutin ajan. Coldpackia voidaan käyttää uudelleen useita kertoja. Älä aseta pakkausta suoraan iholle, vaan käytä välikettä tai muuta suojaa ja aseta pakkaus aina käsiteltävän henkilön päälle eikä päinvastoin. Mustat pakkaukset ovat valmistettu polyuretaanista ja niissä ei ole pvc:tä ja lateksia.



17015



17017

Nylatex-nauha

1221264-10 Nylatex-nauha, 6 x 61 cm

1221264 Nylatex-nauha, 6 x 61 cm, 3 kpl/pakkaus

1221206-10 Nylatex-nauha, 6 x 122 cm

1221206 Nylatex-nauha, 6 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus

1221212-10 Nylatex-nauha, 10 x 122 cm

1221212 Nylatex-nauha, 10 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus

Vaaleansininen, elastinen, tarrakiinnitteinen, nailonista ja luonnonkumista valmistettu nauha lämpö- ja kylmäpakkausten sekä elektrodien ym. kiinnittämiseen. Pestävä.



Terapiavälineet

Vastaanotolla oikeat välineet takaavat onnistuneen terapiahetken. Olemme tarkkaan valinneet toimittajamme, jotka valmistavat erittäin korkealaatuisia tuotteita. Voit valita mieleisesi tuotteet mm. tarjolla olevista matoista, itse valmistamistamme tyynyistä ja laajasta traktiovälinevalikoimastamme.




Airex-matot

Matot on valmistettu erittäin laadukkaista materiaaleista, jotka pysyvät hyvännäköisinä vuosien käytöstä huolimatta. Patentoitussa materiaalissa on suljettu kennorakenne, joka tekee matosta vettähylkivän, mattoja voidaan käyttää jopa vedessä. Sanitized-käsittely estää homeetta, pitää matot hygieenisinä ja helposti puhdistettavina. Matot ovat liukumattomia ja ne voi rullata kasaan. Lateksittomia. Valmistettu Sveitsissä.

- 67309** Airex Fitness 120, 120x60x1,5 cm, sininen
- 67301** Airex Coronella 185, 185x60x1,5 cm, punainen
- 67315** Airex Coronella 185, 185x60x1,5 cm, vihreä
- 67304** Airex Coronella 200, 200x60x1,5 cm, antrasiitti
- 67302** Airex Corona 185, 185x100x1,5 cm, punainen
- 67316** Airex Corona 185, 185x100x1,5 cm, vihreä
- 67305** Airex Corona 200, 200x100x1,5 cm, antrasiitti
- 67303** Airex Atlas, 200x125x1,5 cm, punainen



Isompiin tilauksiin saatavilla myös eri värejä!

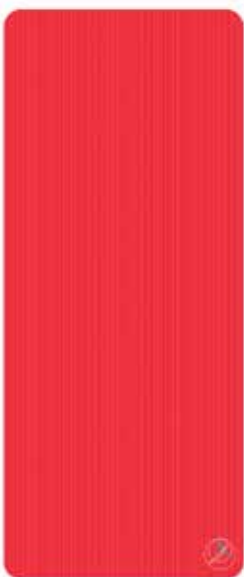

68006



68002

Profigym-matot

- 68005** Profigym matto, 180x60x1,5 cm, punainen
- 68006** Profigym matto, 190x80x1,5 cm, punainen
- 68007** Profigym matto, 180x120x1,5 cm, punainen

Voimistelumatto on korkealaatuinen matto, jota voi käyttää venyttelymattona tai ryhmäliikuntatunneilla. Mattoa voi käyttää jopa vedessä ja sen pinta on helppo puhdistaa pyyhkimällä. Tuote ei sisällä lateksia tai PVC:tä.

- 68002** Venyttelymatto, harmaa
- 68002-10** Venyttelymatto, harmaa, 10 kpl

Korkealaatuinen lateksiton ja pvc-vapaa venyttelymatto, nihkeän pinnan ansiosta pysyy hyvin paikallaan voimistelun tai venyttelyn ajan. Kulmissa reiät, joista maton voi ripustaa seinätelineeseen. Voidaan käyttää myös vedessä ja on helppo pyyhkiä puhtaaksi. Koko: 140 x 60 x 1 cm. Matto ei sisällä pvc:tä eikä lateksia.

Joogamatot

67325 Airex Yoga/Pilates 190, harmaa

Matto on Airexin ohuin (8mm), mutta se on myös pehmeä ja vaimentaa jalkoihin ja ranteisiin kohdistuvaa rasitusta. Airexin pilatesmatto on sekä kiinteämpi, joustamattomampi että liukumattomampi kuin muut Airexin matot. Koko: 190 x 60 x 0,8cm

6700030 Joogamatto, sininen

6700030-10 Joogamatto, sininen, 10 kpl

Erinomainen joogamatto, joka nihkeän pinnan ansiosta pysyy hyvin paikalla voimistelun tai venyttelyn ajan. Matto on helppo kääriä kasaan tai ripustaa seinätelineeseen. Koko: 180 x 60 x 0,5.

Mattojen säilytys

67317 Airex seinätanko, leveys 65 cm

67318 Airex seinätanko, leveys 105 cm

Tilaa 10:lle Airex-matolle. Syvyys 20 cm. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

68004 Seinäripustin venyttely- ja joogamatoille

Metallinen seinäripustin jooga- ja venyttelymatoille esirei'ityksellä. 48 cm puikkojen välillä. Tila 15 venyttelymatalle tai 20 joogamatalle. Koko 60x6 cm. Toimitetaan ilman ruuveja.



67325



67317, 67318



6700030



68004

Mobilisaatioapuvälineet

8010 Droppilevy, raajoille

8020 Kannettava droppilevy, kaksiosainen

8040 Droppilevy, lumbo-pelvic

Droppilevy raajoille on sileäpintainen droppilevy, joka soveltuu erinomaisesti olkapäiden, kyynärpäiden, polvien, nilkkojen ja jalkaterien hoitoon. Droppilevyn kehittäjä on Dr. Thuli ja siinä on suora pudotus ja jännitteensäätönuppi. Pudotuskorkeus 8,4 mm. Mitat: 20x15x6 cm (PxLxK). Lumbo-pelvic kannettava droppilevy soveltuu erinomaisesti etenkin lantion, lannen ja selkärangan hoitoon. Siinä on kahvat molemmilla puolilla ja jännitteensäätönuppi toisella puolella. Levyssä on nopea pudotus, joka vaimentuu loppua kohden. Pudotuskorkeus 14 mm. Mitat: 31x51x9 cm (PxLxK).

25380 Mobilisaatiokiila, musta

Mobilisaatiokiila soveltuu esimerkiksi selkärangan, käden tai nilkan mobilisointiin. Kova mobilisaatiokiila, jossa on keskellä ura. Mobilisaatiokiila on valmistettu polyuretaanista. Koko 15,5 x 9,9 x 5 cm (PxLxK).



Niskatraktio

32961 Traktiokauluri, naisten koko, small/medium

32962 Traktiokauluri, miesten koko, medium/large

Pidetty traktiokauluri, valmistettu pehmeästä vaahtomuovista, irrotettava ja pestävä päällinen. Kauluri tukee kaularankaa miellyttävästi ja veto voidaan säätää suoraan tai kulmaan pumppamalla kauluriin sopivasti ilmaa. Huolellisen tutkimuksen jälkeen tämä apuväline toimii hyvin vastaanotolla ja kotihoidossa. Suositellut kaulanympärysmittat naisille 34–42 cm ja miehille 37–46 cm.



32961

32962



32951



32954

Traktio- ja fiksaatiovyöt

304040 Traktiovyö "Totte"

Turvavyötyyppinen, pehmustettu ja varustettu lisäkiinnityksellä, jolla vyön saa terapeutin lantion ympärille.

32955 Traktio- / fiksaatiovyö

Pehmeä vyö, 215 cm pitkä, 6 cm leveä, tarrakiinnitys.

32957 Traktio- / fiksaatiovyö, "Kajs bälte"

Pehmustettu vyö tarrakiinnityksellä. 215 cm pitkä, 8 cm leveä.

304018 Fiksaatiovyö

Vyössä muovinen pikalukko. Pituus 3,2 m.



304040



32955



32957



304018

Urias ilmalastat

970001 Urias ilmalasta, 80 cm, käsivarsi pitkä

970002 Urias ilmalasta, 70 cm, käsivarsi lyhyt

970003 Urias ilmalasta, 53 cm, käsivarsi puolikas

970004 Urias ilmalasta, 40 cm, kyynärpää

970005 Urias ilmalasta, 20 cm, käsi, kaksi ilmakammiota

970007 Urias ilmalasta, 60 cm, pohje/reisi, kaksi ilmakammiota

970009 Urias ilmalasta, 100 kpl/pakkaus

Kertakäyttösuutin lastan hygieeniseen puhallustäyttöön

970011 Urias suodattimet, 5 kpl/pakkaus

Kosteuden pääsyn ehkäisemiseksi lastan puhaltamisen yhteydessä. Suodattimet vaihtavat väriään käyttöiän päättyessä.



970011



970009

Tyynyt

Tyynymme ovat erittäin korkealaatuisia ja ne on valmistettu kestävästä verhoilumateriaalista ja niissä on vetoketjut. Kaikki tyynyt toimitetaan vakiona harmaana - värinä Future Carbon.

Psoas-tyyny

67525B Psoas-tyyny, 30 x 40 x 50 cm, kahvalla, harmaa

Tyynyä saa myös muissa väreissä hieman pidemmällä toimitusajalla. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!



67525B

Niska- / nilkkatyyny

67528B Niska- / nilkkatyyny, 50 x 20 x 10 cm, harmaa

Tyynyä saa myös muissa väreissä hieman pidemmällä toimitusajalla. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!



67528B



Pyöreätyyny

67531B Pyöreätyyny H1, Ø 10 x 50 cm, kova, harmaa

67532B Pyöreätyyny H2, Ø 15 x 50 cm, kova, harmaa

67533B Pyöreätyyny H3, Ø 20 x 50 cm, kova, harmaa

67534B Pyöreätyyny M1, Ø 10 x 50 cm, pehmeä, harmaa

67535B Pyöreätyyny M2, Ø 15 x 50 cm, pehmeä, harmaa

67536B Pyöreätyyny M3, Ø 20 x 50 cm, pehmeä, harmaa



Bobathrulla

6376B Bobathrulla, Ø 20 x 100 cm, kova, harmaa

6375B Bobathrulla, Ø 30 x 100 cm, kova, harmaa

6374B Bobathrulla, Ø 40 x 100 cm, kova, harmaa

6373B Bobathrulla, Ø 50 x 100 cm, kova, harmaa



Kiilatyyyny

67539B Kiilatyyyny, 28 x 20 x 10 cm, harmaa

67541B Kiilatyyyny, 65 x 35 x 35 cm, harmaa

67540B Kiilatyyyny, 90 x 60 x 32 cm, harmaa



67540B

67541B

67539B

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Tyylikkääst vastaanottotilat antavat hyvän ensivaikutelman. Löydät seuraavilta sivuilta mm. sermejä ja väliverhoja tilanjakajiksi. Mukana myös suuri valikoima anatomisia malleja ja sisustuksellisia anatomisia karttoja. Esittelemme myös tarkasti valittuja mittausvälineitä sekä kulutustuotteita.



Ropimex-potilasverhot ja -sermit **ropimex®**

Saksalainen Ropimex-verhojärjestelmä on nyt Lojerin valikoimassa. Teleskooppisen verhotangon ansiosta voit muutamassa hetkessä ottaa väliverhon käyttöön, tai laittaa sen seinälle piiloon. Voit myös nostaa verhon kokonaan irti telineestään, ja siirtää sen vaikkapa viereiseen huoneeseen. Verhot on tehty Trevira CS -materiaalista erityisesti terveydenhuoltoon, ja ne täyttävät tiukat paloturvallisuus- ja antibakteeriset vaatimukset. Verhoja on 11 väri vaihtoehtoa.



ROPB200 Ropimex Butterfly -sermi 200cm

ROPB140 Ropimex Butterfly -sermi 140cm

Ropimex Butterfly -sermi on mobiili sermiratkaisu esimerkiksi sairaaloiden käyttöön. Sermi koostuu kolmesta seinäkkeestä, joista keskimmäinen seisoo tukevasti neljällä pyörällä. Keskimmäisen seinäkkeen molemmin puolin on 360° käännettävät seinäkkeet, jotka saadaan myös taitettua keskelle tilan maksimoimiseksi.



78300

Luurangot

78300 Luuranko

Luuranko luonnollisessa koossa. Kallo kolmessa osassa. Pää, yläraajat ja alaraajat voidaan irrottaa. Pyörällinen jalusta ja pölysuoja kuuluvat toimitukseen. Korkeus 170 cm.



Selkärangat

78401 Selkäranka vaahtomuovi välilevyillä

Liikkuvassa selkärangassa mukana lantio ja kallonpohja. Pehmeä vaahtomuovinen välilevy mahdollistaa rangan luonnollisen liikkeen havainnollistamisen helposti. Spinaalihermot. Luonnollisen kokoinen malli. Jalusta kuuluu toimitukseen. Korkeus jalustan kanssa 105 cm.

78402 Selkäranka muovisilla välilevyillä

Liikkuvassa selkärangassa mukana lantio ja kallonpohja. Muoviset välilevyt sekä spinaalihermot. Valtimot kaularangassa. Välilevyn pullistuma L3-L4 välissä. Luonnollisen kokoinen. Jalusta, joka voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää seinään kuuluu toimitukseen. Korkeus 74 cm.

Luiset mallit ylä- ja alaraajoista

78309 Yläraaja

Yläraaja, jossa mukana lapaluu, varttinäluu ja käsi.

78313 Käsi

Käsi, jossa mukana varttinäluu ja kyynäräluu.

78310 Alaraaja

Alaraaja, jossa mukana puolikas lantio ja jalka.

78311 Jalka

Jalka, jossa mukana sääriluu ja pohjeluu.



Selkä- ja kaulanikama

71985 Nikamavälilevyn pullistuma

Kaksi lannenikamaa, joissa hermot ja kaksi välilevyä, joissa lateraalinen ja sentraalinen välilevyn pullistuma. Välilevyt voidaan vaihtaa ja mallin avulla on helppo havainnollistaa, mistä välilevyn pullistumassa on kyse. Malli on jalustalla, korkeus 13 cm.



Lantio

78552 Naisen Lantio lantionpohjan lihaksilla

Yksityiskohtainen naisen lantio, irrotettava lantionpohja, jossa 5 erillistä osaa, valmistettu joustavasta materiaalista. Mallissa osa lantion luista ja lantionpohjan lihakset. Koko: 27 x 20 x 18 cm (PxLxK). Paino 1 kg.



Liikkuvat / Liikuteltavat toimintamallit



- 78500** Polvinivel
- 78501** Kyynärnivel
- 78502** Olkanivel
- 78503** Lonkkanivel
- 78500-4** Liikkuvat toimintamallit, yllä olevat 4kpl

Uusi, laadukkaampi nivelmalli, havainnollistamaan niveltemme liikkuvuutta. Mallit luovat selkeän kuvan anatomiasta ja ne sopivat erinomaisesti opetukseen sekä potilastyöhön. Kaikki mallit ovat luonnollisen kokoisia ja nivelsitein varustettuja. Nivelten rustopinnat on maalattu sinisellä. Toimitukseen sisältyy jalusta.

Lihasmallit



- 71995** Käsi, 5-osainen

Käsi, jossa lihakset, verisuonet ja hermot. Uloimmat lihakset irrotettavissa. Malli on jalustalla.

- 79500** Polvinivel, irrotettavat lihakset, 12 osaa
- 79502** Olkanivel, irrotettavat lihakset, 5 osaa
- 79503** Lonkkanivel, 7 osaa
- 79504** Kyynärnivel, 8 osaa
- 79500-4** Liikuteltavat mallit, 4 osaa

Laadukkaat nivelmallit havainnollistavat nivelten liikkuvuutta. Mallit luovat selkeän kuvan anatomiasta ja ne sopivat erinomaisesti opetukseen sekä potilastyöhön. Kaikki mallit ovat luonnollisen kokoisia ja nivelsitein varustettuja. Nivelten rustopinnat on maalattu sinisellä. Toimitukseen sisältyy jalustat.



Kysy lisää myös muista anatomisista malleista, jos et löydä etsimääsi.



Julisteet

Anatomian oppaat

- 78946** Lihakset
- 78949** Hermot
- 78943** Luusto
- 79790** Käsi ja ranne
- 79799** Käsivarsi ja olka
- 79850** Kaula
- 78024** Spinaali hermot
- 79780** Lonkka ja polvi
- 79795** Jalka ja nilkka

Muovilaminoidut anatomian oppaat kovalla muovipinnalla, joissa reiät ripustuskoukuille. Koko 50 x 65 cm. Kartat toimivat erinomaisesti opetuskäytössä.



78946



78949



78943



79790



79799



79780



45100



45101



45200



45201

Anatomian oppaat, muovilaminoidut

- 45100** Lojer-kartta, syvälihakset
- 45101** Lojer-kartta, pinnalliset lihakset
- 45200** Lojer-kartta hermot
- 45201** Lojer-kartta luusto

Lihaskartat sopivat hyvin opetustarkoitukseen. Nimitykset latinaksi. Kuvat muovilaminoidut. Koko 45 x 58 cm.



78910



Trikkeripistekartta


78910 Trikkeripistekartta, 2 kpl

Näyttää yhteyden kipualueen ja triggerpisteen välillä. Koko 82 x 97 cm. Sisältää kaksi karttaa.

Akupunktiojuliste

71820 Akupunktiojuliste

Akupunktiojuliste johon on merkitty kaikki kehon akupisteet. Molemmipuolinen laminointi ja metallilenkki ripustusta varten. 98 x 68 cm.

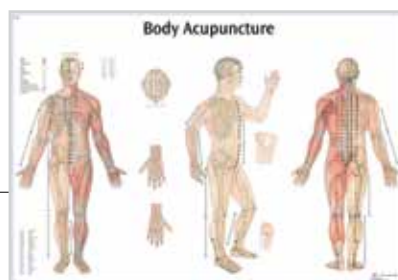

71820

Mittausvälineet


Lihassoiman mittaaminen



91810 EasyForce, Dynamometri, digitaalinen

91810-1 EasyForce lisävarusteet

EasyForce on uusi ja tehokas työkalu lihasvoiman mittaamiseen. Laitteen avulla voidaan objektiivisesti ja luotettavasti mitata voimantuottoa, ja se tarjoaa samalla myös arvokasta dataa potilaan hoitosuunnitelman luomista ja seuraamista varten. EasyForce mahdollistaa hands-free-mittaamisen, sillä se voidaan kiinnittää kahvoista erilaisiin kiinteisiin kohtiin. Näin terapeutin molemmat kädet vapautuvat muuhun käyttöön ja hän voi tarvittaessa keskittyä vain tarkkailemaan potilaan suoritusta. Ainutlaatuinen EasyForce-näyttö tarjoaa visualisoidun mittaustuloksen. Tämän avulla terapeutin on helppo selvittää potilaalle tämän tilannetta ja edistymistä, joka puolestaan lisää potilaan motivaatiota sitoutua hoitosuunnitelmaan.

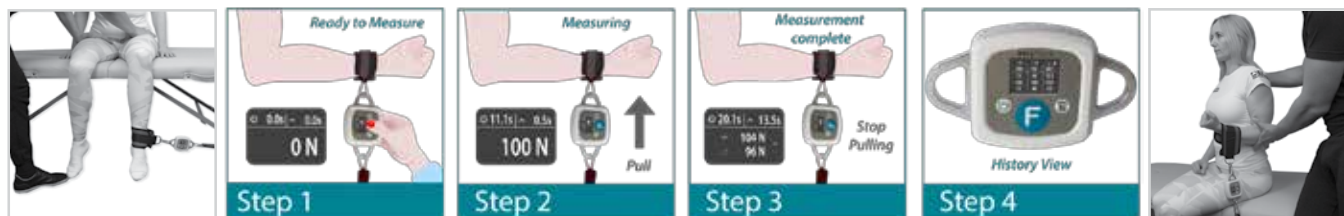

9120210 Dynamometri microFET2, digitaalinen

MicroFET2 on digitaalinen dynamometri, jolla testataan ja arvioidaan eri lihasten voimaa - nykyaikainen vaihtoehto vanhojen aikojen dynamometreille. microFET2 on suunniteltu ergonomisesti käteen sopivaksi ja se on erittäin kevyt ja helppokäyttöinen. Siinä on patentoitu järjestelmä, jonka ansiosta mittari pystyy havaitsemaan pienimmätkin voiman muutokset, voiman tulosuunnasta riippumatta. Käytetään maailmanlaajuisesti erilaisissa tutkimuksissa. Mittaa lihasvoiman 0,4-136 kg väliltä. LCD-näyttö näyttää maksimaalisen saavutetun testin lihasvoiman kiloina sekä keston sekunteina. Käsiyksikön paino 0,4 kg. Kolme erilaista applikaattoria (pyöreä, taivutettu ja sormi). Lihastestin ohjeet sisältyvät toimitukseen. Toimitetaan ladattavalla akulla ja laturilla sekä säilytyslaatikolla. Kokonaispaino 2 kg.



Puristusvoiman mittaaminen

91812 Vigorimetri, Martin

3 erikokoista kumipalloa ja yksinkertainen, lukemilla varustettu painemittari / manometri. Käden puristusvoiman mittaamiseen.

9120240 Käsodyn timeri Baseline

Mittaa kädenpuristusvoiman välillä 0–90 kg. Helppokäyttöinen ja antaa täsmälliset mittaustulokset. Ote kahvassa 5 eri asentoa. Toimitetaan säilytyslaatikossa.



120600 Käsidynamometri Jamar

Jamar on alkuperäinen ja suosituin käsidynamometri eri tutkimusten mukaisesti. Se mittaa käsivoiman 0-90 kg väliltä. Antaa tarkat arvot ja sitä on helppo käyttää. Otteen voi asettaa 5:een eri asentoon. Toimitetaan säilytyslaatikossa.



120600

120605 Jamar Plus+ käsidynamometri, digitaalinen

Jamarin käsidynamometri selkeällä lukuisella digitaalisella näytöllä. Mittaa käsivoiman 0-90kg väliltä, tarkka mittaustulos. Otteen voi asettaa viiteen eri asentoon. Toimitetaan säilytyslaatikossa. Patterikäyttöinen (2kpl AAA).



120605

Kaularangan liikkuvuuden mittaaminen

91821 Myrin Goniometri

Kaularangan liikkuvuuden mittaukseen, mutta voidaan käyttää myös muiden nivelten mittaukseen. Koostuu kompassikotelosta varustettuna kompassineulalla ja kallistusneulalla. Sisältää myös tarranauhan sekä tarvittaessa suoran ja kulmamuuovilastan, joka helpottaa kulmamittarin sijoittamista oikeaan kohtaan suhteessa mitattavaan niveltoimintoon. Toimitetaan kätevässä laukussa.



91821

Kulmamittari / goniometri

91800 Easyangle, digitaalinen goniometri

Erittäin suosittu moderni kulmamittari, joka mittaa kehon kaikkien nivelten liikkelaajuuden ja korvaa perinteiset goniometrit. Mittaria voidaan käyttää vain yhdellä kädellä ja toisella kädellä voidaan tukea potilasta. Tulos on helposti luettavissa näytöltä, ja viisi viimeistä mittausta tallennetaan. Mittatarkkuus +/- 1 astetta. CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan. Sisältää USB-latauskaapelin.



91800



91808

91808 Kulmamittari, Brodin, 31 cm

Muovia, 31 cm pitkä, kaksi vartta ja astelevy.

91811 Kulmamittari, Brodin, 21 cm

Muovia, 21 cm pitkä, kaksi vartta ja astelevy.



91811

9121005 Kulmamittari, taskumalli, 17 cm

Yksinkertainen taskumalli, joustavasta muovista. 17 cm pitkä.



9121005

9121010 Sormikulmamittari

Teräksinen sormikulmamittari. Kaksi vartta, joista toinen pidempi ja astelevy. 15 cm pitkä.



9121010

Refleksivasara

91960 Refleksivasara, "Babinski"

Varsi ruostumatonta terästä, pyöreä kuminen pää, jonka voi asettaa kahteen eri asentoon. Mukana myös tunnontestaus kärki.



91960

Tuntotestaus

91816 Tuntotestauspyörä Wartenberg

Stimuloiva "piikkipyörä" neurologisten tuntopuutosten tutkimiseen.



91816

31279 Kahden pisteen erottelumittari

Kahden pisteen erottelumittarilla testataan potilaan kykyä erottaa iholla kaksi lähellä olevaa kosketuskohtaa erillisinä pisteinä, eikä yhtenä. Mittaus tulisi suorittaa aina potilaan silmien ollessa suljettuina. Ihotuntomittari on valmistettu muovista, ja mittataulukko on painettu alumiinilevylle.



31279

Äänirauta

92850 Äänirauta 256 Hz

Taajuus 256 Hz. Pituus 17,5 cm..



92850

Mittanauha

91807 Mittanauha, muovinen, 150 cm




91807

Liukuesteliina

62000 Liukuesteliina, rulla 40x200 cm

Liinassa on erittäin hyvä tartuntakyky/liukueste-ominaisuus. Leikataan haluttuun kokoon ja voidaan käyttää esineiden alla tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisen pitokyvyn luomiseksi.

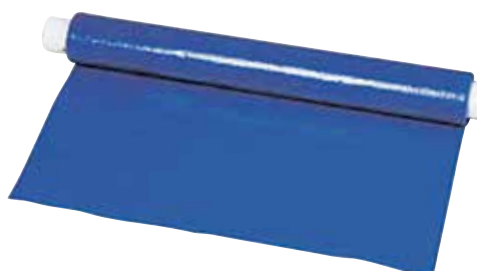

Askelmittari

91870



91870 Askelmittari Walking Style One 2.0

Askelmittari, joka ilmoittaa askelten lukumäärän, kuljetun matkan pituuden sekä kellonajan. Voidaan kiinnittää esimerkiksi vyöhön tai kuljettaa mukana laukussa tai taskussa.

Ajanottokellot

91830 Ajanottokello, analoginen

2REE11 Ajanottokello, digitaalinen

Tyylikkäästi muotoiltu ajanottokello, jossa tärkeimmät perustoiminnot. Tarkkuus 1/100 sek. Loppuaika- ja väliaikanäyttö. Kellonaika, hälytys ja kalenterinäyttö.



91830



2REE11

Peililaatikko

27363 Peililaatikko

Helppokäyttöinen, vakaa ja laadukas peililaatikko, joka näyttää selvästi jalkojen kuormituspinnat vihreällä LED-valolla. Suurin kuormittavuus 135 kg. Koko: 43,5 x 42,5 x 22 cm (PxLxK). Paino 8 kg.



27363

Vaa'at

28007 Digitaalinen vaaka, Seca Robusta 813

Erityissuunniteltu vaaka, jossa luistamaton kumitettu pinta ja matala astinkorkeus. Kapasiteetti 200 kg. Iso näyttö 29 mm numeroilla. Sisältää 4 kpl. paristoja (AAA). Enimmäiskapasiteetti 200 kg. Painon tarkkuus 100 grammaa. Koko: 37 x 43 x 4,7 cm (PxLxK). Paino 2,6 kg. CE-merkintä 89/336/EEG mukaan.



28007

Verenpainemittarit

27077 Medisana BU 530 verenpainemittari

Medisana BU 530 on täysautomaattinen verenpainemittari käsivarteen, joka mittaa systolisen ja diastolisen verenpaineen sekä sykkeen olkavarresta. Suuri ja selkeä LCD-näyttö isoilla numeroilla, näyttää myös päivämäärän ja kellonajan. Sisältää muistitoiminnon 120:lle mittaukselle kahdelle henkilölle ja laskee kolmen viimeisimmän mittauksen keskiarvon. Näyttää rytmihäiriöt. Luokittelee mittaukset liikennevalovärein WHO:n verenpainesuosituksen mukaisesti.



077

Kulutustarvikkeet



Kinesioteippi BalanceTape

BalanceTape-kinesioteipit ovat Lojer Groupin kehittämiä tuotteita, ja ne ovat saaneet paljon kiitosta ammattilaisilta. Teippi on yhtäaikaan sekä tarpeeksi jämää että joustavaa. Jämäkkyyttä tarvitaan asennon korjaamiseen ja joustavuutta siihen, että teipillä ei estetä liikkumiskykyä. Monet kinesioteipit ovat liian joustavia, jolloin asennon korjaaminen on heikkoa.

BalanceTape Sensitive

BT.MS-Beige BalanceTape Sensitive, 6 metriä, beige

Balance Tape Sensitive -teipeissä on käytetty normaalia vähemmän liimaa. Teippiä suositellaan henkilöille, joilla on herkkä iho tai jotka ovat allergisia liimoille / laastarille.



BalanceTape Regular

- BTBeige.XS** BalanceTape, 6 metriä, beige
- BTPink.XS** BalanceTape, 6 metriä, pinkki
- BTRed.XS** BalanceTape, 6 metriä, punainen
- BTYellow.XS** BalanceTape, 6 metriä, keltainen
- BTTurq.XS** BalanceTape, 6 metriä, turkoosi
- BTBlack.XS** BalanceTape, 6 metriä, musta



BalanceTape Regular 32 m

- BTTurq.XS32** BalanceTape, 32 metriä, turkoosi
- BTBlack.XS32** BalanceTape, 32 metriä, musta



Löydät lisätietoa BalanceTape-kinesioteipeistä osoitteessa www.balancetape.com.



Kinesioteipit Meridius

Helpottaa lihaskireyttä, lievittää kipua sekä parantaa lymfaneste- ja verenkiertoa. Teipissä ihonkaltainen elastisuus. Teippi mahdollistaa nivelen täyden liikkuvuuden, sillä teippi venyy 130–140 %. Lateksiton ja hengittävä. Sietää suihkun ja kylpemisen ja pysyy iholla jopa yli viikon. Leveys 5 cm. Useita eri väri vaihtoehtoja.

- 9501 Kinesioteippi Meridius, 5 m, beige
- 9502 Kinesioteippi Meridius, 5 m, musta
- 9503 Kinesioteippi Meridius, 5 m, sininen
- 9504 Kinesioteippi Meridius, 5 m, pinkki
- 9505 Kinesioteippi Meridius, 5 m, keltainen
- 9501-12 Kinesioteippi Meridius, 5 m, 12 kpl lajitelma
- 9511 Kinesioteippi Meridius, 32 m, beige
- 9513 Kinesioteippi Meridius, 32 m, sininen
- 9514 Kinesioteippi Meridius, 32 m, pinkki



9511

Kinesioteipit TheraBand

Thera-Bandin kinesioteippi korjaa kehon lihasjännitystä, lievittää kipua sekä parantaa verenkiertoa. Teipissä on kuvio, joka mahdollistaa oikean venyvyyden: pieni kuusikulmio vastaa 25% venyvyyttä, kun taas suuri kuusikulmio 50% venyvyyttä. Täysin venytettynä teippi kaksinkertaistaa oman pituutensa. Pysyy kiinni ja tarjoaa kestävästi tuen jopa viideksi päiväksi.

- 12926 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, musta
- 12928 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, beige
- 12929 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, sininen
- 12930 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, vaaleanpunainen
- 12932 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, vihreä
- 12923 Kinesioteippi Thera-Band, 31 m, musta
- 12925 Kinesioteippi Thera-Band, 31 m, sininen



12929, 12925

12930

Elastiset siteet

- 9205 Elodur Forte Dauerbinda, leveys 8 cm
- 9206 Elodur Forte Dauerbinda, leveys 10 cm



9205

- 9301 Optiplaste-C elastinen liimaside 6 cm x 2,5 m



9301

Terapiateipit

9401 Urheiluteippi Cramer 1050i

9401-32 Urheiluteippi Cramer 1050i, 32 rullaa

Tunnettu urheiluteippi Cramerilta. Ihoystävällinen ja korkealaatuinen liimapinta takaa erittäin hyvän tartunnan ihoon. 100% puuvillaa. Lateksiton. Pituus 13,7m ja leveys 3,8cm.

9107-1 Urheiluteippi Strappal, 1 rulla

9107 Urheiluteippi Strappal, 24 rullaa

Tunnettu urheiluteippi nivelsiteiden ja lihasvammojen ennaltaehkäisyyn tai kevennys- tai tukisiteeksi. Strappalin liima on iholle hellävarainen. Sillä on korkea tartuntakyky ja teippi on helppo repäistä poikki pituus- ja poikittaissuunnassa. Hengittävä. Lateksiton. Leveys 4 cm ja pituus 10 metriä

9207 Leukotape Classic, 1 rulla

9207-12 Leukotape , Classic, 12 rullaa

Perinteinen vahvasta kankaasta ja hyvällä tarttumiskyvyllä valmistettu urheiluteippi altistuneisiin paikkoihin ja märkiin olosuhteisiin. Käytetään ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa tai tukena urheilussa tai sairaanhoidossa. Helppo katkaista. Materiaali: 100% puuvillaa. Sisältää lateksia. Leveys 3,75 cm. Pituus 10 metriä.

9208 Leukotape P, 1 rulla

9208-6 Leukotape P, 12 rullaa

Erittäin vahva teippi tilanteisiin, joissa tarvitaan lisätukea, kuten urheiluvammoihin. Tavalliset käyttöalueet ovat nilkkojen ja polvien teippaukset. Teippi on helppo katkaista ja siinä on korkea ja pitkäaikainen tarttumiskyky. Valmistettu rayon-kankaasta. Leveys 3,8 cm. Pituus 13,7 metriä.



Tarvikkeet

9209 Teippialusta Hypafix

Hypafix on itsekiinnittyvä, non-woven-laatuinen kangas, jota käytetään teippialustana tai siteiden kiinnitykseen. Muotoutuu helposti kehon ääriviivojen mukaan. Jaettu suojapaperi helpottaa käyttöä. Hengittävä. Lateksiton. Leveys 5 cm. Pituus 10 metriä.

9210 Kiinnityssuihke, teippaukseen

Tensospray - adhesive spray antaa läpinäkyvän ja nopeasti kuivuvan kalvon. Valmistettu ihon suojaamiseksi teippauksen yhteydessä ja teipin tarttumisen parantamiseksi. Suihkuta 5-10 cm etäisyydeltä usea ohut kerros parhaan tuloksen saamiseksi.

Ei saa käyttää vahingoittuneelle iholle. Pullon koko 300 ml.

SAX Teippisakset

Tehokkaat kangassakset. Sopivat sekä oikeaan, että vasempaan käteen. Pehmeä ja ergonominen kädensija on miellyttävän tuntuinen. Lyhyt ja voimakas terä ruostumattomasta teräksestä on erinomainen teipille. Pituus 21cm.



Suojapaperit, rullat

- 11100** Hoitopöytärolla, luonnonvalkoinen, 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.
11107 Hoitopöytärolla, luonnonvalkoinen, 60 cm x 200 m, 2 rll/pak.
11101 Hoitopöytärolla, valkoinen, 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.

Perinteiset paperirullat hoito- tai tutkimuspöydille. Pituus 200 metriä. Myydään pareittain.

- 11104** Hoitopöytärolla, kuitukangas, 50 cm x 200 m
11105 Hoitopöytärolla, kuitukangas, 60 cm x 200 m

Laatupaperirullat kuitukankaasta, kun haluat pehmeän ja miellyttävän paperin. Kuitukangas on erittäin kestävä. Paksuus: 24 g / m². Pituus 200 metriä. Rullia myydään yksittäin.



Suojapaperit, kuitukangasarkit

- 11108** Hoitopöytäpaperi Fine, kuitukangas, valkoinen arkki
11109 Hoitopöytäpaperi Fine, kuitukangas, sininen arkki
11110 Hoitopöytäpaperi Fine Soft, kuitukangas, valkoinen arkki

Kuitukangas on erittäin kestävä, ihoystävällistä ja pehmeää paperia, joka tuntuu asiakkaasta miellyttävältä. Paksuus: Fine 27 g / m² ja Fine Soft 20 g / m². Arkkikoko 60x195 cm. sisältää x-viillon, 200 kpl/ltk.



11108, 11109

Suojapaperit, pääosa

- 11300** Suojaliina, valkoinen

Koko: 49 x 49. 1000 kpl

- 11310** Soft-alusliina kasvoaukolle, pehmeä

Koko 40 x 60 cm. 500 kpl.

- 11301** Kasvoaukon suojaliina, kuitukangas, x-viillolla

- 11303** Kasvoaukon suojaliina, luonnonvalkoinen x-viillolla Koko 35 x 40 cm, 500 kpl.

- 11308** Soft-alusliina kasvoaukolle, pehmeä

Koko 30 x 40 cm. 500 kpl.



11310, 11300

11301, 11303, 11308

Paperirullateline

- 48950** Paperirullateline

Seinään kiinnitettävä. Epoksimaalattu valkoinen. Sopii maksimissaan 60 cm leveälle paperirullalle. Pituus 63 cm.



48950

Desinfiointi- ja puhdistustuotteet

13500 Desinfiointiliinat, 200 kpl

Antibakteeriset ja kuitukankaaiset desinfiointiliinat soveltuvat ammattikäyttöön. Desinfiointiliinoja voidaan käyttää mm. käsien, hoitopöytien pintojen, tynnyjen, harjoittelulaitteiden, ultraääni-antureiden ja paineaaltolaitteiden applikaattoreiden jne. puhdistukseen. Desinfiointiliinat toimitetaan käytännöllisessä purkissa, jossa on x-leikkaus kannessa. Pakkauksessa 200 liinaa ja liinojen koko on 20cm x 20cm.

1310405 Desinfiointiaine DesiPlint, 0,5 litraa

13105 Desinfiointiaine DesiPlint, 5 litraa

Desinfiointiaine DesiPlint on suunniteltu erityisesti hoitopöytiä varten mutta sitä voidaan käyttää myös muihin tuotteisiin. Ei kuivaa verhoilua, koska se ei sisällä alkoholia. Vaikuttava aine on 0,2% klooriheksidiiniä. Tappaa useimmat bakteerit sekä tietyt virukset. Käytetään laimentamattomana.

13213 Lojer käsidesi, 0,5 L pumppupullo

13213-12 Lojer käsidesi, 0,5 L pumppupullo, 12-pack

13213-24 Lojer käsidesi, 0,5 L pumppupullo, 24-pack

Tuhoaa bakteerit 99,99% muutamassa sekunnissa. Lojer käsidesi sisältää 68% etanolia ja se kuivuu nopeasti. Tuote on kosteuttava ja kädet jäävät käytöstä mukavan pehmeiksi.

13200 DesiSkin ihonpuhdistusaine, 0,5 litraa

13202 DesiSkin ihonpuhdistusaine, 5 litraa

Nestemäinen ihonpuhdistusaine jota käytetään laimentamattomana ihon, käsien, pintojen, ruiskujen ja ampullien desinfiointiin. Myös ennen lääkintätoimenpiteitä. Etanolipitoisuus 62%.

Kirurginen kasvomaski

HY99F1 Kirurginen kasvomaski IIR, 50 kpl

Kertakäyttöinen, kuitukankaasta valmistettu 4-kerroksinen CE-merkitty kirurginen kasvomaski (eli kirurginen suu-nenä-suojus). Kasvomaskissa on pehmeät, joustavat ja kestävät korvalenkit sekä muotoiltava nenäavahvike. Suojamaskissa on alhainen hengitysvastus, joten sitä on miellyttävä käyttää. Lojerin jälleenmyymä kirurginen kasvomaski on CE-merkitty lääkinnällinen laite (93/42/ETY) ja se täyttää terveydenhuollon kirurgisen suu-nenäsuojuksen standardin EN 14683:2019+AC:2019 vaatimukset. Roiskesuojattu (malli IIR) suu-nenäsuojus tarjoaa kasvosuojaimista parhaimman suojan partikkeleilta ja sen suodatustehokkuus (BFE) on testatusti yli 98%. Roiskesuojattu malli suojaa henkilöä roiskeilta esimerkiksi toimenpiteiden yhteydessä.



13500

1310405

13105



13213



13213-12



13200



13202



HY99F1



Katso ohjeet oikeaoppiseen kasvomaskin käyttöön verkkokaupassa www.shop.lojer.com

Ystävällinen palvelu, asiantuntemus, laatu ja nopea toimitus

Tilaukset kellon ympäri verkkokaupasta:
www.shop.lojer.com

hinnat | tarjoukset | lisätietoa



Huoltopalvelut

Lojer ja Delta-hoitopöytien ja muiden valmistamiemme laitteiden lakisääteisestä vuosihuollosta sekä korjauksista ja varaosapalvelusta vastaa Lojer Medical Service, jolla on yksiköt Sastamalassa, Hollolassa, Vantaalla ja Kempeleessä.

Varaosat toimitamme suoraan logistiikkakeskuksestamme tai kotimaisten tehtaidemme varastoista arkisin noin vuorokauden sisällä tilauksesta.

Kysy lisää service@lojer.com tai puh. 010 830 6750

Rahoitus

Lojer-rahoituksessa ei ole ylimäärisiä tai kalliita päivävuokria eikä pienellä prääntätyillä avausmaksuja. Maksat vain sovitulta vuokra-ajalta sekä halutessasi lunastuksen yhteydessä kiinteän 30 euron maksun vuokra-ajan jälkeen. Monet rahoitusyhtiöt perivät leasing-sopimuksista normaalisti ns. päivävuokraa, joka voi tarkoittaa jopa 3kk ylimääristä vuokraa.

Lojer-rahoituksen avulla maksat hankintaa kuukausierissä (laskutus 3kk välein), ja vuokra-ajan jälkeen voit lunastaa hankinnan 30 euron hintaan. Voit testata verkkokaupasta löytyvällä laskurilla kuukausierän suuruuden.



Ota yhteyttä huoltoon
service@lojer.com tai
puh. 010 830 6750





Verkkokaupan asiakaspalvelu

Tilaukset ja tiedustelut toimistoaikoina
myynti@lojer.com tai [puh. 010 830 6785](tel:0108306785)

Myynti

Mikko Rajaniemi
Aluemyyntipäällikkö, Fysioterapia & Wellness
[Puh. 010 830 6753](tel:0108306753)
mikko.rajaniemi@lojer.com

Krista Korhonen
Myynti- ja markkinointikoordinaattori
Fysioterapia ja Wellness & kulutustarvikkeet
[Puh. 010 830 6785](tel:0108306785)
krista.korhonen@lojer.com

Lojer shop / noutovarasto

Lojerila on pieni noutovarasto Hollolan
toimipisteen yhteydessä.

[Avoinna ma-to klo 9-14](#)
[Tarmontie 2-4, ovi 1, 15860 Hollola](#)

Tuotteina löytyy mm. hierontapöydän paperia,
öljyä, rasvaa, desinfointiaineita, kinesioteippejä
ja akupunktioneuloja. Valikoima on rajallinen ja
saatavuuden voi varmistaa etukäteen.

Lojer Oy toimitusehdot

Tämän tuotekuvaston tuotteet ovat myynnissä Suomessa sekä yksityisille henkilöille että yrityksille. ajantasaiset tuotteiden hinnat löydät kätevimmin vierailemalla kotisivuillamme verkkokaupassamme www.shop.lojer.com. Lisäksi voitte ottaa yhteyden asiakaspalveluumme. Voitte jättää myös yhteydenotto-pyyntö, niin me otamme yhteyttä teihin.

HINNAT:

Hinnat ovat ilmoitettu euroina, ja niihin lisätään arvonlisävero 24 %. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

MAKSUEHTO:

Verkkokaupassa maksaminen tapahtuu pankki- ja luottokorteilla. Mikäli asiakkaalle on myönnetty luottotili, verkkokaupan maksuehto yritysasiakkaille on 14 pv netto. Tavarantoimitus siirtyy asiakkaalle vasta kun lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

TOIMITUSTAPA PAKETEILLE:

Nouto Postista (postipaketti)

Vastaanottaja saa saapumisilmoituksen tekstiviestillä, sähköpostilla ja Postin mobiilisovelluksella, mikäli se on vastaanottajalla käytössä. Tietojen puuttuessa toimitetaan paperinen ilmoitus vain Postin toimipisteistä noudettaville lähetyksille. Pakettia säilytetään 7 vrk, noutamattomat lähetykset palautetaan lähettäjälle.

Posti Express -paketti (ensisijaisesti yrityksille)

Lähetys jaetaan osoitekorttiin merkittyyn osoitteeseen ja luovutetaan kuittausta vastaan. Palveluun kuuluu yksi jakeluyritys. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta hänelle jätetään saapumisilmoitus ja lähetys toimitetaan vastaanottajan lähipostiin noudettavaksi. Lähetys palautetaan lähettäjälle jos sitä ei noudeta säilytysajan päätyttyä.

Toimitus ovelle sovitusti (kotipaketti)

Posti on yhteydessä vastaanottajaan pääsääntöisesti edellisenä työpäivänä sopiakseen jakeluajankohdan. Posti on maksimissaan kaksi kertaa yhteydessä vastaanottajaan. Sovittavat toimitusajat vaihtelevat alueittain klo 9-21 välillä. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, hänelle jätetään yhteydenotto-pyyntö ja jos ei

vastaanottaja ei ole yhteydessä lähetys palautetaan lähettäjälle 7 vuorokauden kuluessa.

Painavammat ja isommat tilaukset (esim. hoitopöytä tai yli 20 rullan paperitilaukset) toimitetaan Postin rahdilla tai Lojerin omalla autolla. Sisäänkantopalvelu lisämaksusta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Verkkokaupan tilauksia toimitamme vain Suomeen.

RAHTIMAKSUT VERKKOKAUPPA:

Lojer Shop -verkkokaupan toimituskulut riippuvat siitä, mihin rahtiluokkaan tuote kuuluu. Rahtiluokkia on 8 ja niihin liittyvät toimituskulut on esitetty seuraavassa taulukossa (hinnat alv0%):

Rahtiluokka KIRJE = 4,90 euroa

Rahtiluokka A = 7,90 euroa

Rahtiluokka B = 9,90 euroa

Rahtiluokka C = 12,90 euroa

Rahtiluokka D = 19,90 euroa

Rahtiluokka E = 49,90 euroa

Rahtiluokka F = 66,00 euroa

Rahtiluokka G = 119,00 euroa

Jokaisen tuotteen tuotesivulla näet mihin rahtiluokkaan tuote kuuluu. Jos ostat usean eri rahtiluokan tuotteita, maksat vain korkeimman rahtiluokan toimituskulut. Luonnollisesti maksat vain yhden toimituskulut riippumatta tilaamiesi tuotteiden määrästä tai vaikka tilaus jaettaisiin useaan eri toimitukseen. Toimituskulut lasketaan automaattisesti mukaan tilaukseen. Toimituskulujen lisäksi tilaukselle ei tule muita kuluja.

TOIMITUSAIKA:

Varastotuotteille kaupungeissa 2-3 päivää ja haja-asutusalueilla 3-5 pv. Investointihyödykkeiden osalta toimitusaika vaihtelee tuotekohtaisesti, tarkat tiedot saat asiakaspalvelustamme.

TAKUU:

Kaikilla tuotteillamme on kuluttajan-suojalain mukainen vähintään kuuden kuukauden takuu. Takuu on myyjän tai aikaisemman myyntiporaan vapaaehtoisesti antama lisäsitoumus. Takuu kattaa valmistus- ja raaka-ainevirheet, mutta

ei mm. väärinkäyttöä tai kulumisesta johtuvaa vikaantumista. Tarkan lojerin, maahantuojan tai valmistajan tarjoaman takuuajan näet tuotteen pakkauksesta tai käyttöohjeista. Lojer oy:n ja muiden lojer Groupin yhtiöiden itse valmistamilla tuotteilla on rajoitettu 24 kk takuu valmistus- ja raaka-ainevirheille, ja 10 v takuu runkorakenteille.

MUUT SOPIMUSEHDOT:

Noudatamme toimituksissamme yleisiä kotimaisia sopimusehtoja n101. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TILAAJAVASTUU

Lojer on myös sitoutunut hoitamaan kaikki yhteiskunnalliset vastuunsa täsmällisesti ja on tilaajavastuun mukainen Luotettava Kumppani. Yhtiön tiedot ovat tarkastettavissa tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Aakkosellinen hakemisto

Airex-tuotteet 48, 75, 76	Juoksumatot 38	Paperituotteet 90
Akupunktiotulotteet 65	Kahvakuulat 53	Parafiiniallas 72
Akupunktionastat 66	Kannettava hoitopöytä 17	Parafiinit 72
Akupunktiotulotteet 62-66	Kasvoaukon pehmusteet 17	Passiivinen polven hoito 32, 33
Akupunktionuket ja -mallit 64	Kasvomaski 91	PBU Biofeedback 46
Akupunktiotulotteet 67	Kauneudenhoitotuoli 19	Peililaatikko 86
Alasvetolaitteet 21, 22	Kiilattynyt 78	Pehmusteet 17
AlterG-juoksumatot 39, 40	Kinesioteipit 87, 88	Pilatesmatto 76
Anatomian oppaat ja julisteet 82	Kippilauta 16	Pilatesrulla 46
Anatomiset mallit 64	Korva-akupunktio 66	Plintit 6-14
Askelmittari 85	Korvanastat 66	Powerband 44
	Kuitukangasarkit ja -rullat 90	Psoas-tyynyt 78
BalanceTape 87	Kuivaneulaus 64	Puhdistustuotteet 91
Biofeedback 46	Kulmamittarit 84	Pulley 21-23
Blackroll 69	Kuminauhat 42-44	Puolapuut 24
Bobath-pöydät 15	Kuntopyörät 34, 37	Puristusvoimamittarit 83, 84
Bobathrullat 78	Kuulalaastarit 66	Pyöreät tyynyt 78
Bodytrainer 45	Kylmäpakkaukset 73	Pyörät 34, 37
Bosu 48	Kylmätuotteet 73	
	Kylmävoiteet 73	Radiaaliset painealtolaitteet 55, 56
Capre-hoitopöydät 8-11	Käsidynamometrit 83, 84	Refleksivasara 85
Challenge disc 47	Käsien harjoituspallo 45	Restoraattorit 33
CLX-kuminauhat 43	Käsi painot 53	
CPM polvihoito 32	Kävelysauvat 50	Sakset 89
Crosstrainer 38		Satulatuolit 18
		Seirin 65, 66
Decline Incline -lauta 49	Laitepöytä 59	Shockwave painealtolaitteet 55-57
Delta-hoitopöydät 12-14	Leukotape 89	Soutulaitteet 36
Desinfiointi- ja puhdistustuotteet 91	Levytanko ja -painot 54	Speed Pulley 21
Droppilevyt 76	Lihasmallit 81	Steppilauta 49
Dry needling -akupunktiotulotteet 64	Liukuesteliina 85	Storz 55-58
Dynamometrit 83, 84	Loops 43, 44	Suojapaperit 90
	Luuranko 79	Suu-nenä-suojus 91
EasyAngle 84	Lämpöpakkaukset 71, 72	Sykevyö 35
EasyForce 83	Lääkinnällinen harjoitusterapia 21-23	Sähkölaitteet 59, 60, 61
Elastiset siteet 88	Magnetolith 58	
	Magneettiterapia 58	Tasapainolaudat 47
Ergo-Fit Vector Line 25-27	Manuped 33	Tasapainotyynyt 47, 48
Faskaavaha 69	Manuthera -hoitopöytä 6, 7	Teipit 87, 88, 89
Fiksaatiovyöt 77	Masterpuls painealtohoitolaitteet 55-56	Tens/Tems-laitteet 61
Flexible Exercise Bars 45	Matkahoito- / hierontapöytä 17	Terapeuttinen ultraääni 60
Flowin liukumatto 49	Matot 75, 76	TheraBand-tuotteet 42-45, 88
Fokusoitdut painealtolaitteet 57	Mattojen säilytys 76	Tilttipöydät 16
Functional Trainer 50	Medicin pallot 51	Trappoliini 49
Fysioterapiapöytä 24	MicroFet2 83	Treenilaitteet 25-31
	Mittanauha 85	Treenipenkki 24
Goniometrit 84	Mittausvälineet 83-84	Trikkeripistejulistet 82
	Mobilisointikiilat 76	Tuntotestaus 85
Harjoituslaitteet 21-31	Monark-pyörät 34-35	Tuolit ja jakkarat 18
Harjoituspuut 44, 45	Motion Guidance 46	Tyynyt 78
Hegu-akupunktiotulotteet 62-66	Myrin goniometri 84	Työtuolit 18
Hierontapöydät 68, 12-13		
Hierontarasvat ja -voiteet 70	Neulastimulaattorit 67	Ultraäänigeeli 60
Hierontatuotteet 68-73	Niskatraktio 76	Ultraäänilaitteet 59, 60
Hierontaöljyt 69, 70	Nylatex-nauhat 73	Urheiluteipit 89
Hihnat alasvetolaitteisiin 23	Nystyräpallot 51	Urias-ilmalastat 77
Hoitopöydät 6-14		
Hygieniatyynyt 17	Olkavetolaitteet 46	Vaaka 86
Hyppynaru 49		Vastuskuminauhat 42-44
	Painealtohoitolaitteet 55-57	Venytteymatot 75, 76
Ilmalastat 77	Painojen säilytys 54	Verenpainemittari 86
ITO 59, 60	Painomansetit 52	Verhoilun värikartta 5
Ivo Trainer 23	Painovoimakennetty juoksumatot 39-40	Vigorimittari 83
	Pallojen säilytys 52	Voimistelupallot 51
Jakkarat 18	Pallopumppu 52	Värikartta verhoilu 5
Joogamatot 76	Pallot 45, 50, 51	
Julisteet 82	Paperirullatelineet 11, 14, 90	Äänirauta 85
Jumppapallot 50		



Tilaukset kellon ympäri verkkokaupasta:

www.shop.lojer.com

Hinnat | Tarjoukset | Lisätietoa

Lojer Oy
PL 54
38201 Sastamala

Puh. 010 830 6785

myynti@lojer.com
www.lojer.com

LOJER® **100**
Since 1919