

Storz Medical

Trykk-/sjokkbølgeutstyr



Trykk-/sjokkbølgeterapi er en veletablert behandlingsmetode som får mer og mer aksept. I dag er behandlingsmetoden et verdifullt verktøy for mange leger og terapeuter i deres søken etter å hjelpe sine pasienter med å oppnå smertelindring og gjenopprettet funksjon.

Trykk-/sjokkbølgebehandling brukes med suksess på pasienter med utfordrende plager i sener, muskler og senefester. Samtidig som flere og flere har lagt merke til de positive effektene av behandlingsformen, har nivået av klinisk evidens økt etter hvert som flere og veldesignede studier har blitt publisert.

Fysiopartner tilbyr trykk-/sjokkbølgeapparater fra Storz Medical, markedsledende produsent av denne type utstyr for muskelskjelett, urologi, kardiologi og nevrologi. Storz Medical har med suksess utviklet teknologien og bidrar til forskning på disse områdene gjennom samarbeid med ledende medisinske institusjoner.



Masterpuls MP100 Ultra

- Avansert radiell trykkbølge

Ved behandling av muskel og senelidelser, er radiell trykkbølge teknikk (rESWT) mest vanlig. En luftkompressor akselererer en «kule» i håndpistolen og trykkbølger oppstår når kule treffer applikator.

Masterpuls Ultra setter en helt ny standard innen radiell trykkbølgeterapi. Enhetene har høy ytelse, stilig og prisvinnende design og er produsert i Sveits. Trykk (Bar) og frekvens (Hz) styres direkte fra den ergonomiske og brukervennlige håndpistolen, og som gjør behandlingen enkel og mer effektiv.

Display viser også antall slag under behandlingen. Den kraftige pneumatiske kompressoren er lydløs og integrert i enheten, noe som gjør den kompakt og fleksibel.

Kompletter gjerne med mye tilgjengelig tilbehør:

Apparatbord, touchscreen, flere varianter av applikatorer eller spesialapplikatorer for fascia og ryggrad, V-Actor vibrasjonsenhet og transportkoffert.



MASTERPULS MP 100 ULTRA:

- Trykk: 1-5 bar (12 Hz/5,0 bar, 16 Hz/4,5 bar, 21 Hz/4 bar)
- Frekvens: 0-21 Hz
- 3 applikatorer inkludert: R15 Standard, DI15 Gold dybde og D20-S Standard Oscillator
- Et ekstra revisjonssett er inkludert



Et utvalg tilbehør til Masterpuls MP100 Ultra



TOUCH SCREEN

Kompletter enheten med en 10-tommers berørings skjerm. Fra den kan du styre behandlingen, se behandlingsguide/vanlige indikasjoner og bruke anatomisk atlas.

APPARATBORD

Et meget stabilt bord med fire store låsbare hjul som letter bevegelse i rommet eller mellom ulike rom på klinikken



V-ACTOR VIBRASJONSENHET

Kompletter trykkbølgebehandlingen med denne effektive vibrasjonsenheten for dyp massasje av bløtvev.



FASCIA APPLIKATOR SETT

Unikt Fascia sett som inneholder 4 forskjellige applikatorer for behandling av fascien.

TRANSPORTKOFFERT

Vi kan tilby både myke og harde løsninger for de som vil transportere enheten.



SPINE APPLIKATOR SETT

Unikt Spine sett som inneholder 3 forskjellige applikatorer for mobilisering og bløtvevsbehandling av rygg



Masterpuls One

- Radiell trykkbølge

Et helt nytt radielt trykkbølgeapparat utviklet med fokus på brukervennlighet, mobilitet, design og en attraktiv pris.

Masterpuls One er en perfekt startmodell som er enkel å bruke til behandling av de vanligste indikasjonene. Det er også et utmerket alternativ som en andre eller tredje enhet på klinikken eller når en bærbar trykkbølgeenhet ønskes.

Apparatet har et kompakt design med bærehåndtak, som gjør den perfekt å ta med seg til en annen klinikk, idrettslag eller bedrift. Håndenheten er brukervennlig takket være lav vekt og funksjonell design. Kan suppleres med flertall applikatorer for ulike behandlingsindikasjoner.




Perfekt startmodell

MASTERPULS ONE:

- 6 behandlingsmoduser: Frekvens 6-18 Hz / Maks trykk 2,7 Bar
- 2 applikatorer inkludert: R15 Standard og D20-S Standard Oscillator
- Et ekstra revisjonssett er inkludert



Applikatorer til Masterpuls One

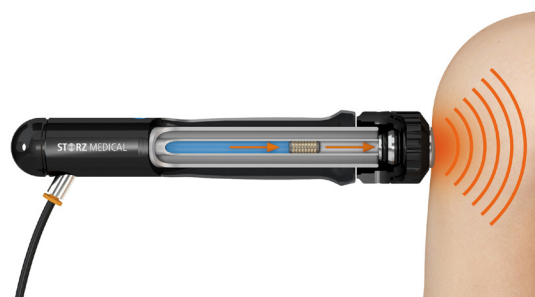



Fokusert sjokkbølgeutstyr – Duolith SD1 T-Top Ultra

Duolith SD1 T-Top Ultra er et innovativt fokusert sjokkbølgeapparat (fEWST). Storz har en patentert teknologi der en elektromagnetisk coil avgir høy energi. Det fokuserte behandlingen gjør det lettere og mer presist å tilføre høy energi. Behandlingsdybde kan justeres ved å bruke ulike gel pads.

Både energi og frekvens styres direkte fra den nye håndhøsten «Sepia», noe som gjør behandlingen enkel og mer effektiv, men fremfor alt svært brukervennlig for terapeuten. Den viser energi, frekvens og antall slag.



DUOLITH SD-1 T-TOP ULTRA:

- Energi: 0,01–0,55 mJ/mm²
- Frekvens: 1–8 Hz
- Fokuseffekt: 0–65 mm og terapeutisk effekt: 0–125 mm

Kjøp av en sjokkbølgeenhet inkluderer:

- Produktgjennomgang
- En FRI kursplass til trykkbølge grunnkurs
- FRI tilgang til www.shockwaveportal.com med indikasjoner, forskning, markedsmateriell, teknisk info mm