

LOJER[®]

SJUKHUS- OCH VÅRDPRODUKTER



För mer information besök oss på medema.se eller ring 08-404 1200

MEDEMA[®] *Carefully chosen*



ANTIMIKROBIELLA PRODUKTER

Lojers antimikrobiella produktsortiment har tagits fram för att förhindra spridning av mikroorganismer, som exempelvis bakterier, virus, svampar och mögel, som sprids från person till person via beröringsytor. Det är därför vi har lagt särskild vikt vid särskilt utsatta ytor vid utformningen av våra produkter. Vi strävar efter att skapa lösningar för att upprätthålla en extremt hög hygiennivå. Antimikrobiella lösningar och nya material minskar risken för infektion och ökar säkerheten för både patienter och vårdpersonal.

Antimikrobiell klädsel

Den nya klädseln FUTURE är miljövänlig och brandsäkerhetstestad. Dess antibakteriella, antimikrobiella och mögelsäkra egenskaper gör FUTURE till ett idealiskt material för särskilt utsatta miljöer. Tester visar att klädselmaterialet effektivt eliminerar och reducerar virus. Redan inom en timme efter kontakt med materialet hade virustillväxten minskat med nästan 93 procent och på 90 minuter med mer än 95 procent. Dessutom visade testerna att virusaktiviteten minskade med upp till 99,9 procent på 24 timmar efter kontakt med materialet. Den avancerade beläggningstekniken förblir på klädselns yta och förhindrar även bakterietillväxt. Beläggningen slits inte ut vid rengöring.

Lojers nya antimikrobiella klädsel FUTURE, använder en beläggningsteknik som har beviljats de internationella certifieringarna ISO 18184, ISO 21702 och ISO 22196. Dessa certifikat mäter exempelvis textil- ens och plastens förmåga att eliminera virus eller förhindra dess tillväxt.

Beröringsfria justeringar

Höjdjusteringen av exempelvis behandlings- och undersökningsbriter kan justeras med fotkontroll eller fotstänger. På undersökningsbriter justeras både höjd och baksektion med fotkontrollen eller med de tvådelade

fotstängerna, allt för att minimera och undvika manuella justeringar. Ingen extra tid går till att byta handskar eller desinficera händer. Ur säkerhetssynpunkt finns inga överflödiga kablar på golvet då de tvådelade fotstängerna placeras i ramen på briterns båda sidor.

Antimikrobiell pulverlackering

Särskilt utsatta ramkonstruktioner och metalldelar är belagda med antimikrobiell pulverlack, som är slitstark och rostfri. Rengörbarhet, design och materialval beaktas noggrant och ger tillsammans med antimikrobiell beläggning mer hygieniska ytor.

Koppar och kopparlegeringar

Koppar är känt för att vara det mest effektiva antimikrobiella materialet som naturligt hindrar mikroorganismer från att växa och sprida sig. Kopparns antimikrobiella effektivitet är godkänd och verifierad av US Environmental Protection Agency (EPA). Detta inkluderar även metallblandningar med en kopparhalt på över 60%. 99,99% av bakterierna försvinner inom två timmar efter beröring av ytan. De antimikrobiella egenskaperna slits inte ut eller försvinner vid användning, och ytbehandlingen av kopparn påverkar inte dess antimikrobiella effekt. Produkter som innehåller koppar är säkra för människor och miljö och är helt återvinningsbara.

Antimikrobiellt laminat

Lojers antimikrobiella produkter med laminat använder högtryckslaminat med en ogenomtränglig yta. Underhåll och rengöring är enkelt och produkterna är maskintvättbara. Antimikrobiellt laminat används även i produkter som kräver en hög hygiennivå där det finns hög risk för att infektioner sprids via materialet.

Fråga mer om våra antimikrobiella produkter!

INNEHÅLL

2	Antimikrobiella produkter
4	LOJER Group
5	Medema Service
6 – 7	Klädselmaterial och färger

8	SJUKHUSSÄNGAR
10 – 11	Maskintvättbar Scanafia X ICU W Sjukhussäng
12 – 13	ScanAfia X ICU Sjukhussäng
14 – 15	Scanafia XS Patientsäng
16 – 17	Carena Sjukhussäng
18 – 19	Futura Plus Sjukhussäng
20	Tillbehör för sjukhussängar

21	HYDRAULISKA PATIENTVAGNAR
22 – 23	Emergo Patientvagn

25	UNDERSÖKNINGSBriter/SOLAR
26 – 27	4040X Undersökningsbriter
28 – 29	4040XL Undersökningsbriter
30 – 31	4050X Gynekologisk undersökningsbriter

32	BEHANDLINGSSTOLAR/MEDICINSKA STOLAR
32 – 33	Capre MC
34 – 35	Capre RC

37	OPERATIONSBORD
38 – 39	Scandia SC440 Prime Operationsbord
40 – 41	Scandia SC330 Operationsbord

42	TILLBEHÖR OPERATIONSBORD
-----------	---------------------------------

44	SJUKHUSVAGNAR INSTRUMENT- OCH SERVICEVAGNAR
-----------	--

48	PATIENT- OCH SÄNGBORD
-----------	------------------------------

50	MADRASSER
-----------	------------------

54	STOLAR OCH PALLAR
-----------	--------------------------



Skandinaviens största tillverkare av sjukhus- och vårdprodukter

Lojer Group är den största tillverkaren av medicinska möbler i Skandinavien. Företaget är över 100 år och är fortfarande privatägt. Sammanlagt har Lojer Group 180 anställda i fyra länder och dess årliga omsättning är över 40 miljoner euro, 60% av omsättningen kommer från exportverksamhet.

Finsk tillverkning av högsta kvalitet

Lojer har eget gjuteri och använder sig av den senaste tekniken som datorstyrd laserskärning, robotsvetsning och automatiska målningslinjer. Lojerprodukterna består till 80% av material och komponenter som köps in från inhemska och närliggande leverantörer.

Mindre koldioxidavtryck

Lojer arbetar aktivt för att minska företagets miljöpåverkan och koldioxidavtryck. Materialåtervinning beaktas redan när produkter designas och tillverkas. Tillverkning och lager har centraliserats till Sastamala-fabriken och antalet leverantörer är begränsade, vilket minskar transporter relaterade till materialinköp och leveranser.

Kvalitetssystem

Lojer var den första nordiska tillverkaren av sjukhusutrustning som blev ISO 9001-certifierad redan 1994. År 2020 utvidgades kvalitetssystemet till att även omfatta produktionen i Kempele-anläggningen. Lojer har ett certifierat kvalitetshanteringssystem för medicintekniska produkter, ISO 13485. Alla medicinska möbler är CE-märkta enligt EU:s direktiv om medicintekniska produkter och internationella lagar och är designade och testade enligt EU:s standarder för medicintekniska produkter, där det är tillämpligt. Lojer testar regelbundet sina produkter i det oberoende finska tekniska forskningscentret VTT:s medicintekniska laboratorier. Företaget utvecklar kontinuerligt sina processer och deras effektivitet utvärderas kontinuerligt.

Miljöcertifierade anläggningar

Att värna om miljön har varit en daglig del av Lojers verksamhet i årtionden, och företaget har åtagit sig att ständigt utveckla sin miljöpolicy. Produktionsanläggningen i Hollola har en ISO 14001-miljöcertifiering som täcker produktutveckling, inköp, tillverkning, förpackning och leverans.



MEDEMA SERVICE



Reservdelar

Vår ambition är att tillhandahålla reservdelar för produkter vi har sålt i minst 10 år. De vanligaste reservdelarna lagerförs på vårt reservdelslager i Kista för omgående leverans.



Service Center

Vårt team av servicekoordinatorer är alltid redo att hjälpa dig med rådgivning eller att välja rätt reservdelar. Det bästa sättet att nå oss är via e-post eller genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Normalt sett så svarar vi inom 24 timmar.



Serviceavtal

Med ett serviceavtal från Medema kan ni alltid vara säkra på att er utrustning underhålls i enlighet med tillverkarens specifikationer och därmed undvika driftstopp och dyra akutreparationer. Tillsammans med er går vi igenom utrustningen och ert behov av förebyggande underhåll och ni får ett fast pris. Därefter planerar vi in arbetet och ger er 3 månaders garanti på utförd service. Som avtalskund har ni även rabatt på vårt övriga servicesortiment, som reservdelar och reparationer.



Digital serviceportal EasyCare

Easy Care System är vår egenutvecklade digitala portal för att hantera produkter. Systemet är webbaserat och kan användas på dator, mobil eller surfplatta. Genom att skanna våra NFC/QR-taggar så får ni direkt tillgång till servicehistorik, servicemanualer, sprängskisser och även möjlighet att beställa service/reservdelar på vald produkt.

Kontakt:

Fyll i formuläret på medema.se under felanmälan eller skicka e-post på: service@medema.se. Du kan även ringa oss på 08-4041200 under ordinarie kontorstid.



LOJER 100 Since 1919

KLÄDSELMATERIAL OCH FÄRGER

Future

Den nya Futureklädseln med en pärlmoraktig yta består av ett miljövänligt och brandsäkerhetstestat material. Dess antibakteriella, antimikrobiella och mögelsäkra egenskaper gör Future till ett idealiskt material för krävande miljöer, då det förhindrar tillväxt av bakterier, vilket förlänger livslängden för de stoppade delarna. Materialet har en avancerad beläggningsteknik som inte slits ut vid rengöring.

Det extremt slitstarka materialet är 3 till 6 gånger mer hållbart än traditionella konstlädermaterial (över 300 000 Martindale) och mycket motståndskraftigt mot sprickbildning och slitage. Det är också vattentätt och skyddat mot blekning.

Ytbeläggningen, hållbarheten och kapaciteten hos klädselmaterialet Future har utformats speciellt för vårdindustrin, där bakterier, slitage och fläckar är särskilt utmanande. Materialet är lätt att rengöra och kan rengöras ofta. Det uppfyller kraven enligt REACH, vilket betyder att hälso- och miljöskyddet är av största vikt. Materialsammansättning: Ovansida 81% vinyl och baksida 19% polyester.

Nature

Med hållbar och hög kvalitet representerar Nature en ny generation av miljövänliga material. Nature-klädseln följer Oeko-Tex-standard och innehåller därför inga tungmetaller eller ftalater. Tack vare sin biokompatibilitet (EN ISO 10993-5 + 10) är materialet säkert för huden. Känslan hos Nature är bekväm och känns varmare mot huden än vanligt konstläder. Det är särskilt lämpligt för medicinska och fysioterapeutiska produkter. Materialsammansättning: ca 50% förnybara råvaror, ca 30% naturbaserade råvaror och ca 20% råvara baserad på råolja.

Skai Conductive

Skai Conductive är ett läderliknande material av hög kvalitet. Både utseende och känsla imiterar äkta läder. Materialet är antistatiskt och rekommenderas därför starkt för medicinska tillämpningar där elektrostatisk urladdning måste undvikas, t. ex. speciella undersökningar relaterade till hjärtat. Materialsammansättning: 90% PVC-förening och ca. 10% CO / PES-stickat tyg.



Future

Standard: Silver

Standard: Falls

Standard: Tomato

Standard: Beach

Carbon

Space

Pearl

Titanium

Onyx

Sapphire

Lagoon

Pistachio

Plum

Sunrise

Nature

Night

Sea

Stone

Haze

Sand

Skai Conductive

Mano

																		
Material/ Specifikation	Motståndskraftig/ resistent mot olja och fett	Antibakteriell	Motståndskraftig/ resistent mot desinfektionsmedel (enligt en separat lista)	Biokompatibel	Vattentät	Motsår sekret	Flamtålig	Motståndskraftig mot nötning	Ikke känslig mot blekning från ljus	Slitstark	Hållbar	Enkel att rengöra	Antistatisk	Antimikrobiell	Uppfyller Oeko- Tex 100 standard	Miljövänlig	Uppfyller REACH-krav	Uppfyller Europeiska standarden för leksaker DIN EN 71-3
Future	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x
Nature			x	x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
skai Conductive			x						x	x	x	x	x				x	



SJUKHUSSÄNGAR

Lojers sjukhussängar har utvecklats för att förbättra patientkomforten på sjukhus och privata kliniker. De finstillverkade sängarna är kända för sitt stabila och ergonomiska utförande och har utvecklats i samarbete med personal inom intensivvården.

MASKINTVÄTTBAR SCANAFIA X ICU W SJUKHUSSÄNG

SJUKHUSSÄNGAR

Maskintvättbar säng med hållbara egenskaper

Den maskintvättbara sjukhussängen ScanAfia X ICU W är ett tryggt val för sjukhusets samtliga vårdavdelningar. Via kontrollpanelen sköts alla inställningar som Trendelenburg-, CPR- och Hjärtpositioner helt elektroniskt. Vidare är det möjligt för vårdpersonalen att låsa sängfunktionerna för patienten. Trots att sängen klarar en belastning på upp till 340 kg, är ScanAfia X ICU W smidig att hantera tack vare dubbelhjulen på 150mm. Ramen tillverkas i elektro-polerat, rostfritt stål (AISI 304) vilket ger en slitstark säng med god hållbarhet.

Den elektrolytiska poleringen jämnar ut mikroskopiska ojämnheter på ramen, vilket gör sängen lätt att underhålla och rengöra. Samtidigt förbättras korrosionsbeständigheten i stålet och sängens livslängd förlängs. Kirurgiska instrument tillverkas exempelvis med denna teknik. ScanAfia X ICU W uppfyller samtliga krav i standarden EN 60601-2-52, inklusive maskintvätt, samt rekommendationerna för maskintvättbar utrustning i AK-BWA. Dessutom försäkras kompatibilitet med spoldesinfektorer enligt ISO 15883. Motorerna har kapslingsklass IPX6 Washable.

Finns med elektrolytisk rostfri stålram (tillval) eller med lackerad ram och polerade sidogrindar och sänggavlar.



Produkten i bild är tilläggsutrustad.

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



Huvudegenskaper:

- 1 Sängram i elektrolytisk, rostfritt stål (AISI 304) designad för exceptionellt lång livslängd (tillval).
- 2 Uppfyller samtliga krav i standarden EN 60601-2-52 inklusive maskintvätt.
- 3 Elektroniska inställningar för Trendelenburg-, CPR- och Hjärtpositioner.

Tekniska specifikationer




Fabriksmonterade tillval:

- Sängram i elektrolytisk, rostfritt stål (AISI 304)
- Droppställning för fotändan
- 5:e hjul för enklare manövrering

Övriga tillbehör:

- Dävert (maskintvättbar)
- Droppställning (maskintvättbar)
- Extra hög grind (maskintvättbar)
- Urinpåshållare (maskintvättbar)
- Uppresningsstöd
- Läs- och matbricka ovanpå sidogrind
- Vikbar fotgavel
- Extra hög sänggavel
- Flertalet olika madrasser (rekommenderad storlek 78/88 x 205 x 13 cm)

Dimensioner och inställningar:

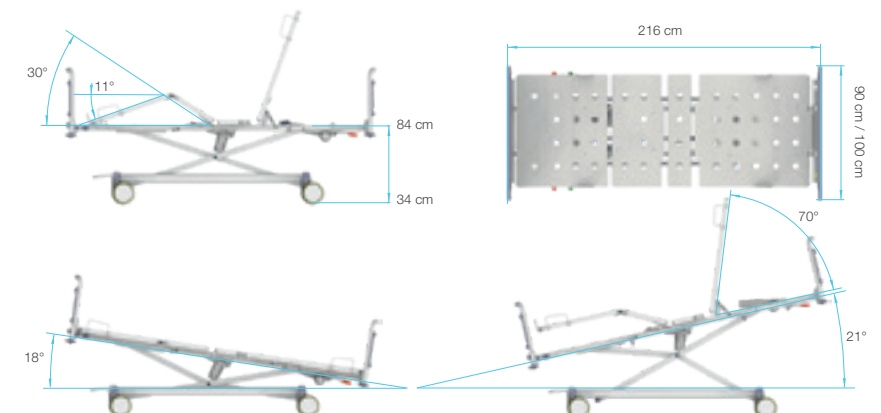

SCANAFIA X ICU SJUKHUSSÄNG

SJUKHUSSÄNGAR

En mångsidig låg sjukhussäng med unika egenskaper

Kvalitetssängen ScanAfia X ICU är ett tryggt val för sjukhusets alla olika vårdavdelningar. Sängen är standardutrustad med sjuksköterskepanel, handkontroll, manuell och elektrisk CPR-funktion samt batteribackup. Sängens ryggstöd är aktivt, vilket innebär att vid höjning av sängens ryggstöd, lyfts det uppåt/bakåt vilket lindrar skjuveffekten. ScanAfia är designad för att möta dagens höga krav på hygien med släta och rena ytor som underlättar rengöring och desinficering.

Trots säker arbetsbelastning (SWL) på 340 kg är ScanAfia X ICU ändå lätt att manövrera tack vare de två dubbla hjulen på 150 mm. Ett stort höjdomfång 34-84 cm underlättar arbetet för personalen, samtidigt som det blir lättare för patienterna att ta sig i och ur sängen. Sängen är tillverkad för långvarig användning med låga livscykelkostnader. ScanAfia X ICU uppfyller kraven i EN 60601-2-52-standarden för medicinska sängar.


Hög belastningskapacitet (SWL) på 340 kg
förbättrar patientsäkerheten



Huvudegenskaper:

- 1 Mycket hög Safe Working Load (SWL) på 340 kg.
- 2 Lätt att manövrera tack vare stora 150 mm dubbelhjul.
- 3 Upp till 20° anti-Trendelenburg-justering för effektivt hjärtläge.

Tekniska specifikationer

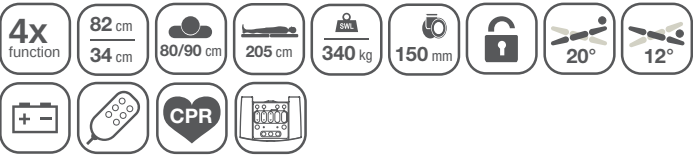


Fabriksmonterade tillval:

- 5:e hjul för enklare manövrering

Övriga tillbehör:

- Dävert
- Uppresningsstöd
- Droppställning med enhands snabbjustering
- Speciallängd (utdragbar +15 cm) modell
- Extra höga sidogrindar
- Sänggavel, vikbar - fungerar som hjälpnivå för sänglinne.
- Urinpåshållare
- Läs- och matbricka ovanpå sidogrind
- Huvudgavel
- Monitorbord
- Flexibel handkontrollshållare
- Flertalet olika madrasser (rekommenderad storlek 78/88 x 205 x 13 cm)

Dimensioner och inställningar

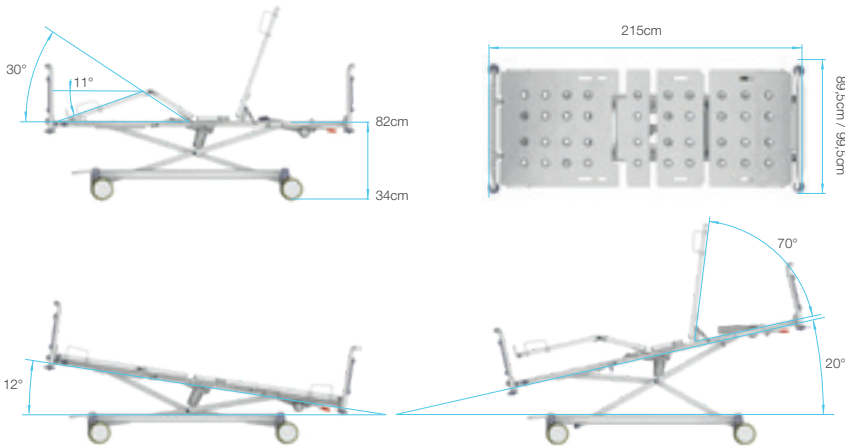

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



SCANAFIA XS PATIENTSÄNG

SJUKHUSSÄNGAR

Patenterad säng med bra ergonomi och god patientkomfort

Den patenterade patientsängen ScanAfia XS har utformats för sjukhus, vårdcentraler och privata kliniker med särskild tanke på vårdpersonalens behov. Designen lägger vikt både på bra ergonomi för vårdpersonalen och god patientkomfort. Den bakre sektionens glidmekanism förhindrar att patienten glider ner till sängens fotända.

Sängens exceptionella höjdjusteringsområde gör den säkrare och bekvämare för vårdpersonal och för patienter att komma i och ur sängen. ScanAfia XS uppfyller kraven i EN 60601-2-52-standarden för medicinska sängar.

Utmärkt patientkomfort, enkel att manövrera och justera



Produkten i bild är tilläggsutrustad.

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



Huvudegenskaper:

- 1 Ergonomisk arbetsställning tack vare imponerande höjdjusteringsområde.
- 2 Maximal belastning (SWL) 260 kg.
- 3 Enkel att manövrera tack vare dubbelhjul (tillval).

Tekniska specifikationer




Fabriksmonterade tillval:

- Batteribackup
- 5:e hjul för enklare manövrering
- 125 mm dubbelhjul
- 150 mm dubbelhjul

Övriga tillbehör:

- Speciallängd (utdragbar +15 cm) modell
- Extra hög grind
- Dävert
- Uppresningsstöd
- Uppresningsstöd version 2: placering utanför sidogrind
- Droppställning med enhands snabbjustering
- Vikbar sängavel (fungerar som hjälpnivå för sänglinne)
- Sjukvårdslåspanel
- Elektrisk CPR
- Hållare för urinpåse
- Läs- och matbricka ovanpå sidogrind
- Huvudgavel
- Monitorbord
- Flexibel handkontrollshållare
- Flertalet olika madrasser (rekommenderad storlek 78/88 x 205 x 13 cm)

Dimensioner och inställningar

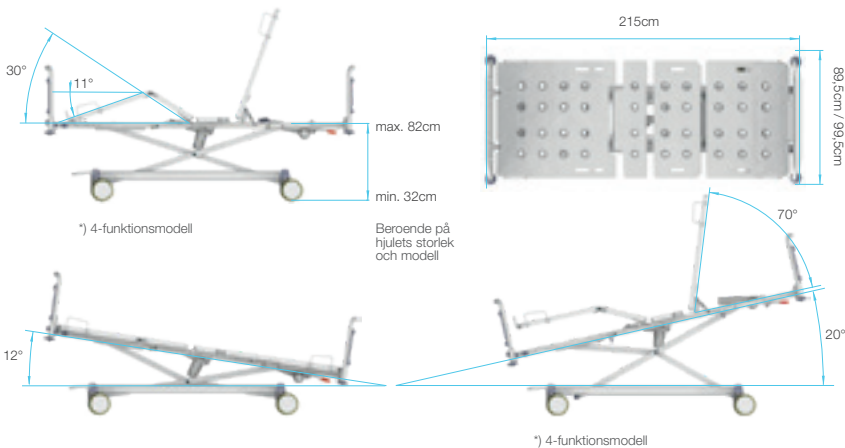

Carena är en revolutionerade sjukhussäng med god ergonomi för både patienter och vårdpersonal. Den vertikala lyft rörelsen kräver inte något extra utrymme och sängen kan flyttas även i trånga utrymmen. Nästa generations sjukhussäng passar bra för både dagkirurgi, akutrum, intensivvård och vårdhem.



En högkvalitetssäng
för dagkirurgi, akutrum,
intensivvård och vårdhem.

Produkten i bild är tilläggsutrustad.

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



Huvudegenskaper:

- 1 Maximal belastning (SWL) 330 kg.
- 2 Samtidig rörelse av olika delar med hjälp av handkontrollen.
- 3 Carena finns även som maskintvättbar modell.

Tekniska specifikationer





Fabriksmonterade tillval:

- Liggdelen kan förlängas +30 cm (för 80 och 90 cm bredd), ABS-plast
- Justerbart metallnåthölje
- Madrassbotten för röntgen (för 80 och 90 cm liggdelar)
- Madrasstoppare
- Tillbehörsskena för ryggsektionen. Inte kompatibel med sidogrindar
- Ø150 mm centrallåsta dubbelhjul med antistatiska styrhjul
- Ø200 mm dubbelhjul med antistatiska styrhjul
- 5:e hjul
- Batteribackup
- Potentialutjämnningssystem
- Fotkontroll för höjdjustering
- Extra handkontroll
- Dävert
- Griphandtag och adapter för griphandtag

Övriga tillbehör:

- Sänggavel, avtagbar, 85 cm: vit, ljusblå, ljusgrön, bok och björk.
- Ramrör: förkromat eller grå.
- Sänggavel, vikbar - fungerar som hjälpnivå för sänglinne.
- Ramrör: förkromat eller grå.
- Sidogrindar långa: krom eller silverfärg
- Sidogrindar 3/4: krom eller silverfärg
- Patientjournalkorg
- Monitorbord
- Droppställning med 4 krokar eller fastsättning på däverten
- Hållare för dräneringspåse
- Hållare för urinpåse
- Stativ för syrgasflaska 5 kg
- Krok för elkabel
- Flertalet olika madrasser (rekommenderad storlek 75/85 x 200)

Dimensioner och inställningar

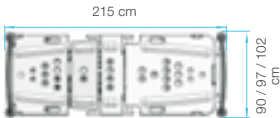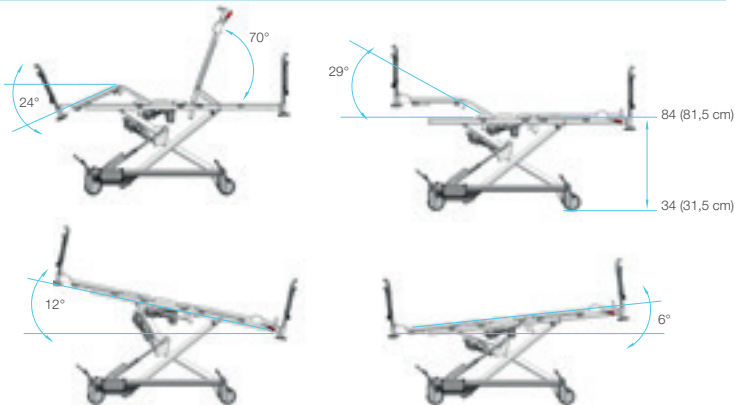

FUTURA PLUS SJUKHUSSÄNG

SJUKHUSSÄNGAR

Den klassiska Futura Plus-sängen har uppdaterats för att ge ännu bättre komfort, användarvänlighet och tillförlitlighet än tidigare. Den hållbara och ekonomiska patientsängen passar utmärkt för sjukhus, äldreboende och vårdhem. Futura Plus finns i en rad modeller med antingen elektriska eller manuella justeringar. Sängen är enkel och bekväm att använda. Med glidande och ergonomisk ryggdel ger sängen bättre komfort för patienten.

En populär och klassisk sjukhussäng som passar utmärkt för sjukhus, äldreboende och vårdhem.



Produkten i bild är tilläggsutrustad.



Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv

Huvudegenskaper:

- 1 Förskjutningsbar och ergonomisk ryggsektion.
- 2 Ramens speciella utformning möjliggör en vidvinkeljustering av bensektionen.
- 3 Bekväm och pålitlig basmodell av sjukhussäng.

Tekniska specifikationer




Fabriksmonterade tillval:

- Sänggavel, avtagbar
- Sänggavel, avtagbar och vikbar - fungerar som hjälpnivå för sänglinne
- Sidogrindar långa: kromade 1-sektions och vikbara
- Sidogrindar 3/4: kromade och vikbara
- Batteribackup
- Trendelenburg
- Adapter för griphandtag och patientens kontrollpanel
- 4 bromspedaler (två på båda ändar)
- Ø150 mm centrallåsta dubbelhjul med antistatiska styrhjul
- Snabbkopplingshandtag för ryggsektion (CPR)
- Fotkontroll
- Dävert
- Griphandtag
- Sköterskepanel
- Patientkontrollpanel, läslampa, ljus under sängen
- Potentialutjämnningssystem


Övriga tillbehör:

- Patientjournalkorg
- Monitornivå
- Droppställning med 4 krokar
- Droppställning med fastsättning för dävert
- Hållare för dräneringspåse
- Hållare för urinpåse
- Stativ för syrgasflaska 5 kg

Dimensioner och inställningar

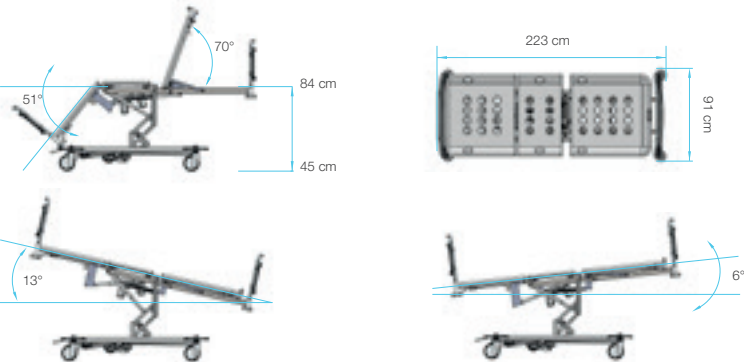

DE VANLIGASTE TILLBEHÖREN FÖR SCANAFIA SJUKHUSSÄNGAR

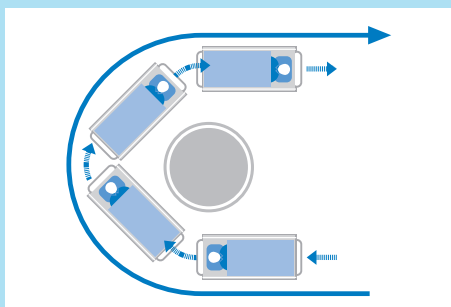

Ett 5:e hjul minskar svängradien



Sköterskepanel



Dävert och Droppställning



Vikbar sängända



Uppresningsstöd/ griphandtag



Extra hög sidogrind och sängända



Läs- och matplatta ovanpå sidogrind



Flexibel handkontrollhållare



Monitorbord



Vadderad stoppning för sidogrind



Utdragbar modell 15/30 cm, beroende på sängmodell



Läs- och matbord

HYDRAULISKA PATIENTVAGNAR



Den multifunktionella och mycket populära patientvagnen Emergo används för patienttransporter, nödsituationer, återhämtning, IVA och mindre procedurer. Den säkra och robusta konstruktionen gör den idealisk för krävande användning.

EMERGO PATIENTVAGN

PATIENTBÅRAR/AKUTVAGNAR

Emergo är en patientvagn som är helt anpassad för att möta vårdpersonalen och patientens behov. Med mångsidiga tillbehör och justeringar säkerställer Emergo effektiva patienttransporter, god patientkomfort och ergonomiska arbetsställningar för vårdpersonalen. Den justerbara madrassbotten gör patientens återhämtning bekväm och eliminerar onödig patientförflyttning från vagnen. Stora, lätta hjul ger utmärkt rörlighet och det 5:e hjulet (tillbehör) förbättrar den totala rörligheten vilket minskar belastningen för personalen. Emergo har många fästpunkter för droppställning och ett brett utbud av andra praktiska tillbehör.

Emergo-serien

- 6250: 2-delad liggyta
- 6260: 2-delad liggyta med underram

- 6350: 3-delad liggyta
- 6360: 3-delad liggyta med underram

Alla vagnar går att få anpassade med "röntgenkasetter"

En mångsidig och mycket populär akutvagn för olika behov.



Produkten i bild är tilläggsutrustad.

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



Huvudegenskaper:

- 1 Modulär struktur möjliggör många olika konfigurationer för att möta avdelningens behov.
- 2 Användarvänlig, med tydliga och enkla funktioner.
- 3 Bra ergonomi för vårdpersonalen.

Tekniska specifikationer




Fabriksmonterade tillval:

- Trådkorg 582 under ryggsektion
- Trådkorg 583 under fotsektion
- Stativ för syrgasflaska under madrass 2 eller 5 kg
- Pappersrullehållare
- Hjul med centrallås 200 mm XSP och 5:e hjul
- ABS förvaringsboxar Small eller Large
- Fast vikbar droppställning för underram

Övriga tillbehör:

- Droppställning med 4 krokar
- Tillbehörsskena, par (inte kompatibel med sidogrindar)
- Tillbehörskorg för fotgavel (kräver fotgavel)
- Åtdragningsbälte
- Hållare för droppställning
- Fotgavel
- Sidogrindar, kromade med gul gummivaddering
- Vikbara körhandtag, kromade med gul gummivaddering
- Flertalet olika madrasser

Dimensioner och inställningar

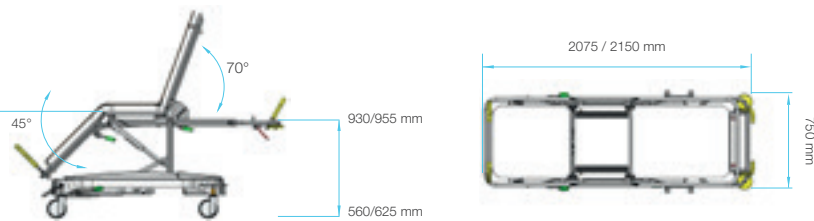

*) Endast fotjustering på modeller med 3-delad liggyta.



UNDERSÖKNINGS- BRITSAR/STOLAR



Idag har vi marknadens mest innovativa undersökningsbritsar i olika modeller. Genomgående är att våra undersökningsbritsar är designade och konstruerade för sjukvård som kräver hög tillförlitlighet, säkerhet samt att de ska vara lätt att använda, underhålla och rengöra. Alla kontrollfunktioner är enkla att justera och helt handsfree, vilket gör vårdpersonalens arbete mer hygieniskt och effektivt.

Mångsidig och populär undersökningsbrits

Den populära 4040X är lämplig för allmänna undersökningar. Undersökningsbritsen är designad och konstruerad för sjukvård som kräver hög tillförlitlighet och säkerhet samt att de ska vara lätta att använda, underhålla och rengöra. Den patenterade konstruktionen och den extremt låga minimihöjden gör att även barn och äldre patienter lätt kan komma upp på undersökningsbritsen. 4040X är lättare och enklare att manövrera än traditionella undersökningsbritsar, tack vare den nya motortekniken som möjliggör justering av ryggsektionshöjden elektriskt eller manuellt.

Marknadens största höjdomfång och hög lastkapacitet gör arbetet bekvämt och effektivt för vårdgivare och ökar säkerheten vid undersökning eller flyttning av patienter. Handsfree höjjusteringsstång gör att britsens höjd och ryggsektion kan justeras från båda sidor av britsen med foten (tillval).

Det största höjdomfånget på marknaden – 40 cm till 90 cm.



Produkten i bild är tilläggsutrustad.

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



Huvudegenskaper:

- 1 Marknadsledande höjdomfång mellan 40–95 cm.
- 2 Enkel ramkonstruktion som underlättar rengöring och ger hög hygiennivå.
- 3 Nya motorer tar hjälp av tyngdkraften vid sänkning, vilket förbättrar säkerheten för både patienter och personal.

Tekniska specifikationer



Fabriksmonterade tillval:


- Två-delade fotstänger för justering av höjd och ryggsektionen
- Trendelenburg
- Batteribackup
- Centralåsta dubbelhjul Ø125 mm

Övriga tillbehör:

- Sidogrindar
- Droppställning
- Armstöd
- Nackkudde
- Undersökningsbelysning
- Körhandtag
- Adapter för tillbehör
- Tillbehörsskena 380 mm x 10 mm x 25 mm (max. 6 st)
- Alla tillbehör kan monteras på tillbehörsskenan
- Anestesibåge
- Fotkontroll för höjjustering

Future
Nature
skai Conductive Läs mer om klädsel på sid 6 och 7.

Dimensioner och inställningar

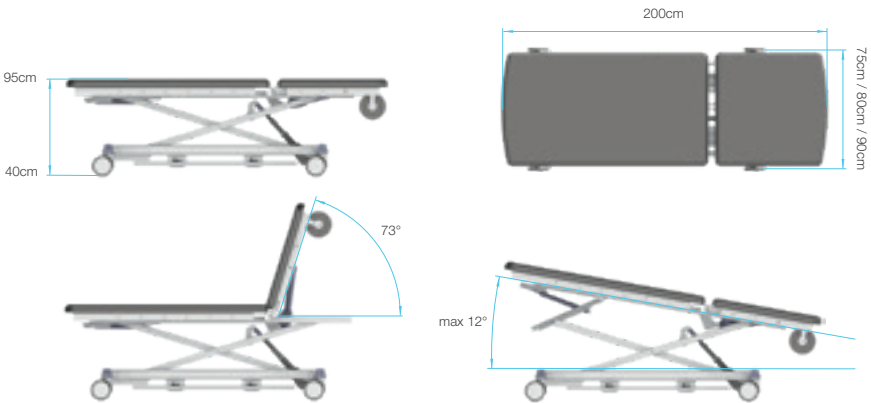

Extra robust för krävande användning

Den innovativa behandlingsbritten 4040XL är ett utmärkt val för de verksamheter som behandlar tyngre patienter. Dess patenterade konstruktion och extremt låga lägsta höjd säkerställer att även patienter i rullstol enkelt kommer upp på britten. Det största höjdomfånget på marknaden och hög belastningskapacitet utgör bekvämt och effektivt arbete för vårdpersonal. Den 90 cm breda patientytan tillsammans med extra stoppade dynor ger bra komfort för patienten.

En innovativ undersökningsbritten med högsta komfort



Produkten i bild är tilläggsutrustad.

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



Huvudegenskaper:

- 1 Patientytans bredd (upp till 100 cm) och tjock stoppning säkerställer patientkomforten.
- 2 Mycket hög maximal belastning (SWL) 300 kg förbättrar patientsäkerheten.
- 3 Höjdomfång från 42 – 97 cm underlättar på- och avstigning för patienten och gör vårdpersonalens arbete mer ergonomiskt.

Tekniska specifikationer



Fabriksmonterade tillval:


- Tvådelad handsfree justeringsstång för höjd- och ryggsektionsjustering
- Elektrisk Trendelenburg och anti-Trendelenburg (batteri inkluderat)
- Batteribackup
- Centrallåsta tvillinghjul Ø125 mm / Ø150 mm
- Bredd på patientytan 80 cm och 100 cm (90 cm standard)

Övriga tillbehör:

- Sidogrindar
- Fotkontroll för höjdjustering (FS32)
- Tillbehörsskena
- Undersökningsbelysning
- Droppställning
- Nackkudde
- Körhandtag
- Anestesibåge
- Armstöd
- Adapter för tillbehör
- Klove (Klamp)
- Alla tillbehör kan monteras på tillbehörsskenan

Future
Nature
Skai Conductive Läs mer om klädsel på sid 6 och 7

Dimensioner och inställningar

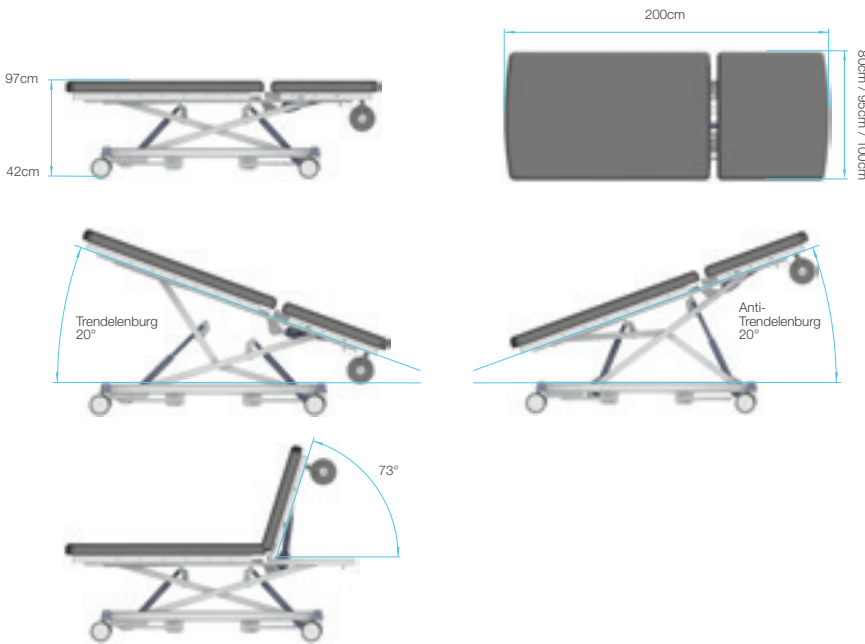

Den mest mångsidiga undersökningsbritten i vårt sortiment

4050X är särskilt väl lämpad för gynekologiska undersökningar, men den kan även användas vid mindre ingrepp och allmänna undersökningar. 4050X har en tredelad patientyta med justeringar för sättessektion, mittsektion och ryggsektion som alla regleras från framsidan av britten med hjälp av det nya fotreglaget, vilket gör vårdpersonalens arbete mer hygieniskt och effektivt.

Det finns två modeller av 4050X: 4050X M som har ett mindre antal funktioner, medan 4050X F är mer omfattande – den har t. ex. en handkontroll med minnesplats, elektrisk sätesjustering och det nya fotreglaget.

Hygienisk lättanvänd undersökningsbrits för flera ändamål



Modell 4050X F

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



Huvudegenskaper:

- 1 Enkel att justera helt handsfree, vilket gör vårdpersonalens arbete mer hygieniskt, ergonomiskt och effektivt.
- 2 Speciellt designad för gynekologiska undersökningar, men kan även användas vid mindre ingrepp och allmänna undersökningar.
- 3 Nya funktioner som ökar användarvänlighet, komfort och patientsäkerhet.

Tekniska specifikationer



Fabriksmonterade tillval:


- Trendelenburg/anti-Trendelenburg med batteri
- Centrallåsbara hjul Ø125 mm / Ø150 mm
- Centrallåsbara elektriskt ledande dubbla hjul Ø 150 mm
- Handsfree justeringsspak i två delar för justering av höjd och ryggdel
- Fotkontroll för höjd- och ryggsektionsjustering
- Batteribackup

Övriga tillbehör:

- Benstöd par, vit plast (för mindre ingrepp). Inkluderar snabbblås och fästremmar.
- Benstöd par, svart gjuten stoppning (för längre ingrepp). Inkluderar rotationslås och fästremmar.
- Infusionsstativ, rakt eller böjt
- Tillbehörsskena
- Snabbblås Ø 20 mm
- Sidoskena
- Anestesibåge
- Körhandtag
- Undersökningslampa (monteras på tillbehörsskenan eller ramen)
- Nackkudde
- Armstöd för provtagning
- Adapter för montering av droppställning (4 fästen)

- Future
- Nature
- Skai Conductive
- Läs mer om klädsel på sid 6 och 7

Dimensioner och inställningar

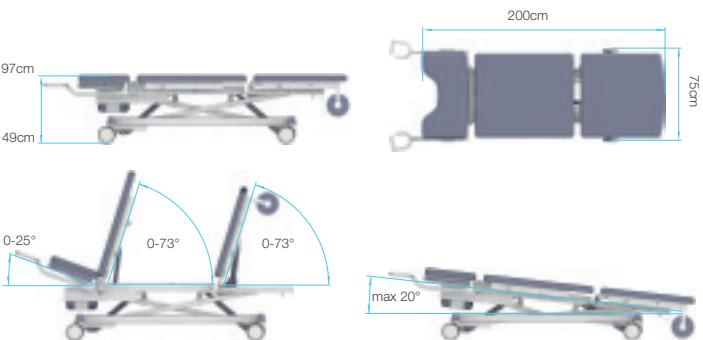

För bättre patientkomfort

Vårt sortiment av Capre behandlingsstolar från Lojer erbjuder en unik och kvalitativ lösning för återhämtning efter dagkirurgi, dialys- och cystostatikabehandling och allmänna undersökningar. De flexibla Capre-stolarna ger ett kvalitetsintryck på mottagningen och förbättrar patienternas komfort under behandlingen.

Capre MC har utformats i samarbete med kirurger för att uppfylla kraven i dagens vårdprocesser inom dagkirurgi, dialys och cystostatiska behandlingar. Tack vare modulstrukturen lämpar sig stolen även som medicinsk undersökningsstol.

Stolen är utrustad med Trendelenburg/chockläge samt tre förprogrammerade minnespositioner (grundläggande, strandstol och liggande) samt en minnesposition som användaren kan programmera själv.

MC-modellen skiljer sig från RC-stolen då stolen har en hel motoriserad bendel och justerbart fotstöd (tillval).

Utmärkt ergonomi och
många justeringsmöjligheter




Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv

Huvudegenskaper:

- 1 Modern design med anatomiskt formad klädsel för optimal patientkomfort.
- 2 Fyra förprogrammerade positioner och en programmerbar position.
- 3 Valfritt fotstöd som patienten kan justera på egen hand

Tekniska specifikationer

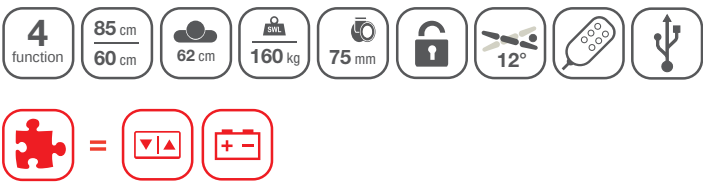

Fabriksmonterade tillval:


- Elektrisk fotkontroll
- Elektiskt fotreglage för trendelenburg
- En- eller tvåfärgad klädsel
- Armstöd för provtagning
- Batteribackup

Övriga tillbehör:

- Bord
- Flexibelt surfplattestativ
- LED-ljus (USB)
- Droppställning med enhandsjustering
- Plastöverdrag för bensektionen

Future  Läs mer om klädsel på sid 6 och 7

Dimensioner och inställningar

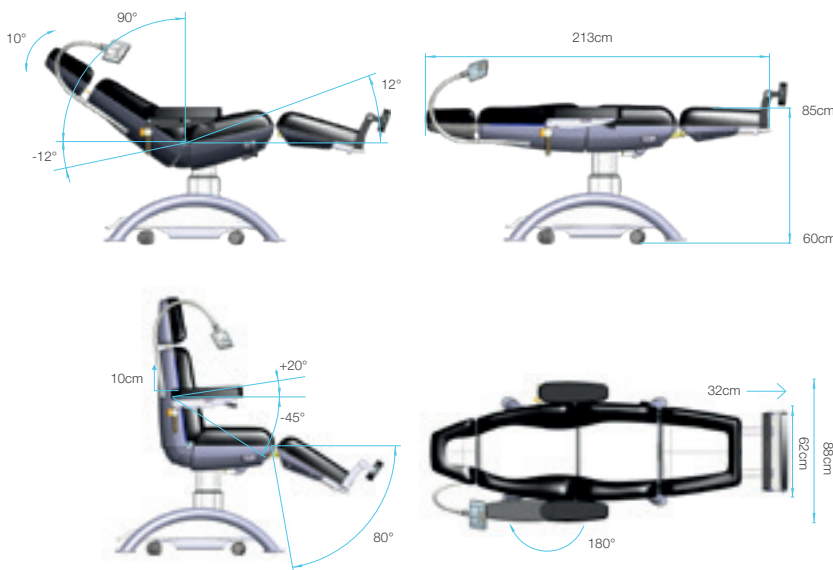

För återhämtning efter dagoperation

Multifunktionsstolen Capre RC har utformats tillsammans med kirurger för att uppfylla kraven efter dagoperation och används istället för den traditionella sjukhussängen under återhämtning efter operation.

Capre-stolen har behagligt konturerad klädsel, individuella justeringsmöjligheter (med upp till fem motorer) och inbyggda bekvämligheter, som surfplattestativ och läslampa. Styrsystemet möjliggör oberoende justering av stolens höjd, ryggsektion, sittvinkel och bensektioner. Bendelen är delad och motoriserad. Både huvuddelen och den delade bensektionen har en längdjusteringsmekanism.

Stolen är utrustad med Trendelenburg/chockläge samt tre förprogrammerade minnespositioner (grundläggande, strandstol och liggande) samt en minnesposition som användaren kan programmera själv.

Flexibla justeringar för
patientens specifika behov



Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



Huvudegenskaper:

- 1 Modern design med anatomiskt formad klädsel för optimal patientkomfort.
- 2 Fyra förprogrammerade positioner och en programmerbar position.
- 3 Justerbart armstöd (höjd-, vinkeljustering och rotation)

Tekniska specifikationer



Fabriksmonterade tillval:


- Elektrisk fotkontroll
- Elektiskt fotreglage för Trendelenburg
- En eller tvåfärgad klädsel
- Armstöd för provtagning
- Batteribackup

Övriga tillbehör:

- Bord
- Flexibelt surfplattestativ
- LED-ljus (USB)
- Infusionsstativ med enhandsjustering

Future  Läs mer om klädsel på sid 6 och 7

Dimensioner och inställningar

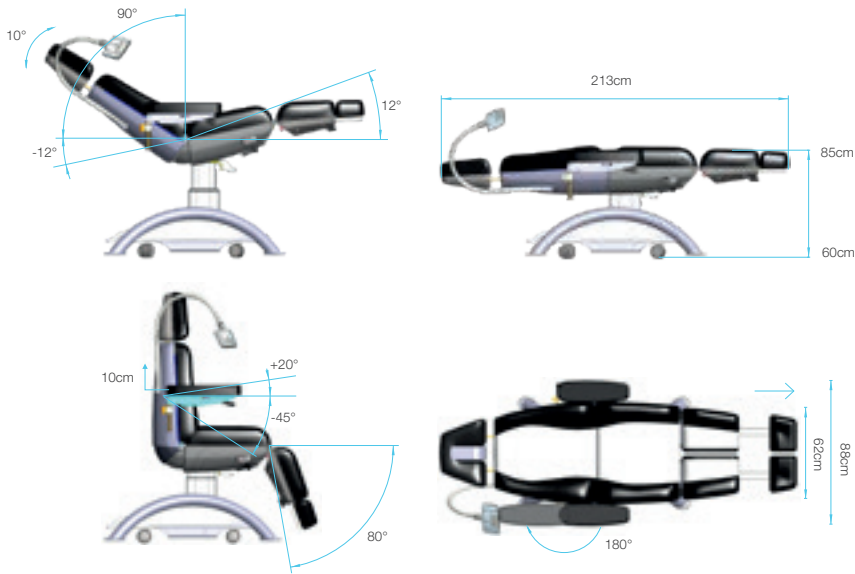

OPERATIONSBORD



Operationsborden från Lojer erbjuder de bästa funktionerna på marknaden och används av kirurger och operationspersonal runt om i världen. De utvecklas och tillverkas i Finland med material och komponenter av högsta kvalitet. Lojer har 30 års erfarenhet av att utveckla sjukhusutrustning och har ett nära samarbete med branschen inom forskning och utveckling.

Elektriskt operationbord för dagkirurgi

Scandia SC440 Prime, det utmärkta valet när du letar efter ett högkvalitativt och mångsidigt operationsbord för allmän- och dagkirurgi. Det elektriska bordet har alla mångsidiga funktioner som krävs vid kirurgiska ingrepp. Operationsbordet är noggrant designat för att ge maximal effekt och större utrymme för det kirurgiska teamet.

Den nya ramkonstruktionen är konstruerad för enkel och smidig rengöring för att uppfylla de strikta hygienkrav som ställs idag. Operationsbordets modulbaserade konstruktion möjliggör de flesta typer av kirurgiska ingrepp och kompletteras enkelt med vårt stora sortiment av tillbehör.



Modulbaserad konstruktion möjliggör de flesta typer av kirurgiska ingrepp


Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



Huvudegenskaper:

- 1 Operationsbordet kan enkelt anpassas för olika operationer
- 2 Samtidig rörelse av olika sektioner vid användning av förprogrammerade minnespositioner eller nolläge.
- 3 Ett utmärkt val i förhållande till pris och kvalitet

Tekniska specifikationer

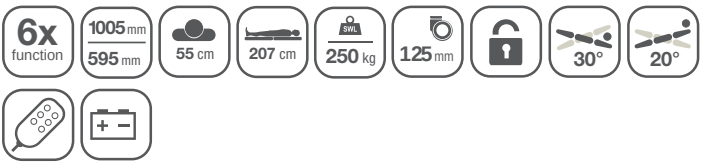


Fabriksmonterade tillval:

- Elektrisk förskjutningsbar bordsskiva (300 mm)
- Fästen och ställ för röntgenkassett (rygg- och bensektion)

Övriga tillbehör:

- Flera olika typer av tillbehör såsom klovar (klampar), armbord och madrasser

Dimensioner och inställningar

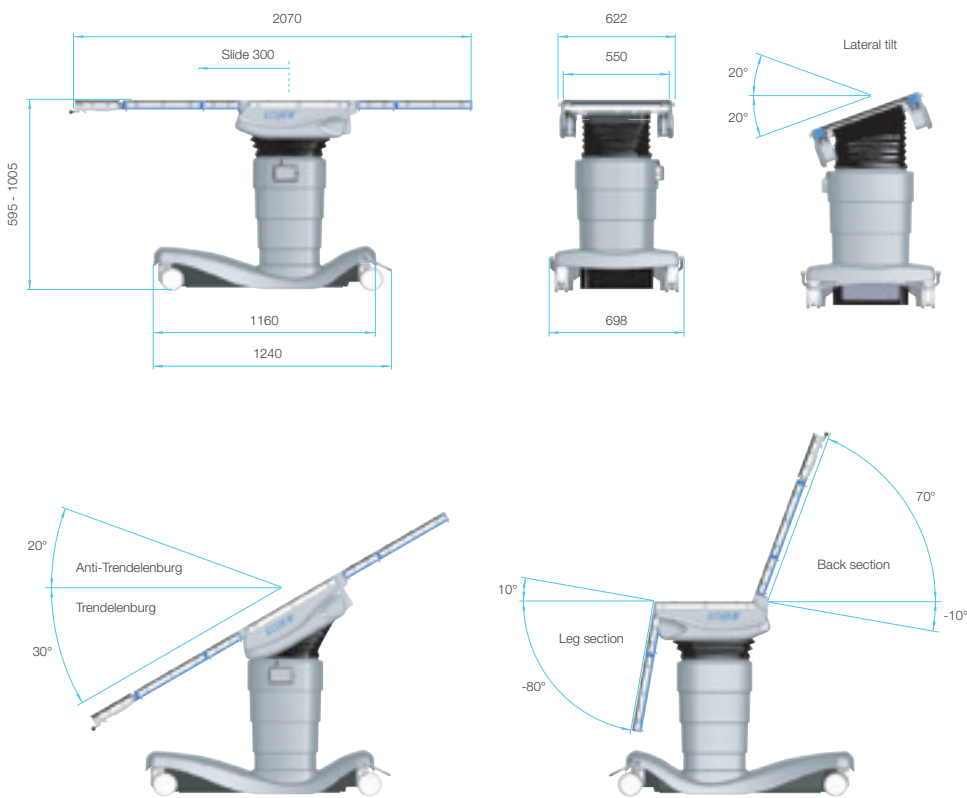

Elektrohydrauliskt operationsbord för all typ av kirurgi

Scandia SC 330 är ett modernt elektrohydrauliskt operationsbord som erbjuder marknadsledande funktioner som kan anpassas för olika behov. Operationsbordet lämpar sig för alla typer av kirurgiska ingrepp. Den modulbaserade liggytan har utformats för att följa kroppens anatomi, vilket ger optimalt stöd oavsett vilket kirurgiskt ingrepp som sker. Bordets höjd är justerbart mellan 650 - 1010 mm, och glidskivan (tillval), gör det ännu mer anpassningsbart för olika typer av procedurer.




Produkten i bild är tilläggsutrustad.



Huvudegenskaper:

- 1 3 st dubbelhjul underlättar manövrering och rotering av bordet på plats
- 2 Handkontroll som enkelt används med en hand
- 3 Liggytans sektioner kan enkelt bytas ut vid behov för olika procedurer


Tekniska specifikationer

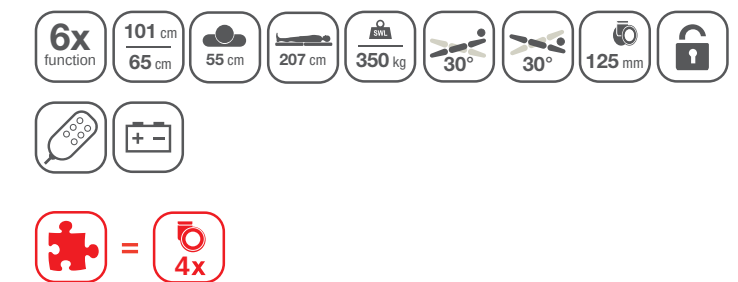

Fabriksmonterade tillval:

- 4:e hjul
- Bas och skyddskåpa i rostfritt stål
- Motoriserat drivhjulsystem
- Förskjutningsbar bordsskiva 300 mm
- Bluetooth handkontroll
- Flera olika typer av tillbehör såsom klovor (klampar), armbord och madrasser

Dimensioner och inställningar

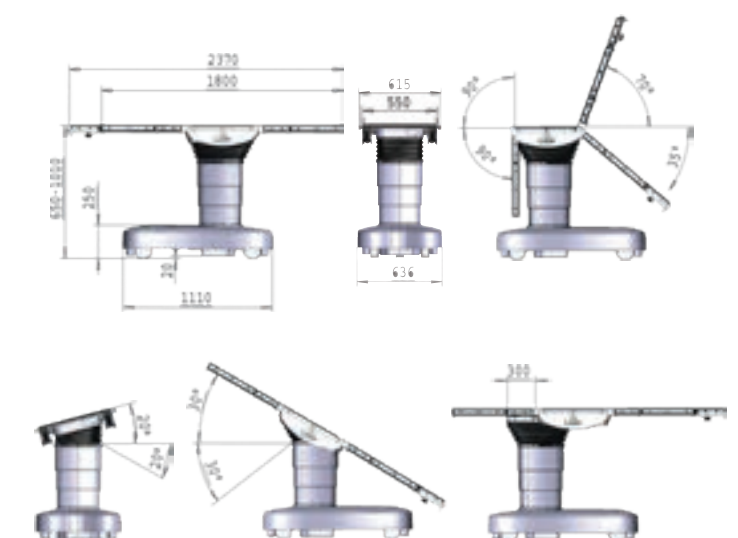

TILLBEHÖR OPERATIONSBORD

Lojers konkurrenskraftiga sortiment av tillbehör är utformat för att komplettera våra operationsbord vid kirurgiska ingrepp. Lojer Group är högt ansedda av kunder över hela världen och är en pålitlig samarbetspartner. Med ett omfattande utbud av kvalitetsprodukter tillverkade i egna fabriker i Finland, pålitlig leveransservice över hela världen och mer än 30 års kompetens, garanterar vi kostnadseffektivitet för våra kunder.

Funktionalitet, ergonomi, patientkomfort och enkel rengöring är vårt fokus och genom att kontinuerligt investera i användarorienterad utveckling av operationsbordstillbehör, skapas innovativa lösningar för våra kunders behov. Sortimentet utökas kontinuerligt.



Skanna QR-koden för broschyr med alla OP-tillbehör!



SJUKHUSVAGNAR INSTRUMENT- OCH SERVICEVAGNAR



Hos Medema hittar du sjukhusvagnar för alla verksamhetsområden. Vi erbjuder även instrument-, och servicevagnar. Alla våra vagnar är tillverkade i kvalitetsmaterial och är mycket hållbara.

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv



Insausti - sjukhusvagnar för alla verksamhetsområden

Insaustis sjukhusvagnar är tillverkade i Spanien av högkvalitativa material och uppfyller de strängaste kraven i branschen. Tack vare modullösningen med utbytbara lådor möjliggörs effektiv materialhantering. Produkterna används idag på flera svenska sjukhus och privatkliniker. Vagnarna kan även anpassas för små utrymmen och kan även placeras under arbetsbänkar. Alla standardvagnar är CE-märkta. Nedan finner du några exempel.



MULTIFUNKTIONSVAGNAR



AKUTVAGNAR



MEDICINVAGNAR



ANESTESIVAGNAR



LAGRINGS- OCH TRANSPORTVAGNAR



SPECIALVAGNAR



De flexibla Insausti-vagnarna kan skräddarsys efter specifika behov och det finns ett stort sortiment av tillbehör att välja på.



Handskhållare tre storlekar



Papperskorg liten dubbel
13 lit x 2



200 mm ISO låda (19 liter)



ISO-korg 240 mm för lägsta lådan



Låddelning ISO för läkemedelsvagn
400 x 600 mm



Hjärtbräda



Hyllplan och kryddhylla till stativ



Droppställning



Roterande arm för defibrillator



Plomberingslås 2 lådor



Sidobord



Låddelning för SQ-vagn



Instrumentvagn 609

Ram av kromade stålror. Två avtagbara stålplattor (40 x 60 cm). Ø 75 mm hjul gör vagnen enkel att flytta. Vagnen kan placeras under en 80 cm hög arbetsbänk. Storlek: 75 x 60 x 40 cm (H x L x B).

Instrumentvagn 611

Ram av kromade stålror. Två avtagbara stålplattor (40 x 60 cm). Ø 75 mm hjul gör vagnen enkel att flytta. Placerat under den övre plattan sitter en plastlåda som kan öppnas från bordets båda sidor. Vagnen kan placeras under en 80 cm hög arbetsbänk. Storlek: 75 x 60 x 40 cm (H x L x B).



Avdelningsvagn 262

Ram och körhandtag av kromade stålror. Två solida plattor av rostfritt stål (40 x 60 cm). Ø 100 mm stora hjul gör vagnen enkel att flytta. Under den övre plattan finns en plastlåda som öppnas från vagnens båda sidor. Storlek: 78 x 60 x 40 cm. (H x L x B) / räknad med skjuthandtag: 92 x 69 x 40 cm (H x L x B).



Servicevagn 285

Stomme av rostfritt stål. Två massiva plattor av rostfritt stål (55 x 80 cm) med kanter för att förhindra att föremål faller. Körhandtag. Stora Ø 125 mm hjul (2 låsbara) av korrosionsbeständigt material. Storlek: 90 x 80 x 55 cm (H x L x B).



SÄNGBORD



Ett bra och funktionellt sängbord underlättar vårdpersonalens arbete och ger bättre komfort för patienten. Lojers utbud av sängbord representerar finsk kvalitetstillverkning för olika typer av sängar. Det finns även sängbord i massivt trä i lite olika varianter. Kontakta oss för mer information.

Sängbord Nova 2660

Det funktionella, säkra och stilrena Nova 2660 lämpar sig för både sjukhus, privata kliniker och vårdhem. Tack vare genomdragbara lådor kan bordet enkelt användas från både höger och vänster sida om sängen. Bordet är ätt att hålla rent. Lättrullade hjul för tyst förflyttning. Finns även i bokmelamin som tillval. Rundade kanter och balanserad konstruktion gör bordet stabilt och säkert även när du använder läs- / matbrickan. Vinkeln på läs- och matbrickan är justerbar. Storlek (B x D x H): 66 x 45 x 86 cm.

Tillbehör: Bordsskydd av ABS-plast



Läs- och matbord Nova 2680

Nova läs- och matbord en praktisk lösning för sjukhus- och vårdsängar. Bordet går tillräckligt högt över sängen för att kunna användas bekvämt av patienten. Lätt att förvara tack vare den nedfällbara bordsskivan och kan enkelt kunna ställas i led med fler bord.

Storlek: (B x D x H) 78 x 45 x 78 - 106 cm



Sängbord Ada

Ett hållbart, säkert och modifierbart sängbord, för användning i krävande sjukhusmiljöer. De 75 mm låsbara dubbelhjulen gör att bordet är enkelt att flytta men även kan låsas ordentligt på plats. Stomme av epoxibelagt stål. Sidopaneler, bordsskiva och ovansida av laminat. Den översta lådan är låsbar. Läs- och matbrickans vinkel justeras steglöst. Finns även utan läs- och matskiva. CE-märkt och överensstämmer med MD-föreskrifterna. Storlek: (B x D x H) 47,5 x 60 x 90 cm.

Tillbehör: Ovanskiva och sidopaneler: björk- eller bokfärgad melamin | Ljusblå lådor | Skydd för ovanskiva (ABS-plast) | Toffelställning | Tidning-skorg | Flask- eller avfallspåsställning | Ställning för anropningsapparater



ADA FINNS ÄVEN SOM MASKINTVÄTTBAR MODELL



Sängbord 2020


Skåpets ram är av vit epoxibelagt stål. Lådans frontpanel finns som standard i björk eller bok. Matbrickans höjd är lätt att justera och kan ändras mellan-vänster- och högerhänt användning utan verktyg. Fyra låsbara hjul, och en säkerhetsbegränsare för att undvika risk att lådor dras ut av misstag. Toffelställ ingår som standard. Storlek (B x D x H): 49 x 57 x 90 cm.

Tillbehör: Matbricka som kan vinklas | Kromad sidokorg | Fäste till adapter för sköterskeanrop | Lås för den övre lådan

2020 FINNS ÄVEN SOM ANTIMIKROBIELL MODELL

MADRASSER

Lojers madrasser för sjukhussängar har utvecklats i samarbete med industriledande tillverkare. Madrasserna har utformats efter gällande standard för sjukhussängar och lämpar sig för låg- och medelriskspatienter. I sortimentet ingår även lämpliga tillval för patienter med vård i hemmet eller för andra vårdinrättningar och privata kliniker.

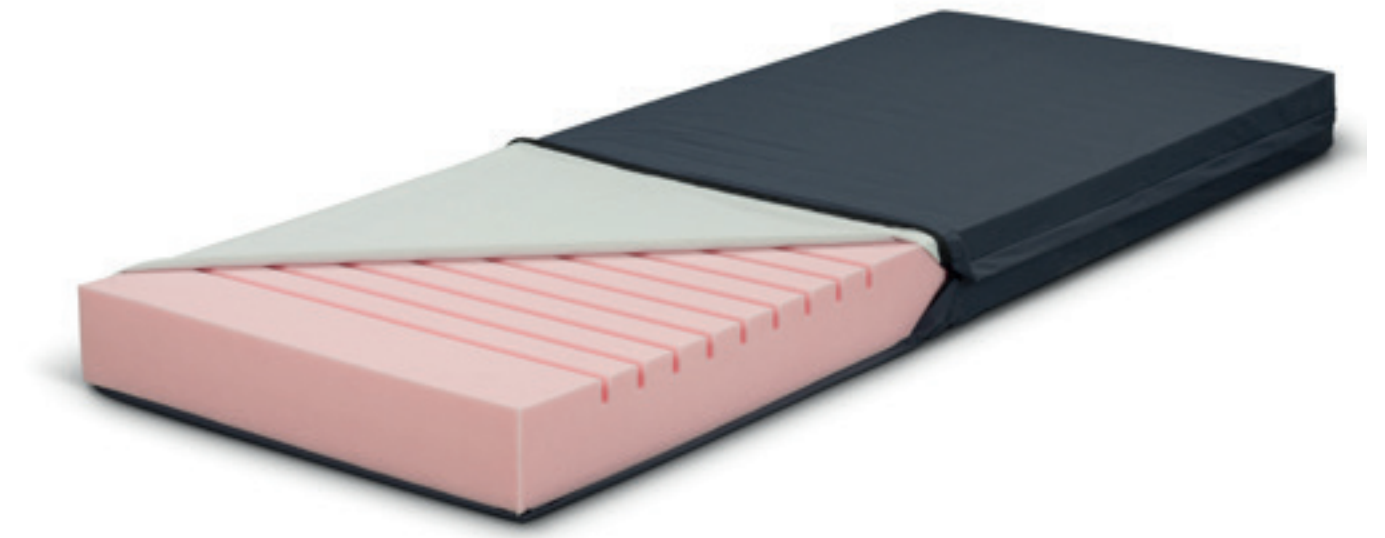

FlexCare Hygienmadrass

FlexCare är en utmärkt madrass för lågriskpatienter på sjukhus, vårdhem eller inom hemtjänst. FlexCare är designad för mobila patienter som inte löper någon risk att utveckla trycksår.

Den 13 cm tjocka madrassen är gjord av flamskyddstestad och slitstarkt skum (densitet 40 kg/m³) med zonindelning på ena sidan. Viktrekommendationen är under 150 kg.

Hygienöverdraget är tillverkat i ett hygientyg av polyester belagt med polyuretan, som är ogenomträngligt för vätskor men som samtidigt andas. Materialet är Oeko-Tex certifierat, bielastiskt, antimikrobiellt *) och flamskyddat. Dragkedjan skyddas av en droppflik för att förhindra att fukt tränger in på insidan av hygienöverdraget. Överdraget kan tvättas i maskin i 70–95 °C när det vänds ut och in.

FlexCare Rescue: Hygienmadrassen finns även med ett räddningsöverdrag.

*) testad enligt ISO 22196, den aktiva biociden är dimetyloktadecyl (3-trimetoxisilylpropyl) ammoniumklorid EU 528/2012

Storlekar: 75x200, 85x200, 78x205, 88x205
Tjocklek: 13 cm

HighCare Antidecubitus-madrass

HighCare är en högkvalitativ statisk madrass mot trycksår designad för att förebygga trycksår hos patienter med låg till medelhög risk för trycksår i till exempel sjukhus, vårdhem och hemtjänst.

Madrassens 5 cm tjocka övre skikt är tillverkat i ett flamskyddat, mjukt formbart viskoelastiskt skum (densitet 50 kg/m³). Det 8 cm tjocka basskiktet är ett flamskyddat och slitstarkt styvt skum, HR-skum (densitet 50 kg/m³). De två skikten är sammanlimmade och har en total tjocklek på 13 cm. Viktrekommendation upp till 160 kg.

Hygienöverdraget är tillverkat i ett hygienytg av polyester belagt med polyuretan, som är ogenomträngligt för vätskor men som samtidigt andas. Materialet är Oeko-Tex certifierat, bielastiskt, antimikrobiellt *) och flamskyddat.

Dragkedjan skyddas av en droppflik för att förhindra att fukt tränger in på insidan av hygienöverdraget. Överdraget kan tvättas i maskin i 70–95 °C när det vänds ut och in.

HighCare Rescue:

Antidecubitus-madrass finns även med ett räddningsöverdrag.

*) testad enligt ISO 22196, den aktiva biociden är dimetyloktadecyl (3-trimetoxisilylpropyl) ammoniumklorid EU 528/2012

MaxCare antidecubitus-madrass

MaxCare är en högkvalitativ statisk madrass för breda sängar eller där mycket hög patientvikt krävs vid förebyggande av trycksår. Madrassen är avsedd för att förebygga trycksår hos patienter med låg till medelrisk för trycksår i till exempel sjukhus, vårdhem och hemtjänst.



Madrassens 5 cm tjocka övre skikt är tillverkat i ett flamskyddat, mjukt formbart viskoelastiskt skum (densitet 50 kg/m³).

Det 12 cm tjocka basskiktet är ett flamskyddat och slitstarkt styvt skum, HR-skum (densitet 55 kg/m³). De två skikten är sammanlimmade och har en total tjocklek på 17 cm. Den rekommenderade vikten är upp till 250 kg.

Hygienöverdraget är tillverkat i ett hygienytg av polyester belagt med polyuretan, som är ogenomträngligt för vätskor men som samtidigt andas. Materialet är Oeko-Tex certifierat, bielastiskt, antimikrobiellt *) och flamskyddat. Dragkedjan skyddas av en droppflik för att förhindra att fukt tränger in på insidan av hygienöverdraget. Överdraget kan tvättas i maskin i 70–95 °C när det vänds ut och in.

MaxCare Rescue: Antidecubitus-madrass finns även med ett räddningsöverdrag.

*) testad enligt ISO 22196, den aktiva biociden är dimetyloktadecyl (3-trimetoxisilylpropyl) ammoniumklorid EU 528/2012

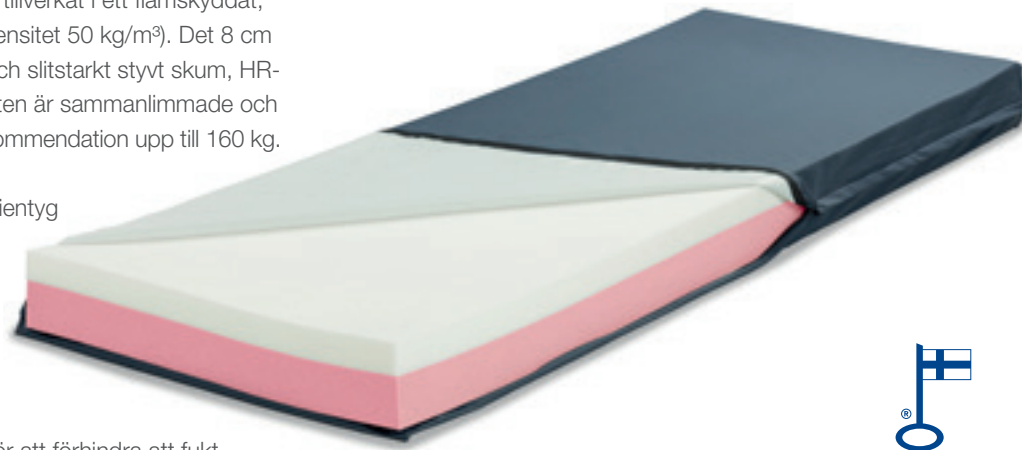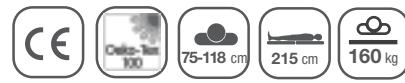

Storlekar: 75x200, 80x200, 85x200, 78x205, 88x205, 78x215, 88x215, 118x205 cm
Tjocklek: 13 cm



Storlek: 118 x 205 cm
Tjocklek: 17 cm




Babymadrass

En bra standardmadrass för nyfödda och spädbarn

Babymadrassen är tillverkad av brandsäkert polyuretanskum (densitet 25 kg/m³). Överdraget är blått polyuretanbelagt polyesterhygieniskt tyg som är ogenomträngligt för vätskor men som samtidigt andas. Materialet är Oeko-Tex-certifierat, bi-elastiskt och antimikrobiellt *). Dragkedjan skyddas av en droppflik för att förhindra att fukt tränger in i hygienöverdraget. Överdraget kan tvättas i maskin på 70–95°C med överdraget vänd ut och in.

Storlek: 38x62 cm
Tjocklek: 5 cm

*) testad enligt ISO 22196, den aktiva biociden är dimethyloctadecyl (3-trimetoxysilylpropyl) ammoniumklorid EU 528/2012.

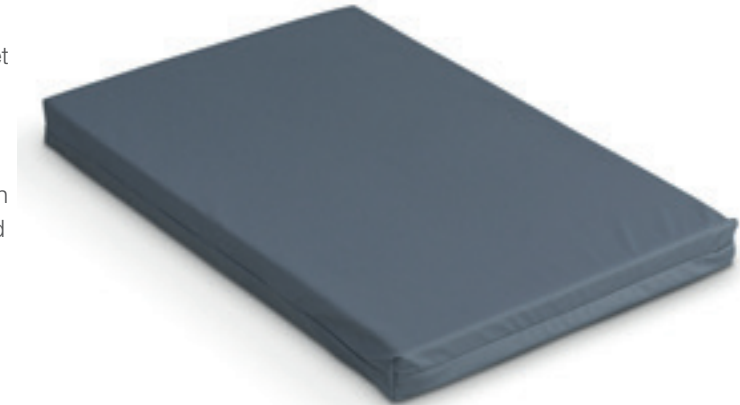

Antistatiska madrasser

För Emergo patientbårar/akutvagnar

Madrasskärna av brandhämmande skum och madrassöverdrage av ett hygieniskt polyuretanbelagt tyg som är ogenomträngligt för vätskor, men med bra andningsegenskaper.

Madrassen är utrustad med kardborreband på botten och på sidorna. Två transportband på sidorna och fasade hörn på madrassen.

Brännbarhet med standard IMO FTPC del 9 (SL 1).
Tillverkad i Finland och CE-märkt.

Storlek: 65x193 cm
Tjocklek: 5 cm, 8 cm eller 10 cm



STOLAR OCH PALLAR

Lojers stolar och pallar, som tillverkas i Finland, är speciellt utformade för professionell vårdpersonal. Sortimentet har valts ut i nära samarbete med yrkesverksamma fysioterapeuter.

Vi har bland annat förbättrat användbarheten genom att minska bottenramens diameter, men med lika robusta stolar som tidigare. Stolarna kan till exempel utrustas med vår nya Future-klädsel (14 färger), vit bas, vita hjul eller för sadelstolar så kallad svängande sadelmekanism som är flexibel i alla riktningar.

Pall Easy Rider CH1100

En populär sadelformad pall med sömlös klädsel. Klädsel i det nya extremt hållbara materialet Future (14 färger), miljövänliga Nature (5 färger) eller som tillval svart läder. Stolen har en vinklinsbar sits som standard. Höj- och sänkbar mellan 54-74 cm med gaskolv med svart skydd. Sitsens bredd är 50 cm och längd 35 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminum Ø 528 mm bas | höjdjustering Medium (54 – 74 cm) | Svarta hjul 65 mm | klädsel Future (14 färger) eller Nature (5 färger)



Produkt med Future Plum och tillval: vit bas Ø610 mm, ryggstöd och vita hjul 65 mm.



FINNS ÄVEN SOM **ANTI-MIKROBIELL** MODELL

LOJER® Antimicrobial



Pall Easy Rider CH1100S (Lagervara)

En mycket populär sadelformad pall för snabb leverans. Sits utan sömmar i det nya extremt hållbara materialet Future, i färgen Carbon. Vinklinsbar sits som standard. Höj- och sänkbar mellan 54-74 cm med gaskolv med svart skydd. Sitsens bredd är 50 cm och längd 35 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminum Ø 528 mm bas | höjdjustering Medium (54 – 74 cm) | Svarta hjul 65 mm | klädsel Future, färg Carbon



Pall Easy Rider FIT CH1200

En ny sadelformad pall med en smalare sits utan sömmar. Klädsel i det nya extremt hållbara materialet Future (14 färger), miljövänliga Nature (5 färger) eller som tillval svart läder. Stolen har en vinklinsbar sits som standard. Höj- och sänkbar mellan 54-74 cm med gaskolv med svart skydd. Sitsens bredd är 45 cm och längd 35 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminiumbas Ø 528 mm | höjdjustering Medium (54 – 74 cm) | Svarta hjul 65 mm | klädsel Future (14 färger) eller Nature (5 färger)



Produkt med Future Pistachio, polerad aluminiumbas Ø 528 mm och tillval: svarta låsbara hjul 65 mm och fotstödring.



Pall Easy Rider PRO CH1300

En mycket populär sadelformad pall med en 2-delad justerbar sits utan sömmar. Bredden på sitsen kan justeras från 42 cm till 48,5 cm. Klädsel i det nya extremt hållbara materialet Future (14 färger), miljövänliga Nature (5 färger) eller som tillval svart läder. Stolen har en vinklinsbar sits som standard. Höj- och sänkbar mellan 54-74 cm med gaskolv med svart skydd. Sitsens bredd är 42 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminiumbas Ø 528 mm | höjdjustering Medium (54 – 74 cm) | Svarta hjul 65 mm | klädsel Future (14 färger) eller Nature (5 färger).



Produkt med Future Pistachio, polerad aluminiumbas Ø 528 mm, svarta låsbara hjul 65 mm och tillval fotstödsring.



Stol Step Anatomic med ryggstöd CH1400

En anatomiskt utformad kontorsstol med ryggstöd. Klädsel i det nya extremt hållbara materialet Future (14 färger) eller miljövänliga Nature (5 färger). Stolen har ett vinklinsbart ryggstöd och gaskolv för höjdjustering med skydd i samma som basfärgen. Sitsens bredd och längd är 39 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg. Safe Working Load (SWL) 150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminiumbas Ø 610 mm | höjdjustering Medium (50 – 70 cm) | svarta 65 mm hjul | klädsel Future (14 färger) eller Nature (5 färger).



Produkt med Future Sunrise, polerad aluminiumbas Ø 610 mm och tillval: fotstödsring och ESD 50 mm hjul.

Pall med rund sits CH1500

Omtyckt rund pall med klädsel i det nya extremt hållbara materialet Future (14 färger) eller miljövänliga Nature (5 färger). Stolen har ett vinklinsbart ryggstöd och gaskolv för höjdjustering med skydd i samma som basfärgen. Sitsens bredd 37 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminiumbas Ø 528 mm | höjdjustering Medium (50 – 70 cm) | svarta 65 mm hjul | klädsel Future (14 färger) eller Nature (5 färger).



Produkt med Future Sapphire, polerad aluminiumbas Ø 610 mm och tillval: ryggstöd och belastningsslåsta 50 mm hjul.



Tekniska specifikationer och tillval						
Modell	CH1100	CH1100S	CH1200	CH1300	CH1400	CH1500
Bas (Polerad)	Ø 528 mm	Ø 528 mm	Ø 528 mm	Ø 528 mm	Ø 610 mm	Ø 528 mm
Höjd justerbar (Medium)	54-74 cm	54-74 cm	54-74 cm	54-74 cm	50-70 cm	50-70 cm
Hjul	65mm, svart	65mm, svart	65mm, svart	65mm, svart	65mm, svart	65mm, svart
Klädsel	Future 14 färger	Future Carbon	Future 14 färger	Future 14 färger	Future 14 färger	Future 14 färger
	Nature 5 färger		Nature 5 färger	Nature 5 färger	Nature 5 färger	Nature 5 färger
Sits bredd	50 cm	50 cm	45 cm	42 - 48,5 cm	39 cm	Ø 37 cm
Sits längd	35 cm	35 cm	35 cm	42 cm	39 cm	Ø 37 cm
Tillval						
Höjd justerbar Låg	46 - 60 cm	-	46 - 60 cm	46 - 60 cm	42 - 55 cm	42 - 55 cm
Höjd justerbar Hög	65 - 91 cm	-	65 - 91 cm	65 - 91 cm	58 - 83 cm	58 - 83 cm
Klädsel svart läder	o	-	o	o	o	o
Bas: polerad Ø 610 mm vit Ø 528 eller 610 mm	o	-	o	o	Vit Ø 610 mm	o
Hjul: 65 mm, vita 65 mm låsbara, svarta eller vita 50 mm belastningslåsta, svarta 50 mm eller 65 mm ESD, svarta. ESD hjul enbart med svart ESD konstläder.	o	-	o	o	o	o
Ryggstöd med vinkeljustering - kräver bas Ø 610 mm	o	-	o	o	X	o
Justerbar fothöjd - kräver 65 mm hjul - inte kompatibel med Höjd justerbar Låg	o	-	o	o	o	o
Fotstödsring - inte kompatibel med justerbar fothöjd - inte kompatibel med höjd justerbar Låg	o	-	o	o	o	o
Rörlig sits - inte kompatibel med ryggstöd - lägger till 2 cm för min och max höjd	o	-	o	o	-	-

X = standard, o = tillbehör som tillval, - = inte tillgängligt



Fotstödsring
50 mm eller 65 mm ESD, svarta (antistatiska). ESD-hjul enbart med svart ESD-konstläder.
Rörlig sits *)
Vit bas med vita hjul



Standard 65 mm, svart (vitt som tillval)
Tillval 65mm låsbara, svarta eller vita
Tillval 50 mm belastningslåsta, svart (låses när man sätter sig)
Tillval 50 mm eller 65 mm ESD, svarta (antistatiska). ESD-hjul enbart vid svart ESD- konstläder

*) Mekanism som är flexibel i alla riktningar. Sitsen anpassar sig efter användarens rörelser, ökar räckvidden och minskar belastningen på bröstbenet. Denna funktion aktiverar den som sitter och minskar tröttheten i ryggen, vilket eliminerar behovet av ytterligare vinkeljustering.

FINNS ÄVEN SOM ANTI-MIKROBIELL MODELL

LOJER[®] Antimicrobial

IKONFÖRKLARING



Ytans bredd
Bredd på produktens patientyta

65 cm



Patientytans längd
Längd på produktens patientyta

193 cm




Safe Working Load
Maximal belastningskapacitet, inklusive patientvikt, madrasser och tillbehör

200 kg



Patientvikt
Högsta tillåtna patientvikt

100 kg

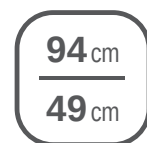

Höjdjusteringsomfång
Max. och min. höjd på madrassbasen

94 cm

49 cm



Hjuldiameter
Diameter på individuellt låsta hjul eller centrallåsta hjul (mm)

125 mm



Dubbelhjuldiameter
Diameter på individuellt låsta hjul eller centrallåsta tvillinghjul (mm). Rörligheten och hållfastheten av dubbelhjul är betydligt bättre än standardhjul.

125 mm



5:e hjul
Ett 5:e hjul i mitten av sängen förbättrar rörligheten.

5 x




Centrallås
Produkten har mekanisk eller elektrisk centrallåsning av hjul. Låsning utförs genom att låsa varje hjul samtidigt eller med ett infällbart lyftsystem.



Antal funktioner
Antal funktioner som produktens har. Exempelvis höj- och sänkbart samt justerbar ryggdel (= 2x)

2x function

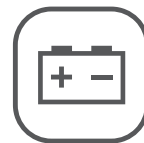

Batteridrift
Produkten kan utrustas med batteri (vanligtvis som tillval)



Handkontroll
Produkten kan justeras med handkontroll



Hands free – höjdjustering
Höjden på produkten kan justeras med foten från alla sidor.



Elektriskt fotkontroll
Produkten kan justeras med fotkontroll



Hydraulisk höjdjustering
Höjden på produkten kan justeras hydrauliskt.




Trendelenburg
Produkten har Trendelenburg.



Anti-trendelenburg justering
Produkten har anti-Trendelenburg justering.



CPR-funktion
Ryggdelen kan snabbt sänkas till horisontellt läge.

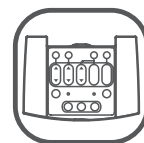

Sköterskepanel
Valfri kontrollpanel tillåter användning av förprogrammerade funktioner eller hindrar patienten från att använda vissa funktioner.



Tillbehör
Produkten kan utrustas med fabriksmonterade tillbehör eller eftermonterade tillbehör.





FÖRSÄLJNING LOJER SJUKHUS- OCH VÅRDPRODUKTER

Medema Physio AB, Torshamnsgatan 35, SE- 164 40 Kista
Tel +46 8 404 1200 | Fax +46 8 28 00 15 | info@medema.se

www.lojer.com/sv

MEDEMA SERVICE

Fyll i serviceformuläret på medema.se » Felanmälan, eller skicka mail till: service@medema.se